



Ihr Desinfektionsmittelhersteller  
vom Niederrhein



PRAXIS  
KLINIK  
PFLEGE



**Gesamtkatalog 2026**

Wirksam schützen was wichtig ist



# Entwicklungs- und Herstellerkompetenz rund um Desinfektion und Hygiene

## Wirksam schützen was wichtig ist

*Viren und Keime sind unsere täglichen, krankmachenden Begleiter. Überall dort, wo hohe Anforderungen an die Hygiene von Händen, Flächen oder Instrumenten gestellt werden, leistet DrDeppe einen wertvollen Beitrag für die Hygiene und zum Infektionsschutz im Gesundheitswesen.*

*Von der Entwicklung über die Produktion bis zur Abfüllung stellen wir hochwertige Flüssigkeiten, Seifen, Cremes, Gels oder getränkte Tücher her. Unsere Desinfektionsmittel sind zertifiziert, hochwirksam und sicher.*

*Dafür stehen wir seit über 40 Jahren mit unserer Entwicklungs- und Herstellungskompetenz, ideenreicher Innovationskraft und Know-how rund um die Desinfektion.*

*Alle Produkte der Marke DrDeppe orientieren sich an den Bedürfnissen professioneller Anwender im medizinischen Bereich oder in der Pflege und sind zu 100 % Made in Germany. Darüber hinaus bieten wir auch außerhalb des Gesundheitswesens erstklassige Hygiene- und Desinfektionsmittel, etwa für die Veranstaltungsbranche, Hotellerie sowie öffentliche Einrichtungen an.*

*Alle unsere Produkte gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit.*



## Willkommen im umfassenden Gesamtkatalog von DrDeppe


Hier finden Sie alle Informationen, Produkte und Lösungen zur **effektiven Desinfektion** in verschiedenen Bereichen.

In Zeiten von erhöhten Hygieneanforderungen und einem gesteigerten Bewusstsein für die Bedeutung der Desinfektion ist es wichtiger denn je, über die richtigen Mittel und Methoden zu verfügen. Ob in **medizinischen Einrichtungen, Gastronomie, Industrie** oder im Bereich der **Pflege** – eine saubere und keimfreie Umgebung ist unabdingbar für die Gesundheit und das Wohlbefinden aller.

Unser Gesamtkatalog bietet Ihnen eine **umfangreiche Produktpalette** an, so dass Sie die passenden Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen finden können. Von der Entwicklung, über die Produktion und Abfüllung von hochwertigen Flüssigkeiten, Seifen, Cremes, Gels oder getränkten Tüchern, bis hin zu Schulungen und Beratung – wir begleiten Sie auf dem Weg zu einer hygienischen Umgebung.

Tauchen Sie ein in die Produktwelt von DrDeppe und entdecken Sie **innovative Lösungen**, die Ihnen dabei helfen, Keime effektiv zu bekämpfen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Erkundung unseres umfangreichen Katalogs und stehen Ihnen jederzeit für Fragen und Beratung zur Verfügung.

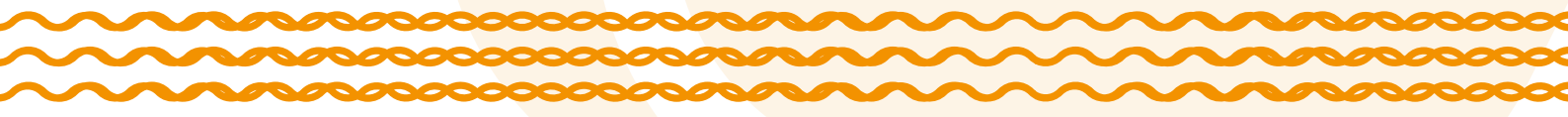

# Legende, Definitionen und Wirksamkeiten



Händedesinfektion



Desinfektions- und Reinigungstücher



Pflege & Kosmetik



Instrumentendesinfektion  
und -reinigung



Flächendesinfektion



Pflegebox



Desinfektionsmittel ist beim  
**Verband für Angewandte Hygiene e.V.**  
gelistet ([www.vah-online.de](http://www.vah-online.de))



Produkte, durch das unabhängige dermatologische  
Institut **Dermatest GmbH** geprüft, sind hautverträglich  
und sicher



Desinfektionsmittel ist beim **Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz für industrielle und institutionelle Anwendung e. V.** gelistet  
([www.desinfektionsmittelliste.de](http://www.desinfektionsmittelliste.de))



Alkoholfrei



Begutachtung durch den Virus-4-Felder-Test,  
in Anlehnung an die EN 16615



CO<sub>2</sub> neutrales Tuchmaterial aus  
nachwachsenden Rohstoffen –  
100% biologisch abbaubar



Produkt ist HACCP-konform, nach der EU-Verordnung (EG) Nr. 852/2004 bescheinigt und somit geeignet für den Lebensmittelbereich im Rahmen eines HACCP-Konzeptes



Parfümfrei



### Hygienische Händedesinfektion (EN 1500)

Hautdesinfektion, die die Verminderung der Anzahl von Mikroorganismen auf den Händen bewirkt.\*

### Chirurgische Händedesinfektion (EN 12791)

Ärztliche Routinemaßnahme zur deutlichen Reduzierung der transienten und residenten Keimbeseidelung der Haut (Hautflora) vor chirurgischen Eingriffen oder invasiven diagnostischen Verfahren.\*

### Hygienische Händewaschung (EN 1499)

Einfache, effektive Hygienemaßnahme, die bei richtiger Durchführung zur einer deutlichen Keimreduktion auf der Haut der Hände führt.\*

\*Quelle: DocCheck Flexikon 2022

| Wirkspektrum          | Wirksamkeit gegen                                                                    | Prüfkeime/ Prüfviren                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bakterizid            | Bakterien                                                                            | u.a. S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, E. hirae                                                             |
| levurozid             | Sprosspilze                                                                          | Candida albicans                                                                                             |
| fungizid              | alle Pilze und Sporen                                                                | Candida albicans, Sporen von Aspergillus brasiliensis                                                        |
| tuberkulozid          | Mycobacterium tuberculosis                                                           | Mycobacterium terrae                                                                                         |
| mykobakterizid        | alle Mykobakterien                                                                   | Mycobacterium terrae und Mycobacterium avium                                                                 |
| begrenzt viruzid      | behüllte Viren (z.B. SARS-CoV-2, Influenzaviren, Hepatitis B-Viren)                  | Vacciniavirus Elstree, Modified Vaccinia-virus Ankara (MVA), Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV)              |
| begrenzt viruzid PLUS | behüllte Viren sowie die unbehüllten Adeno-, Noro- und Rotaviren                     | Adenovirus, Murines Norovirus (MNV)                                                                          |
| viruzid               | behüllte und unbehüllte Viren (z.B. Polioviren, humane Papillomaviren, Polyomaviren) | Adenovirus, Murines Norovirus, Poliovirus, Murines Parvovirus (bei der chemothermischen Desinfektion), SV-40 |





Händedesinfektion




Pflege & Kosmetik



Flächendesinfektion



Desinfektions-  
und Reinigungstücher

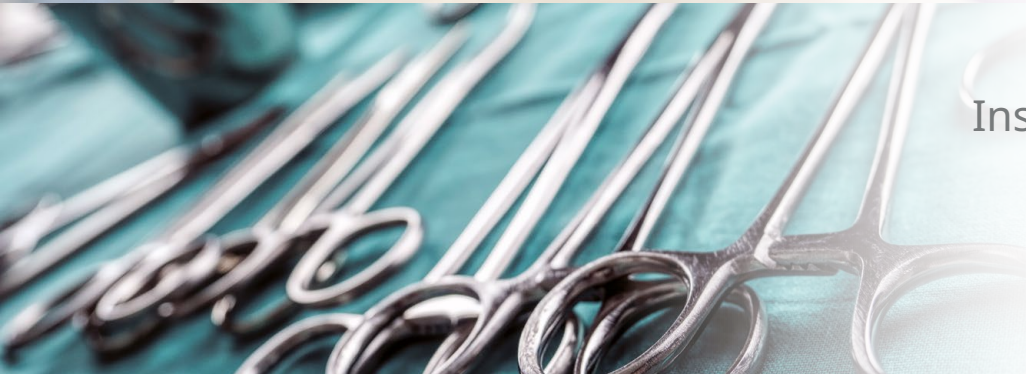

Instrumentendesinfektion  
und -reinigung



Produkte für  
die Pflegebox







# Händedesinfektion

# DrDeppe – Händedesinfektion

Händedesinfektionsmittel sind eine unverzichtbare Komponente in der täglichen Hygiene und spielen eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Krankheiten und Infektionen. Sie sind speziell formuliert, um die meisten Mikroorganismen, einschließlich Bakterien, Viren und Pilze, auf den Händen abzutöten oder zu inaktivieren.

Die Wirksamkeit von Händedesinfektionsmitteln beruht auf den enthaltenen aktiven Inhaltsstoffen wie z. B. Ethanol oder Isopropylalkohol. Die Substanzen wirken durch den gezielten Angriff auf die äußere Hülle oder das Innere der Mikroorganismen. Dadurch werden die Organismen inaktiviert oder abgetötet, was das Risiko einer Infektionsübertragung erheblich reduziert.

Es ist zu beachten, dass nicht alle Händedesinfektionsmittel die gleiche Wirksamkeit aufweisen. Die Konzentration des enthaltenen Alkohols oder anderen wirksamen Inhaltsstoffen, die Einwirkzeit und die Qualität der Formulierung können die Effektivität beeinflussen.

Unsere Händedesinfektionsmittel sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung und kontinuierlicher Weiterentwicklung unseres Fachwissens im Bereich der Handhygiene.





# INHALT

## Händedesinfektion

|                        |    |
|------------------------|----|
| OpSept virugon® .....  | 12 |
| Op Sept .....          | 14 |
| Op Sept pur .....      | 16 |
| OpPlus .....           | 18 |
| Lotio Sept Gel .....   | 20 |
| Lotio Sept Basic ..... | 22 |
| Lotio HD .....         | 24 |

## Standardeinreibemethode

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Hygienische Händedesinfektion gemäß EN 1500 ..... | 26 |
|---------------------------------------------------|----|

## Produktübersicht

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Händedesinfektion ..... | 27 |
|-------------------------|----|

*Applikationshilfen auf Anfrage*



## Produktbeschreibung

OpSept virugon® ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches, rückfettendes und parfümfreies Desinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

## Anwendungsgebiet

Anwendbar in allen Bereichen mit erhöhtem Risiko. OpSept virugon® hat ein sehr breites Wirkspektrum, insbesondere gegenüber behüllten und unbehüllten Viren. Die Infektionsprävention für eine effektive Händedesinfektion erfolgt bereits nach 30 Sekunden. OpSept virugon® ist auch für Personen im Lebensmittelbereich geeignet, als HACCP-konform nach der EU-Verordnung (EG) Nr. 852/2004 be-

scheinigt worden und kann sicher im Rahmen eines HACCP-Konzeptes verwendet werden.

## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- viruzid

## Anwendungshinweise

Vor der Desinfektion stark verschmutzte Hände mit Wasser und Seife reinigen. Nasse Hände vor der Desinfektion trocknen lassen. Zur hygienischen Händedesinfektion 3 ml in die Handfläche geben und für 30 Sekunden intensiv mit beiden Händen so verreiben, dass die Hände vollständig benetzt werden. Es ist zu beachten, dass auch Fingerzwischenräume, Fingernagelwinkel und Hautfalten vollständig benetzt werden. Während der gesamten Einwirkzeit von 30 Sekunden die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Zur chirurgischen Händedesinfektion eine ausreichende Menge in den Händen einreiben, sodass die gesamte Handfläche einschließlich der Problembereiche Interdigitalbereich und Nagelfalz während 2 Minuten benetzt ist. Während der gesamten Einwirkzeit von 2 Minuten die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Nach Ablauf der Einwirkzeit von 30 Sekunden bzw. 2 Minuten ist die Desinfektion abgeschlossen.



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601506        | 100 ml       | Flasche    | 42 × 100 ml        | 18311812    | 4260181252728    | 4260181252773                 | 54.99.02.0011           |
| 601570        | 250 ml       | Flasche    | 12 × 250 ml        | 18372481    | 4260181253206    | 4260181253213                 | 54.99.02.0011           |
| 601507        | 500 ml       | Flasche    | 18 × 500 ml        | 18311829    | 4260181252735    | 4260181252780                 | 54.99.02.0011           |
| 601508        | 1 L          | Flasche    | 10 × 1 L           | 18311835    | 4260181252742    | 4260181252797                 | 54.99.02.0011           |
| 601509        | 5 L          | Kanister   | 2 × 5 L            | 18311841    | 4260181252759    | 4260181252803                 | 54.99.02.0011           |
| 601510        | 10 L         | Kanister   | 1 × 10 L           | 18311858    | 4260181252766    | 4260181252810                 | 54.99.02.0011           |



## Biozidregistriernummer

N-102305

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm sind als Wirkstoff enthalten:**  
73,5 g Ethanol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| OpSept virugon®<br>Wirkspektrum                                   | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Hygienische<br>Händedesinfektion                                  | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 13727<br>EN 13624<br>EN 1500  |
| Chirurgische<br>Händedesinfektion                                 | niedrig                         | 2 Minuten   | EN 13727<br>EN 13624<br>EN 12791 |
| Tuberkulozid                                                      | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 14348                         |
| Mykobakterizid                                                    | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 14348                         |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                    | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 14476                         |
| Begrenzt viruzid PLUS<br>(Adenovirus Typ 5,<br>Murines Norovirus) | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 14476                         |
| Viruzid<br>(Polio Virus Typ 1)                                    | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 14476                         |



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Op Sept

## Produktbeschreibung

Op Sept ist ein gebrauchsfertiges, rückfettendes, parfüm- und alkoholhaltiges Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

## Anwendungsgebiet

In Krankenhäusern und anderen Bereichen, wenn ein hohes Maß an Handhygiene erforderlich ist, z.B.:

- Häusliche Verwendung (Hauspflege usw.)
- Institutionelle Verwendung (Forschung usw.)
- Industrielle Anwendungen, z.B. in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie usw.
- Restaurants und Groß-/Kantinenküchen
- Erholungsbereiche



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

## Einwirkzeiten

| Op Sept<br>Wirkspektrum                                            | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit                           | Norm     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Hygienische<br>Händedesinfektion                                   | niedrig                         | 30 Sekunden/<br>3 ml                  | EN 1500  |
| Chirurgische<br>Händedesinfektion                                  | niedrig                         | 90 Sekunden/<br>3 ml                  | EN 12791 |
| Bakterizid                                                         | niedrig                         | 30 Sekunden                           | EN 13727 |
| Levurozid                                                          | niedrig                         | 30 Sekunden                           | EN 13624 |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                     | niedrig                         | 15 Sekunden                           | EN 14476 |
| Begrenzt viruzid PLUS<br>• Adenovirus Typ 5<br>• Murines Norovirus | niedrig                         | 2 Minuten<br>2 Minuten<br>30 Sekunden | EN 14476 |

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikel-<br>nummer | Gebinde-<br>größe | Gebinde-<br>art | Verpackungs-<br>einheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Ver-<br>packungseinheit) | HMN (Hilfs-<br>mittelnummer) |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 601951             | 100 ml            | Flasche         | 42 × 100 ml             | 20274248    | 4260181257778    | 4260181257938                      | 54.99.02.0024                |
| 601952             | 500 ml            | Flasche         | 18 × 500 ml             | 20274366    | 4260181257792    | 4260181257952                      | 54.99.02.0024                |
| 601953             | 1 L               | Flasche         | 10 × 1 L                | 20274254    | 4260181257815    | 4260181257976                      | 54.99.02.0024                |
| 601954             | 5 L               | Kanister        | 2 × 5 L                 | 20274260    | 4260181257839    | 4260181257990                      | 54.99.02.0024                |





## Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Erwachsene und Kinder von 12 Jahren und älter: 3 ml. Die Menge der Flüssigkeit muss der Größe einer großen Münze ähneln. Kinder unter 12 Jahren: 1,5 ml.

## Anwendungsrate(n) und Häufigkeit

Das Produkt ist auf sichtbar sauberen Händen zu verwenden. Wenn die Hände schmutzig sind, mit Wasser und Seife waschen, abspülen und abtrocknen, bevor das Produkt aufgetragen wird. Das Produkt ist gebrauchsfertig. Das Produkt soll direkt aufgetragen oder in einem Spender oder mit einer Pumpe verwendet werden.

**Schritt 1:** Die folgende Menge an Desinfektionsmittel auftragen: Erwachsene und Kinder von 12 Jahren und älter: 3 ml; Kinder unter 12 Jahren: 1,5 ml. In der Handfläche verreiben. Die Handflächen aneinander reiben, um das Desinfektionsmittel über die gesamten Hände und Finger zu verteilen.

**Schritt 2:** Den Rücken Ihrer linken Hand mit der rechten Handfläche einreiben. Umkehrung und Wiederholung der Aktion.

**Schritt 3:** Öffnen Sie die Finger und reiben Sie die Fingerzwischenräume ein. Umkehrung und Wiederholung der Aktion.

**Schritt 4:** Mit verschränkten Fingern Handfläche an Handfläche einreiben (5 Mal).

**Schritt 5:** Den Daumen jeder Hand mit einer kreisenden Bewegung einreiben.

**Schritt 6:** Die Fingerspitzen mit kreisenden Bewegungen gegen die gegenüberliegende Handfläche reiben. Das Handgelenk mit beiden Händen einreiben. Die Hände vollständig trocknen lassen. 30 Sekunden lang befeuchtet halten gegen Bakterien, Hefen, Tuberkulosebakterien und behüllte Viren. Nicht abspülen. Den Vorgang wiederholen, wenn eine erneute Händedesinfektion erforderlich ist.

Erwachsene und Kinder von 12 Jahren und älter: Bis zu 10 × pro Tag.

Kinder unter 12 Jahren: Bis zu 3 × pro Tag.

## Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Für Kinder (Alter > 1 Jahr) nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

## Unionszulassungsnummer

Das Biozidprodukt Op Sept (Wirkstoff Propan-2-ol) hat eine Unions-Zulassung für die Produktart 1 (Desinfektionsmittel für die menschliche Hygiene) mit der Zulassungsnummer EU-0033834-0003. Die Zulassung ist gültig bis 30. September 2035.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm sind als Wirkstoff enthalten:**  
63,14 g Propan-2-ol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**  
36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**  
12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Op Sept pur

## Produktbeschreibung

Op Sept pur ist ein gebrauchsfertiges, rückstands- und parfümfreies, alkoholhaltiges Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

## Anwendungsgebiet

In Krankenhäusern und anderen Bereichen, wenn ein hohes Maß an Handhygiene erforderlich ist, z.B.:

- Häusliche Verwendung (Hauspflege usw.)
- Institutionelle Verwendung (Forschung usw.)
- Industrielle Anwendungen, z.B. in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie usw.
- Restaurants und Groß-/Kantinenküchen
- Erholungsbereiche



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

## Einwirkzeiten

| Op Sept pur<br>Wirkspektrum                                        | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit                           | Norm     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Hygienische<br>Händedesinfektion                                   | niedrig                         | 30 Sekunden/<br>3 ml                  | EN 1500  |
| Chirurgische<br>Händedesinfektion                                  | niedrig                         | 90 Sekunden/<br>3 ml                  | EN 12791 |
| Bakterizid                                                         | niedrig                         | 30 Sekunden                           | EN 13727 |
| Levurozid                                                          | niedrig                         | 30 Sekunden                           | EN 13624 |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                     | niedrig                         | 15 Sekunden                           | EN 14476 |
| Begrenzt viruzid PLUS<br>• Adenovirus Typ 5<br>• Murines Norovirus | niedrig                         | 2 Minuten<br>2 Minuten<br>30 Sekunden | EN 14476 |

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikel-<br>nummer | Gebinde-<br>größe | Gebinde-<br>art | Verpa-<br>ckungsein-<br>heit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Ver-<br>packungseinheit) | HMN (Hilfs-<br>mittelnummer) |
|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 601958             | 100 ml            | Flasche         | 42 × 100 ml                  | 20274314    | 4260181257853    | 4260181258010                      | 54.99.02.0024                |
| 601959             | 500 ml            | Flasche         | 18 × 500 ml                  | 20274277    | 4260181257877    | 4260181258034                      | 54.99.02.0024                |
| 601960             | 1 L               | Flasche         | 10 × 1 L                     | 20274308    | 4260181257891    | 4260181258058                      | 54.99.02.0024                |
| 601961             | 5 L               | Kanister        | 2 × 5 L                      | 20274343    | 4260181257914    | 4260181258072                      | 54.99.02.0024                |



## Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Erwachsene und Kinder von 12 Jahren und älter: 3 ml. Die Menge der Flüssigkeit muss der Größe einer großen Münze ähneln. Kinder unter 12 Jahren: 1,5 ml.

## Anwendungsrate(n) und Häufigkeit

Das Produkt ist auf sichtbar sauberen Händen zu verwenden. Wenn die Hände schmutzig sind, mit Wasser und Seife waschen, abspülen und abtrocknen, bevor das Produkt aufgetragen wird. Das Produkt ist gebrauchsfertig. Das Produkt soll direkt aufgetragen oder in einem Spender oder mit einer Pumpe verwendet werden.

**Schritt 1:** Die folgende Menge an Desinfektionsmittel auftragen: Erwachsene und Kinder von 12 Jahren und älter: 3 ml; Kinder unter 12 Jahren: 1,5 ml. In der Handfläche verreiben. Die Handflächen aneinander reiben, um das Desinfektionsmittel über die gesamten Hände und Finger zu verteilen.

**Schritt 2:** Den Rücken Ihrer linken Hand mit der rechten Handfläche einreiben. Umkehrung und Wiederholung der Aktion.

**Schritt 3:** Öffnen Sie die Finger und reiben Sie die Fingerzwischenräume ein. Umkehrung und Wiederholung der Aktion.

**Schritt 4:** Mit verschränkten Fingern Handfläche an Handfläche einreiben (5 Mal).

**Schritt 5:** Den Daumen jeder Hand mit einer kreisenden Bewegung einreiben.

**Schritt 6:** Die Fingerspitzen mit kreisenden Bewegungen gegen die gegenüberliegende Handfläche reiben. Das Handgelenk mit beiden Händen einreiben. Die Hände vollständig trocknen lassen. 30 Sekunden lang befeuchtet halten gegen Bakterien, Hefen, Tuberkulosebakterien und behüllte Viren. Nicht abspülen. Den Vorgang wiederholen, wenn eine erneute Händedesinfektion erforderlich ist.

Erwachsene und Kinder von 12 Jahren und älter: Bis zu 10 × pro Tag.

Kinder unter 12 Jahren: Bis zu 3 × pro Tag.

## Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Für Kinder (Alter > 1 Jahr) nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

## Unionszulassungsnummer

Das Biozidprodukt Op Sept pur (Wirkstoff Propan-2-ol) hat eine Unions-Zulassung für die Produktart 1 (Desinfektionsmittel für die menschliche Hygiene) mit der Zulassungsnummer EU-0033834-0002. Die Zulassung ist gültig bis 30. September 2035.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm sind als Wirkstoff enthalten:**  
63,14 g Propan-2-ol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**  
36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**  
12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.



**Informationen**  
zu diesem Produkt



## Produktbeschreibung

OpPlus ist ein gebrauchsfertiges alkoholisches Antiseptikum zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Es ist anwendbar in allen Bereichen der menschlichen Hygiene und zeigt eine sehr gute Hautverträglichkeit bei häufiger Anwendung.

## Anwendungsgebiet

Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens, Ambulanzen, Arztpraxen, Pflegeheime (einschließlich häuslicher Pflege von Patienten), Krankenhauskantinen, Großküchen, pharmazeutische Industrie, Produktionsstätten und Laboratorien



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- wirksam gegen Noroviren

## Anwendungshinweise

Vor der Desinfektion stark verschmutzte Hände mit Wasser und Seife reinigen. Nasse Hände vor der Desinfektion trocknen lassen. Zur hygienischen Händedesinfektion 3 ml in die Handfläche geben und für 30 Sekunden intensiv mit beiden Händen so verreiben, dass die Hände vollständig benetzt werden.

Es ist zu beachten, dass auch Fingerzwischenräume, Fingernagelwinkel und Hautfalten vollständig benetzt werden. Während der gesamten Einwirkzeit von 30 Sekunden die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Zur chirurgischen Händedesinfektion eine ausreichende Menge in den Händen einreiben, sodass die gesamte Handfläche einschließlich der Problembereiche Interdigitalbereich und Nagelfalz während 90 Sekunden benetzt ist. Während der gesamten Einwirkzeit von 90 Sekunden die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Nach Ablauf der Einwirkzeit von 30 bzw. 90 Sekunden ist die Desinfektion abgeschlossen.



Das Biozidprodukt OpPlus (Wirkstoff Propan-1-ol und Propan-2-ol) hat eine Unions- und Schweiz-Zulassung für die Produktart 1 (Desinfektionsmittel für die menschliche Hygiene) mit der Zulassungsnummer EU-0027670-0000. Die Zulassung ist gültig bis 31. Juli 2032.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601651        | 100 ml       | Flasche    | 42 × 100 ml        | 18906468    | 4260181253657    | 4260181253664                 |
| 601304        | 500 ml       | Flasche    | 18 × 500 ml        | 18906474    | 4260181254869    | 4260181254876                 |
| 601303        | 1 L          | Flasche    | 10 × 1 L           | 18906480    | 4260181254883    | 4260181254890                 |
| 601652        | 5 L          | Kanister   | 2 × 5 L            | 18906497    | 4260181254746    | 4260181254753                 |





## Zulassungsnummer

EU-0027670-0000

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:**

12,2 g Propan-1-ol

62,7 g Propan-2-ol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| OpPlus<br>Wirkspektrum                         | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Hygienische<br>Händedesinfektion               | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 13727<br>EN 13624<br>EN 1500  |
| Chirurgische<br>Händedesinfektion              | niedrig                         | 90 Sekunden | EN 13727<br>EN 13624<br>EN 12791 |
| Tuberkulozid                                   | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 14348                         |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara) | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 14476                         |
| Murines Norovirus                              | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 14476                         |



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Lotio Sept Gel

## Produktbeschreibung

Lotio Sept Gel ist ein gebrauchsfertiges alkoholhaltiges Desinfektionsmittelgel für die hygienische Händedesinfektion.

## Anwendungsgebiet

In Krankenhäusern und anderen Bereichen, wenn ein hohes Maß an Handhygiene erforderlich ist, z.B.:

- Häusliche Verwendung (Hauspflege usw.)
- Institutionelle Verwendung (Forschung usw.)
- Industrielle Anwendungen, z.B. in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie usw.
- Restaurants und Groß-/Kantinenküchen
- Erholungsbereiche



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- wirksam gegen Noroviren

## Anwendungshinweise

Die Hände vor der Desinfektion reinigen und trocknen lassen. Eine ausreichende Menge Lotio Sept Gel in die Hände geben. Während der gesamten Einwirkzeit die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren.

## Einwirkzeiten

| Lotio Sept Gel<br>Wirkspektrum                 | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Hygienische<br>Händedesinfektion               | hoch                            | 30 Sekunden | VAH<br>Methode<br>7, 8, 9,<br>EN 1500 |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara) | niedrig                         | 15 Sekunden | EN 14476                              |
| Murines Norovirus                              | niedrig                         | 60 Sekunden | EN 14476                              |

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikel-<br>nummer | Gebinde-<br>größe | Gebinde-<br>art | Verpackungs-<br>einheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601375             | 100 ml            | Flasche         | 42 × 100 ml             | 18311634    | 4260181254326    | 4260181250731                 |
| 601119             | 500 ml            | Flasche         | 18 × 500 ml             | 18311657    | 4260181254289    | 4260181250755                 |
| 601118             | 1 L               | Flasche         | 10 × 1 L                | 18311640    | 4260181254272    | 4260181250748                 |



## Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Erwachsene und Kinder von 12 Jahren und älter: 3 ml. Die Menge der Flüssigkeit muss der Größe einer großen Münze ähneln. Kinder unter 12 Jahren: 1,5 ml.

## Anwendungsrate(n) und Häufigkeit

Das Produkt ist auf sichtbar sauberen Händen zu verwenden. Wenn die Hände schmutzig sind, mit Wasser und Seife waschen, abspülen und abtrocknen, bevor das Produkt aufgetragen wird. Das Produkt ist gebrauchsfertig. Das Produkt soll direkt aufgetragen oder in einem Spender oder mit einer Pumpe verwendet werden.

**Schritt 1:** Die folgende Menge an Desinfektionsmittel auftragen: Erwachsene und Kinder von 12 Jahren und älter: 3 ml; Kinder unter 12 Jahren: 1,5 ml. In der Handfläche verreiben. Die Handflächen aneinander reiben, um das Desinfektionsmittel über die gesamten Hände und Finger zu verteilen.

**Schritt 2:** Den Rücken Ihrer linken Hand mit der rechten Handfläche einreiben. Umkehrung und Wiederholung der Aktion.

**Schritt 3:** Öffnen Sie die Finger und reiben Sie die Fingerzwischenräume ein. Umkehrung und Wiederholung der Aktion.

**Schritt 4:** Mit verschränkten Fingern Handfläche an Handfläche einreiben (5 Mal).

**Schritt 5:** Den Daumen jeder Hand mit einer kreisenden Bewegung einreiben.

**Schritt 6:** Die Fingerspitzen mit kreisenden Bewegungen gegen die gegenüberliegende Handfläche reiben. Das Handgelenk mit beiden Händen einreiben. Die Hände vollständig trocknen lassen. 30 Sekunden lang befeuchtet halten gegen Bakterien, Hefen, Tuberkulosebakterien und behüllte Viren. Nicht abspülen. Den Vorgang wiederholen, wenn eine erneute Händedesinfektion erforderlich ist.

Erwachsene und Kinder von 12 Jahren und älter: Bis zu 10 × pro Tag.

Kinder unter 12 Jahren: Bis zu 3 × pro Tag.

## Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Für Kinder (Alter > 1 Jahr) nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

## Unionszulassungsnummer

Das Biozidprodukt Lotio Sept Gel (Wirkstoff Propan-2-ol) hat eine Unions-Zulassung für die Produktart 1 (Desinfektionsmittel für die menschliche Hygiene) mit der Zulassungsnummer EU-0033834-0005. Die Zulassung ist gültig bis 30. September 2035.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm sind als Wirkstoff enthalten:**  
63,14 g Propan-2-ol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**  
36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**  
12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Lotio Sept Basic

## Produktbeschreibung

Lotio Sept Basic, mit Aloe Vera, ist ein gebrauchsfertiges, alkoholfreies Präparat zur hygienischen Händedesinfektion und hygienischen Händewaschung.

## Anwendungsgebiet

Es ist anwendbar in allen Bereichen der menschlichen Hygiene.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)

## Anwendungshinweise

Zur hygienischen Händedesinfektion die Hände vor der Desinfektion reinigen und trocknen lassen.

Eine ausreichende Menge in die Hände geben und verreiben, dabei die Einwirkzeit von 60 Sekunden einhalten.

Zur hygienischen Händewaschung bei Verwendung der Pumpflasche/Foamer die Hände mit Wasser anfeuchten und danach 6 Pumphübe aus dem Foamer in den Händen verreiben.

Die Einwirkzeit von 60 Sekunden einhalten. Lotio Sept Basic anschließend abwaschen und die Hände gründlich trocknen.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart  | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|---------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601324        | 100 ml       | Flasche     | 42 × 100 ml        | 18311574    | 4260181253787    | 4260181250939                 | 54.99.02.0010           |
| 601438        | 200 ml       | Pumpflasche | 24 × 200 ml        | 18311611    | 4260181251530    | 4260181251547                 | 54.99.02.0010           |
| 601302        | 500 ml       | Flasche     | 18 × 500 ml        | 18311568    | 4260181253763    | 4260181250922                 | 54.99.02.0010           |
| 601301        | 1 L          | Flasche     | 10 × 1 L           | 18311551    | 4260181253756    | 4260181250915                 | 54.99.02.0010           |
| 601342        | 5 L          | Kanister    | 2 × 5 L            | 18311580    | 4260181253732    | 4260181250946                 | 54.99.02.0010           |
| 601343        | 10 L         | Kanister    | 1 × 10 L           | 18311597    | 4260181253749    | 4260181250953                 | 54.99.02.0010           |





## Biozidregistriernummer

N-87461

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm sind als Wirkstoff enthalten:**

0,8 g Didecyldimethylammoniumchlorid

0,5 g 2-Phenoxyethanol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Lotio Sept Basic<br>Wirkspektrum               | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Bakterizid                                     | niedrig                         | 1 Minute    | EN 13727<br>EN 16615* |
| Levurozid                                      | niedrig                         | 1 Minute    | EN 13624<br>EN 16615* |
| Hygienische Hände-<br>desinfektion             | niedrig                         | 1 Minute    | EN 1500               |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara) | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14476              |
| Hygienische Hände-<br>waschung                 | niedrig                         | 1 Minute    | EN 1499               |

\*getestet an Referenz Tuch



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Lotio HD

## Produktbeschreibung

Lotio HD ist ein gebrauchsfertiges, alkoholhaltiges und waschendes Präparat zur hygienischen Händewaschung.

## Anwendungsgebiet

Es ist anwendbar für alle Bereiche mit erhöhten Hygieneanforderungen in Kliniken, Praxen, Ambulanzen, Pflegeeinrichtungen, Industrie-, Gewerbe- und Laborbereichen sowie Küchen- und Lebensmittelbereichen.

## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

## Anwendungshinweise

Für die hygienische Händewaschung 3 ml Lotio HD unverdünnt auf die Hände geben und für 30 Sekunden gründlich verteilen. Danach mit wenig Wasser aufschäumend waschen und abspülen.



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikel-nummer | Gebinde-größe | Gebinde-art | Verpackungs-einheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|----------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 700025         | 500 ml        | Flasche     | 18 × 500 ml         | 18311545    | 4260181251448    | 4260181251738                 |
| 700019         | 1 L           | Flasche     | 10 × 1 L            | 18311522    | 4260181251455    | 4260181251745                 |
| 700022         | 5 L           | Kanister    | 2 × 5 L             | 18311539    | 4260181251462    | 4260181251752                 |



## Biozidregistriernummer

N-68529

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm sind als Wirkstoff enthalten:**

64,2 g Ethanol

1,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

24 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Lotio HD<br>Wirkspektrum                                             | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Hygienische Händewaschung                                            | hoch                            | 30 Sekunden | EN 13727/<br>EN 13624<br>EN 1499* |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                       | hoch                            | 30 Sekunden | EN 14476                          |
| Begrenzt viruzid<br>PLUS<br>(Adenovirus Typ 5,<br>Murines Norovirus) | hoch                            | 2 Minuten   | EN 14476                          |

\* angefeuchtete Hände



**Informationen**  
zu diesem Produkt




# Standardeinreibemethode

## Hygienische Händedesinfektion gemäß EN 1500

### Schrittweise Anleitung



Geben Sie ausreichend Desinfektionsmittel in Ihre Handflächen. Reiben Sie beide Handflächen aufeinander. Achten Sie außerdem darauf, dass Ihre Handgelenke mit Desinfektionsmittel eingerieben werden.

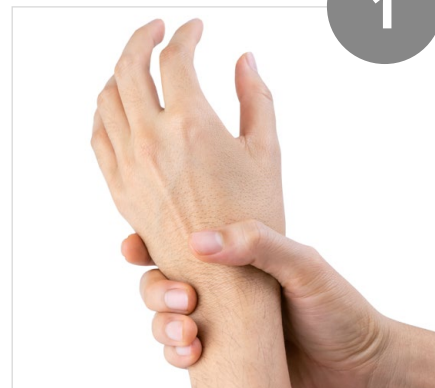


Reiben Sie mit der rechten Handfläche über den linken Handrücken. Wiederholen Sie das auch umgekehrt.



Reiben Sie die Handflächen mit verschränkten, geöffneten Fingern aneinander.



Legen Sie die Hände mit der Außenseite der Finger auf die gegenüberliegende Handfläche und verschränken Sie diese dabei.

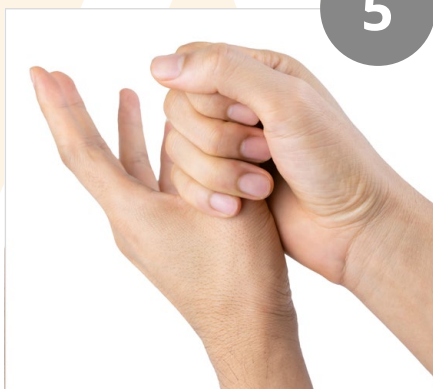

Nehmen Sie den rechten Daumen in die geschlossene, linke Handfläche. Wiederholen Sie diesen Schritt auch mit dem linken Daumen.



Fassen Sie die Fingerkuppen der rechten Hand zusammen und reiben Sie diese in der linken Handfläche – und umgekehrt.

Geben Sie das Händedesinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände und reiben Sie diese über 30 Sekunden nach den aufgeführten Schritten bis zu den Handgelenken ein. Führen Sie die Bewegungen jedes Schrittes fünfmal durch. Beachten Sie die empfohlene Einwirkzeit des jeweiligen Produkts und dass die Hände über die gesamte Einwirkzeit feucht bleiben. Im Bedarfsfall nehmen Sie erneut Händedesinfektionsmittel.





# Produktübersicht

## Händedesinfektion

| Artikel                 | Artikel-nummer | Gebinde-größe | Verpackungs-einheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungs-einheit) | HMN (Hilfsmittel-nummer) |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>OpSept virugon®</b>  | 601506         | 100 ml        | 42 × 100 ml         | 18311812    | 4260181252728    | 4260181252773                  | 54.99.02.0011            |
|                         | 601570         | 250 ml        | 12 × 250 ml         | 18372481    | 4260181253206    | 4260181253213                  | 54.99.02.0011            |
|                         | 601507         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 18311829    | 4260181252735    | 4260181252780                  | 54.99.02.0011            |
|                         | 601508         | 1 L           | 10 × 1 L            | 18311835    | 4260181252742    | 4260181252797                  | 54.99.02.0011            |
|                         | 601509         | 5 L           | 2 × 5 L             | 18311841    | 4260181252759    | 4260181252803                  | 54.99.02.0011            |
|                         | 601510         | 10 L          | 1 × 10 L            | 18311858    | 4260181252766    | 4260181252810                  | 54.99.02.0011            |
| <b>Op Sept</b>          | 601951         | 100 ml        | 42 × 100 ml         | 20274248    | 4260181257778    | 4260181257938                  | 54.99.02.0024            |
|                         | 601952         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 20274366    | 4260181257792    | 4260181257952                  | 54.99.02.0024            |
|                         | 601953         | 1 L           | 10 × 1 L            | 20274254    | 4260181257815    | 4260181257976                  | 54.99.02.0024            |
|                         | 601954         | 5 L           | 2 × 5 L             | 20274260    | 4260181257839    | 4260181257990                  | 54.99.02.0024            |
| <b>Op Sept pur</b>      | 601958         | 100 ml        | 42 × 100 ml         | 20274314    | 4260181257853    | 4260181258010                  | -                        |
|                         | 601959         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 20274277    | 4260181257877    | 4260181258034                  | -                        |
|                         | 601960         | 1 L           | 10 × 1 L            | 20274308    | 4260181257891    | 4260181258058                  | -                        |
|                         | 601961         | 5 L           | 2 × 5 L             | 20274343    | 4260181257914    | 4260181258072                  | -                        |
| <b>OpPlus</b>           | 601651         | 100 ml        | 42 × 100 ml         | 18906468    | 4260181253657    | 4260181253664                  | -                        |
|                         | 601304         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 18906474    | 4260181254869    | 4260181254876                  | -                        |
|                         | 601303         | 1 L           | 10 × 1 L            | 18906480    | 4260181254883    | 4260181254890                  | -                        |
|                         | 601652         | 5 l           |                     | 18906497    | 4260181254746    | 4260181254753                  | -                        |
| <b>Lotio Sept Gel</b>   | 601375         | 100 ml        | 42 × 100 ml         | 18311634    | 4260181254326    | 4260181250731                  | -                        |
|                         | 601119         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 18311657    | 4260181254289    | 4260181250755                  | -                        |
|                         | 601118         | 1 L           | 10 × 1 L            | 18311640    | 4260181254272    | 4260181250748                  | -                        |
| <b>Lotio Sept Basic</b> | 601324         | 100 ml        | 42 × 100 ml         | 18311574    | 4260181253787    | 4260181250939                  | 54.99.02.0010            |
|                         | 601438         | 200 ml        | 24 × 200 ml         | 18311611    | 4260181251530    | 4260181251547                  | 54.99.02.0010            |
|                         | 601302         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 18311568    | 4260181253763    | 4260181250922                  | 54.99.02.0010            |
|                         | 601301         | 1 L           | 10 × 1 L            | 18311551    | 4260181253756    | 4260181250915                  | 54.99.02.0010            |
|                         | 601342         | 5 L           | 2 × 5 L             | 18311580    | 4260181253732    | 4260181250946                  | 54.99.02.0010            |
|                         | 601343         | 10 L          | 1 × 10 L            | 18311597    | 4260181253749    | 4260181250953                  | 54.99.02.0010            |
| <b>Lotio HD</b>         | 700025         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 18311545    | 4260181251448    | 4260181251738                  | -                        |
|                         | 700019         | 1 L           | 10 × 1 L            | 18311522    | 4260181251455    | 4260181251745                  | -                        |
|                         | 700022         | 5 L           | 2 × 5 L             | 18311539    | 4260181251462    | 4260181251752                  | -                        |





Pflege & Kosmetik

# DrDeppe – Pflege & Kosmetik

Hautpflegecremes und Waschlotionen sind unverzichtbare Produkte für unsere tägliche Pflegeroutine.

Hautpflegecremes sind dafür entwickelt, die Haut mit essentieller Feuchtigkeit zu versorgen und sie vor dem Austrocknen zu schützen. Sie enthalten Inhaltsstoffe wie z.B. Aloe Vera, die tief in die Haut eindringen und sie von innen heraus mit Feuchtigkeit versorgen. Trockene Haut kann zu Unbehagen führen und das Risiko von Rissen oder Schuppenbildung erhöhen. Daher ist die regelmäßige Verwendung von Hautpflegecremes essenziell, um die Haut geschmeidig und gesund zu halten.

Waschlotionen hingegen sind speziell entwickelt, um die Haut gründlich zu reinigen und von Verunreinigungen, Schweiß und Schmutz zu befreien. Sie enthalten milde Reinigungssubstanzen, um die Haut schonend zu reinigen, ohne sie auszutrocknen oder zu reizen. Empfindliche Hauttypen sollten nach Möglichkeit zu pH-neutralen oder parfümfreien Waschlotionen greifen, um Rötungen und Hautirritationen vorzubeugen. Es ist wichtig, die Waschlotion sparsam zu verwenden und die Haut anschließend gründlich abzuspülen, um Rückstände zu entfernen. Nach dem Waschen sollte die Haut mit einer geeigneten Hautpflegecreme gepflegt werden, um ihre Feuchtigkeitsbalance wiederherzustellen.

Insgesamt sind Hautpflegecremes und Waschlotionen unverzichtbare Begleiter für eine gesunde Haut. Sie helfen dabei, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, sie zu reinigen und zu schützen.

In unserem Professional & Care Portfolio finden Sie eine Vielzahl von Produkten wie Waschlotionen, sowie pflegende Cremes für Hände, Körper und Gesicht, um Ihre Haut optimal zu unterstützen.





# INHALT

## Pflege & Kosmetik

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Lotio Med Professional & Care .....           | 32 |
| Lotio Med Soft Professional & Care .....      | 33 |
| Lotio Med Sensitive Professional & Care ..... | 34 |
| Lotio Protect Professional & Care .....       | 35 |
| Lotio Lind Professional & Care .....          | 36 |
| Lotio Foam Professional & Care .....          | 37 |
| Lotio Aktiv Professional .....                | 38 |

## Produktübersicht

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Pflege & Kosmetik ..... | 39 |
|-------------------------|----|

*Applikationshilfen auf Anfrage*

# Lotio Med Professional & Care



## Produktbeschreibung

Lotio Med Professional & Care Serie ist eine alkoholfreie Waschlotion, auf Basis milder Waschtenside. Diese reinigt sanft die Haut und sorgt für ein angenehmes, sauberes Hautgefühl. Die Waschlotion eignet sich für eine tägliche, milde Reinigung der Haut. Lotio Med Professional & Care ist hautverträglich und dermatologisch getestet.

## Anwendungshinweis

2 ml der Waschlotion direkt auf die angefeuchtete Haut auftragen und anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen. Die Waschlotion kann als Körperpflegemittel mehrmals täglich verwendet werden. Kontakt mit den Augen vermeiden.



### Ingredients:

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES CITRATE, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, SODIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, PARFUM, CI 19140, CI 42090



**Informationen**  
zu diesem Produkt



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 700540        | 500 ml       | Flasche    | 18 × 500 ml        | 18311870    | 4260181251929    | 4260181251936                 |
| 700564        | 1 L          | Flasche    | 10 × 1 L           | 18311887    | 4260181251943    | 4260181251950                 |
| 700565        | 5 L          | Kanister   | 2 × 5 L            | 18311893    | 4260181251967    | 4260181251974                 |



# Lotio Med Soft Professional & Care

## Produktbeschreibung

Lotio Med Soft Professional & Care Waschlotion ist die weiterentwickelte Formel der Lotio Med Professional & Care, bei der auf Farbstoffe und Parfümöle verzichtet wurde. Die Haut wird sanft und schonend gereinigt. Diese alkoholfreie Waschlotion ist für eine tägliche, milde Reinigung der Haut geeignet. Lotio Med Soft Professional & Care ist hautverträglich und dermatologisch getestet.

## Anwendungshinweis

2 ml der Waschlotion direkt auf die angefeuchtete Haut auftragen und anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen. Die Waschlotion kann als Körperpflegemittel mehrmals täglich verwendet werden. Kontakt mit den Augen vermeiden. Kontakt mit den Augen vermeiden.



### Ingredients:

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, GLYCOL DISTEARATE, GLYCERIN, HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES CITRATE, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, SODIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE



**Informationen**  
zu diesem Produkt



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 700541        | 500 ml       | Flasche    | 18 × 500 ml        | 18311930    | 4260181251806    | 4260181251813                 |
| 700562        | 1 L          | Flasche    | 10 × 1 L           | 18311947    | 4260181251820    | 4260181251837                 |
| 700563        | 5 L          | Kanister   | 2 × 5 L            | 18311953    | 4260181251844    | 4260181251851                 |

# Lotio Med Sensitive Professional & Care



## Produktbeschreibung

Lotio Med Sensitive Professional & Care ist eine alkoholfreie Waschlotion, die die Haut sanft und schonend, dank ihrer milden Waschtenside reinigt. Zudem wurde bei der Entwicklung auf Parfum, Farbstoffe und Sulfate verzichtet. Dabei kombiniert die Waschlotion die Pflege und Reinigung der Haut und sorgt für ein geschmeidiges Hautgefühl. Lotio Med Sensitive Professional & Care ist für eine tägliche,

besonders milde Reinigung der Haut geeignet, hautverträglich und dermatologisch getestet.

## Anwendungshinweis

2 ml der Waschlotion direkt auf die angefeuchtete Haut auftragen und anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen. Die Waschlotion kann als Körperpflegemittel mehrmals täglich verwendet werden. Kontakt mit den Augen vermeiden.



### Ingredients:

AQUA, LAURYL GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAURYL GLUCOSE CARBOXYLATE, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, GLYCOL DISTEARATE, GLYCERIN, HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES CITRATE, SODIUM CITRATE, PROPYLENE GLYCOL, SORBIC ACID, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE



**Informationen**  
zu diesem Produkt



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 700566        | 500 ml       | Flasche    | 18 × 500 ml        | 18311901    | 4260181251868    | 4260181251875                 |
| 700567        | 1 L          | Flasche    | 10 × 1 L           | 18311918    | 4260181251882    | 4260181251899                 |
| 700568        | 5 L          | Kanister   | 2 × 5 L            | 18311924    | 4260181251905    | 4260181251912                 |





# Lotio Protect Professional & Care

## Produktbeschreibung

Lotio Protect Professional & Care ist eine alkohol- und parfümfreie Hautschutzcreme, die für den Pflegebereich bestens geeignet ist. Die Wasser-in-Öl-Emulsion bietet Schutz für die Haut, indem eine atmungsaktive Hautbarriere gebildet wird und so vor äußeren Einflüssen schützt. Ist die Creme ausreichend auf der Haut verteilt, zieht diese schnell ein und hinterlässt keinen fettigen Film. Lotio Protect

Professional & Care enthält Vitamin E, Panthenol und Ringelblumenextrakt, ist hautverträglich und dermatologisch getestet.

## Anwendungshinweis

Lotio Protect Professional & Care kann mehrmals täglich verwendet werden und verbleibt auf der Haut.



### Ingredients:

AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL ISONANOATE, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, PANTHENOL, POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE, MAGNESIUM SULFATE, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, CERA ALBA, PAPAVER SOMNIFERUM SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ZINC OXIDE, TOCOPHERYL ACETATE, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, LACTIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE



**Informationen**  
zu diesem Produkt



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 700576        | 100 ml       | Tube       | 25 × 100 ml        | 18312131    | 4260181252001    | 4260181252025                 |
| 700575        | 500 ml       | Flasche    | 18 × 500 ml        | 18312148    | 4260181252018    | 4260181252032                 |

# Lotio Lind Professional & Care



## Produktbeschreibung

Lotio Lind Professional & Care ist eine leichte alkohol- und parfümfreie Hautpflegelotion, die schnell in die Haut einzieht, nicht fettet und ein leichtes Hautgefühl hinterlässt. Die Öl-in-Wasser Formulierung beinhaltet hochwertige Öle, aber auch Wirkstoffe wie Vitamin E, Panthenol und Ringelblumenextrakt. Somit ist Lotio Lind Professional & Care perfekt für den täglichen Gebrauch, sowie nach der Händedes-

infektion geeignet. Lotio Lind Professional & Care ist hautverträglich und dermatologisch getestet.

## Anwendungshinweis

Lotio Lind Professional & Care kann mehrmals täglich verwendet werden und verbleibt auf der Haut.



### Ingredients:

AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, CETEARYL ISONONANOATE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE SE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, CARBOMER, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, XANTHAN GUM, BISABOLOL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, LACTIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE



**Informationen**  
zu diesem Produkt



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 700571        | 100 ml       | Tube       | 25 × 100 ml        | 18312094    | 4260181251486    | 4260181251981                 |
| 700572        | 500 ml       | Flasche    | 18 × 500 ml        | 18312125    | 4260181251493    | 4260181251998                 |



# Lotio Foam Professional & Care

## Produktbeschreibung

Lotio Foam Professional & Care ist ein Schaum, der für die sanfte Pflege und schonende Reinigung der Haut geeignet ist. Milde Tenside sorgen für ein angenehmes Hautgefühl. Dank der hochwertigen Inhaltsstoffe wird die Haut während der Pflege und Reinigung mit Feuchtigkeit versorgt. Lotio Foam Professional & Care ist hautverträglich, alkoholfrei und dermatologisch getestet.

## Anwendungshinweis

Flasche vor Gebrauch ausreichend schütteln und die zu reinigenden Hautpartien mit dem Schaum besprühen. Kurz einwirken lassen und anschließend mit einem Tuch abwischen oder mit Wasser abwaschen. Bei Verwendung im Gesicht Kontakt mit den Augen vermeiden.



### Ingredients:

AQUA, PENTYLENE GLYCOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO-GLUCOSIDE, PANTHENOL, HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER, ALLANTOIN, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, PARFUM



**Informationen**  
zu diesem Produkt



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart  | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 700550        | 200 ml       | Pumpflasche | 24 × 200 ml        | 18312088    | 4260181251479    | 4260181252087                 |

# Lotio Aktiv Professional



## Produktbeschreibung

Lotio Aktiv Professional ist ein Pflegegel, das vor und nach körperlichen Aktivitäten verwendet wird. Seine Formulierung basiert auf einer hochwertigen Rezeptur aus Menthol, Rosmarin- und Pfefferminzöl.

## Was bewirkt Lotio Aktiv Professional?

Das Gel kühlt nachhaltig und spendet ein wohltuendes Gefühl von Frische und Belebung der Haut.

**Wissenswertes zu Körperpflege und Kosmetik – [www.haut.de](http://www.haut.de)**



**Rosmarin** wird aufgrund seiner entspannenden und auch vitalisierenden Wirkung eingesetzt. Sein Duft ist sehr belebend.



**Menthol** ist nicht nur ein Aromastoff, sondern besitzt auch kühlende, erfrischende und durchblutungsfördernde Eigenschaften.



### Ingredients:

ALCOHOL DENAT., AQUA, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL, MENTHOL, CAMPHOR, MENTHA ARVENSIS LEAF OIL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, LIMONENE

**Anwendung:** Lotio Aktiv Professional Gel auf die Hand oder direkt auf die betroffene Hautpartie auftragen und leicht einmassieren. Lotio Aktiv Professional Gel kühlt nachhaltig und spendet ein wohltuendes Gefühl von Frische und Belebung. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Produkt nur auf intakter Haut anwenden. Nicht mit Augen oder Schleimhäuten in Berührung bringen.

**Informationen**  
zu diesem Produkt



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 700121        | 200 ml       | Tube       | 12 × 200 ml        | 18312042    | 4260181251523    | 4260181251516                 |





# Produktübersicht

## Pflege & Kosmetik

| Artikel                                            | Artikel-nummer | Gebinde-größe | Verpackungs-einheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungs-einheit) |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Lotio Med Professional &amp; Care</b>           | 700540         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 18311870    | 4260181251929    | 4260181251936                  |
|                                                    | 700564         | 1 L           | 10 × 1 L            | 18311887    | 4260181251943    | 4260181251950                  |
|                                                    | 700565         | 5 L           | 2 × 5 L             | 18311893    | 4260181251967    | 4260181251974                  |
| <b>Lotio Med Soft Professional &amp; Care</b>      | 700541         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 18311930    | 4260181251806    | 4260181251813                  |
|                                                    | 700562         | 1 L           | 10 × 1 L            | 18311947    | 4260181251820    | 4260181251837                  |
|                                                    | 700563         | 5 L           | 2 × 5 L             | 18311953    | 4260181251844    | 4260181251851                  |
| <b>Lotio Med Sensitive Professional &amp; Care</b> | 700566         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 18311901    | 4260181251868    | 4260181251875                  |
|                                                    | 700567         | 1 L           | 10 × 1 L            | 18311918    | 4260181251882    | 4260181251899                  |
|                                                    | 700568         | 5 L           | 2 × 5 L             | 18311924    | 4260181251905    | 4260181251912                  |
| <b>Lotio Protect Professional &amp; Care</b>       | 700576         | 100 ml        | 25 × 100 ml         | 18312131    | 4260181252001    | 4260181252025                  |
|                                                    | 700575         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 18312148    | 4260181252018    | 4260181252032                  |
| <b>Lotio Lind Professional &amp; Care</b>          | 700571         | 100 ml        | 25 × 100 ml         | 18312094    | 4260181251486    | 4260181251981                  |
|                                                    | 700572         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 18312125    | 4260181251493    | 4260181251998                  |
| <b>Lotio Foam Professional &amp; Care</b>          | 700550         | 200 ml        | 24 × 200 ml         | 18312088    | 4260181251479    | 4260181252087                  |
| <b>Lotio Aktiv Professional</b>                    | 700121         | 200 ml        | 12 × 200 ml         | 18312042    | 4260181251523    | 4260181251516                  |





Flächendesinfektion

# DrDeppe – Flächendesinfektion

Keime werden nicht nur über Hände und Instrumente verbreitet, sondern auch über Flächen. Oberflächen, die häufig mit den Händen berührt werden oder mit Schleimhäuten oder Körperflüssigkeiten in Kontakt kommen, sind einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Von diesen können Keime durch Hände oder Staub verbreitet werden.

In hygienesensiblen Bereichen beugt die Flächendesinfektion daher einer Ansteckung vor und schützt so Patienten, Bewohner, Besucher, Kunden oder Mitarbeiter. Gerade im medizinischen Bereich, Pflegeheimen, Kindergärten, Behinderteneinrichtungen, sowie der Lebensmittelindustrie müssen bestimmte Oberflächen regelmäßig desinfiziert werden.

DrDeppe verfügt im Bereich der Flächendesinfektion sowohl über Medizinprodukte als auch Biozide. So finden Sie für jede Anwendung das optimale Präparat.



# INHALT

## Flächendesinfektion

|                      |    |
|----------------------|----|
| Spray In QF .....    | 44 |
| Spray Off .....      | 46 |
| Beta Guard Neu ..... | 48 |
| Beta Guard rfu ..... | 50 |
| Spray On .....       | 52 |
| Spray In Neu .....   | 54 |
| Spray In GA .....    | 56 |

## Beta Guard Neu

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Herstellung einer Gebrauchslösung ..... | 58 |
|-----------------------------------------|----|


## Dosiertabelle

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Herstellung gebrauchsfertiger Desinfektionslösungen ..... | 59 |
|-----------------------------------------------------------|----|

## Produktübersicht

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Flächendesinfektion ..... | 60 |
|---------------------------|----|

*Applikationshilfen auf Anfrage*

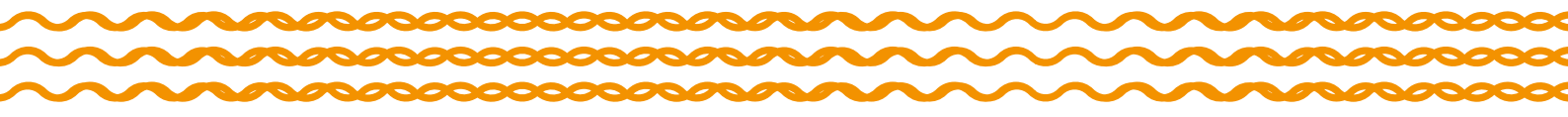



# Spray In QF



## Produktbeschreibung

Spray In QF ist ein flüssiges, alkoholisches, aldehyd- und QAV-freies Flächendesinfektionsmittel in gebrauchsfertiger Form.

## Anwendungsgebiet

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten, bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten. Spray In QF ist auch für Personen im

Lebensmittelbereich geeignet, als HACCP-konform nach der EU-Verordnung (EG) Nr. 852/2004 bescheinigt worden und kann sicher im Rahmen eines HACCP-Konzeptes verwendet werden.

## Wirkpektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt ist vorzugsweise im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs zu verwenden. Eine Sprühdesinfektion vorzugsweise auf die Bereiche beschränken, die durch eine Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Einsatz des Sprühverfahrens sollte dies in einer Kombination aus Sprüh- / Wischverfahren verwendet werden. Es gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart    | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601356*       | 500 ml       | Flasche       | 18 × 500 ml        | 18313082    | 4260181254043    | 4260181251196                 | 54.99.02.0018           |
| 600917        | 1 L          | Keulenflasche | 12 × 1 L           | 18313047    | 4260181254012    | 4260181251165                 | -                       |
| 601106        | 5 L          | Kanister      | 2 × 5 L            | 18313053    | 4260181254029    | 4260181251172                 | -                       |
| 601107        | 10 L         | Kanister      | 1 × 10 L           | 18313076    | 4260181254036    | 4260181251189                 | -                       |



## Medizinproduktklasse

IIa (außer Artikel 601356 – nur Biozidprodukt)

## Biozidregistriernummer

N-73614

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

In 100 Gramm sind als Wirkstoff enthalten:

50 g Ethanol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Spray In QF<br>Wirkspektrum                                       | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Bakterizid                                                        | mit<br>Mechanik<br>niedrig      | 1 Minute    | EN 13727<br>EN 1276<br>EN 16615*           |
| Levurozid                                                         | mit<br>Mechanik<br>niedrig      | 1 Minute    | EN 13624<br>EN 1650<br>EN 16615*           |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                    | mit<br>Mechanik<br>niedrig      | 1 Minute    | EN 14476,<br>Virus-<br>4-Felder-<br>test** |
| Bakterizid                                                        | ohne<br>Mechanik<br>niedrig     | 1 Minute    | EN 13727<br>EN 1276<br>EN 13697            |
| Levurozid                                                         | ohne<br>Mechanik<br>niedrig     | 1 Minute    | EN 13624<br>EN 1650<br>EN 13697            |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                    | ohne<br>Mechanik<br>niedrig     | 1 Minute    | EN 14476<br>EN 16777                       |
| Begrenzt viruzid<br>PLUS (Adenovirus Typ 5,<br>Murines Norovirus) | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14476                                   |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                       | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14348                                   |
| Mykobakterizid<br>(M. terrae und M. avium)                        | niedrig                         | 5 Minuten   | EN 14348                                   |

\* an Referenz Tuch getestet

\*\* in Anlehnung an EN 16615

CE 0044



Informationen  
zu diesem Produkt



# Spray Off



## Produktbeschreibung

Spray Off ist ein flüssiges, alkoholisches und aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel in gebrauchsfertiger Form.

## Anwendungsgebiet

Zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten, bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- fungizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- viruzid wirksam gegen Polyoma SV-40
- viruzid

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt ist vorzugsweise im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs zu verwenden. Eine Sprühdesinfektion vorzugsweise auf die Bereiche beschränken, die durch eine Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Einsatz des Sprühverfahrens sollte dies in einer Kombination aus Sprüh- / Wischverfahren verwendet werden. Es gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart    | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 600986        | 500 ml       | Flasche       | 18 × 500 ml        | 18313136    | 4260181253794    | 4260181250762                 |
| 601330        | 1 L          | Keulenflasche | 12 × 1 L           | 18313142    | 4260181254357    | 4260181250779                 |
| 601334        | 5 L          | Kanister      | 2 × 5 L            | 18313159    | 4260181254371    | 4260181250786                 |
| 601332        | 10 L         | Kanister      | 1 × 10 L           | 18313165    | 4260181254388    | 4260181250793                 |



## Medizinproduktklasse

IIa

## Biozidregistriernummer

N-91345

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:**

63,50 g Ethanol

0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Spray Off<br>Wirkspektrum                                                      | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Bakterizid                                                                     | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute    | EN 13727<br>EN 16615* |
| Levurozid                                                                      | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute    | EN 13624<br>EN 16615* |
| Tuberkulozid (M. terrae),<br>Mykobakterizid<br>(M. terrae, M. avium)           | hoch                            | 1 Minute    | EN 14348              |
| Fungizid<br>(C. albicans, A. brasiliensis)                                     | hoch                            | 5 Minuten   | EN 13624<br>EN 13697  |
| Begrenzt viruzid nach<br>DVV/RKI (Vaccinia Stamm<br>Elstree, BVDV Stamm NADL)  | 10% FKS                         | 1 Minute    | DVV/RKI               |
| Begrenzt viruzid nach<br>EN 14476<br>(Modified Vaccinia Ankara)                | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14476              |
| Begrenzt viruzid PLUS<br>nach DVV/RKI (Murines<br>Norovirus, Adenovirus Typ 5) | 10% FKS                         | 1 Minute    | DVV/RKI               |
| Viruzid wirksam<br>gegen Polyoma SV-40<br>nach DVV/RKI                         | 10% FKS                         | 5 Minuten   | DVV/RKI               |
| Viruzid<br>(Murines Norovirus, Adeno-<br>virus Typ 5, Poliovirus Typ 1)        | niedrig                         | 5 Minuten   | EN 14476<br>EN 16777  |

\* an Referenz Tuch getestet

CE 0044



Informationen  
zu diesem Produkt



# Beta Guard Neu



## Produktbeschreibung

Beta Guard Neu ist ein flüssiges, alkohol- und aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel in konzentrierter Form.

## Anwendungsgebiet

Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten, bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten. Für den professionellen Gebrauch.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- viruzid wirksam gegen Polyoma SV-40

## Anwendungshinweise

Vor Anwendung des Produktes muss eine verdünnte Lösung hergestellt werden. Hierzu wird die benötigte Menge des Konzentrates mit Wasser (Trinkwasserqualität) vermischt. Die hergestellte Gebrauchslösung ist vorzugsweise im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs zu verwenden. Eine Sprühdeseinfektion vorzugsweise auf die Bereiche beschränken, die durch eine Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Einsatz des Sprühverfahrens sollte dies in einer Kombination aus Sprüh- / Wischverfahren verwendet werden. Es gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart    | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601875        | 1 L          | Dosierflasche | 14 × 1 L           | 19756232    | 4260181258805    | 4260181258812                 |
| 601487        | 2 L          | Kanister      | 6 × 2 L            | 18312912    | 4260181252384    | 4260181252391                 |
| 601050        | 5 L          | Kanister      | 2 × 5 L            | 18312875    | 4260181254159    | 4260181251059                 |
| 601052        | 10 L         | Kanister      | 1 × 10 L           | 18312906    | 4260181254166    | 4260181251066                 |





## Medizinproduktklasse

IIa

## Biozidregistriernummer

N-77462

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

### In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:

7,0 g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid

5,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

2,0 g 2-Phenoxyethanol

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendungsorgfältig wieder verschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Beta Guard Neu<br>Wirkspektrum                           | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Kon-<br>zentra-<br>tion | Einwirk-<br>zeit       | Norm                            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Bakterizid                                               | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 0,5 %                   | 5 Min.                 | EN 13727<br>EN 16615*           |
| Levurozid                                                | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 0,5 %                   | 5 Min.                 | EN 13624<br>EN 16615*           |
| Bakterizid                                               | ohne<br>Mechanik<br>hoch        | 1,5 %                   | 5 Min.                 | EN 13727<br>EN 1276<br>EN 13697 |
| Levurozid                                                | ohne<br>Mechanik<br>hoch        | 1,5 %                   | 5 Min.                 | EN 13624<br>EN 1650<br>EN 13697 |
| Tuberkulozid/<br>Mykobakterizid<br>(M. terrae, M. avium) | hoch                            | 2 %<br>1 %              | 30 Min.**<br>60 Min.** | EN 14348                        |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified<br>Vaccinia Ankara)        | hoch                            | 3 %                     | 5 Min.                 | EN 14476                        |
| Begrenzt viruzid<br>PLUS:                                | hoch                            | 4 %                     | 60 Min.**              | EN 14476                        |
| Adenovirus Typ 5                                         | hoch                            | 4 %                     | 60 Min.**              | EN 14476                        |
| Murines<br>Norovirus                                     | hoch                            | 3 %                     | 60 Min.**              | EN 14476                        |
| Rotavirus Stamm<br>Wa                                    | ohne                            | 1 %                     | 30 Min.**              | EN 14476                        |
| Viruzid wirksam<br>gegenüber<br>Polyomavirus SV-40       | hoch                            | 2 %                     | 60 Min.**              | EN 14476                        |

\* an Referenz Tuch getestet

\*\* nicht für patientennahe Oberflächen

CE 0044



Informationen  
zu diesem Produkt



# Beta Guard rfu



## Produktbeschreibung

Beta Guard rfu ist ein flüssiges, alkohol- und aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel in gebrauchsfertiger Form.

## Anwendungsgebiet

Es ist zur Schnelldesinfektion von wischbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen geeignet.



## Wirkpektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt ist vorzugsweise im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs zu verwenden. Eine Sprühdesinfektion vorzugsweise auf die Bereiche beschränken, die durch eine Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Einsatz des Sprühverfahrens sollte dies in einer Kombination aus Sprüh- / Wischverfahren verwendet werden. Es gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart                          | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601544*       | 500 ml       | Flasche                             | 18 × 500 ml        | 18312289    | 4260181253060    | 4260181253077                 | 54.99.02.0017           |
| 602002*       | 500 ml       | Kentoflasche mit vormont. Sprühkopf | 6 × 500 ml         | 20410622    | 4260181258256    | 4260181258270                 | -                       |
| 601110        | 1 L          | Keulenflasche                       | 12 × 1 L           | 18312929    | 4260181254180    | 4260181251028                 | -                       |
| 601112        | 5 L          | Kanister                            | 2 × 5 L            | 18312941    | 4260181254197    | 4260181251035                 | -                       |
| 601114        | 10 L         | Kanister                            | 1 × 10 L           | 18312958    | 4260181254203    | 4260181251042                 | -                       |



## Medizinproduktklasse

IIa (außer Artikel 601544 und 602002,  
nur Biozidprodukt)

## Biozidregistriernummer

N-83978

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor  
Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen  
lesen.

## Zusammensetzung

### In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:

0,1 g 2-Phenoxyethanol  
0,35 g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammonium-  
chlorid  
0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-  
1,3-diamin

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung  
sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zu-  
stand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen  
Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Beta Guard rfu<br>Wirkpektrum                                     | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit  | Norm                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| Bakterizid                                                        | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute     | EN 13727<br>EN 16615*                    |
| Levurozid                                                         | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute     | EN 13624<br>EN 16615*                    |
| Bakterizid                                                        | ohne<br>Mechanik<br>hoch        | 1 Minute     | EN 13727<br>EN 1276***<br>EN 13697       |
| Levurozid                                                         | ohne<br>Mechanik<br>hoch        | 1 Minute     | EN 13624<br>EN 1650***<br>EN 13697       |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                       | hoch                            | 60 Minuten** | EN 14348                                 |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                    | hoch                            | 1 Minute     | EN 14476,<br>Virus-4-Felder-<br>Test**** |
| Begrenzt viruzid PLUS<br>(Adenovirus Typ 5,<br>Murines Norovirus) | hoch                            | 60 Minuten** | EN 14476                                 |

\* an Referenz Tuch getestet

\*\* nicht für patientennahe Oberflächen

\*\*\* Lebensmittelbereich

\*\*\*\* in Anlehnung an EN 16615

CE 0044



Informationen  
zu diesem Produkt



# Spray On



## Produktbeschreibung

Spray On ist ein flüssiges, aldehyd- und QAV- freies, alkoholisches Flächendesinfektionsmittel in gebrauchsfertiger Form.

## Anwendungsgebiet

Es ist einsetzbar zur Desinfektion in Einrichtungen des Gesundheitswesens und der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie, z. B. patientennahe Umgebung, Arbeitsbereiche/ Schreibtische, allgemeine Geräte (mit Ausnahme von Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen). Spray On ist zudem zur Desinfektion von harten, nicht porösen, kleinen Oberflächen geeignet.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt ist vorzugsweise im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs zu verwenden. Eine Sprühdesinfektion vorzugsweise auf die Bereiche beschränken, die durch eine Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Einsatz des Sprühverfahrens sollte dies in einer Kombination aus Sprüh-/Wischverfahren verwendet werden. Es gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

Nur für den professionellen Gebrauch.



Das Biozidprodukt Spray On (Wirkstoff Propan-1-ol und Propan-2-ol) hat eine Unions- und Schweiz-Zulassung für die Produktart 2 (Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind) und Produktart 4 (Lebens- und Futtermittelbereich) mit der Zulassungsnummer EU-0027669-0000. Die Zulassung ist gültig bis 31. Juli 2032.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart    | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601211        | 1 L          | Keulenflasche | 12 × 1 L           | 18312349    | 4260181251639    | 4260181251646                 |
| 601210        | 5 L          | Kanister      | 2 × 5 L            | 18312332    | 4260181253855    | 4260181251301                 |



## Zulassungsnummer

EU-0027669-0000

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:**

45 g 2-Propanol

15 g 1-Propanol

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

24 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Spray On<br>Wirkspektrum                       | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Bakterizid                                     | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute    | EN 13727<br>EN 16615* |
| Levurozid                                      | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute    | EN 13624<br>EN 16615* |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara) | hoch                            | 1 Minute    | EN 14476              |

\* an Referenz Tuch getestet





# Spray In Neu



## Produktbeschreibung

Spray In Neu ist ein flüssiges, alkoholisches und aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel in gebrauchsfertiger Form.

## Anwendungsgebiet

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten, bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt ist vorzugsweise im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs zu verwenden. Eine Sprühdesinfektion vorzugsweise auf die Bereiche beschränken, die durch eine Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Einsatz des Sprühverfahrens sollte dies in einer Kombination aus Sprüh- / Wischverfahren verwendet werden. Es gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart    | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601937*       | 250 ml       | Flasche       | 12 × 250 ml        | 20136411    | 4260181253350    | 4260181257617                 | 54.99.02.0023           |
| 601450        | 1 L          | Keulenflasche | 12 × 1 L           | 18313001    | 4260181254234    | 4260181250991                 | -                       |
| 601454        | 5 L          | Kanister      | 2 × 5 L            | 18313018    | 4260181254241    | 4260181251004                 | -                       |
| 601452        | 10 L         | Kanister      | 1 × 10 L           | 18313030    | 4260181254258    | 4260181251011                 | -                       |



## Medizinproduktklasse

IIa (außer Artikel 601937, nur Biozidprodukt)

## Biozidregistriernummer

N-60215

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:**

0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid  
43 g Ethanol

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Spray In Neu<br>Wirkspektrum                                     | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit  | Norm                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| Bakterizid                                                       | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 5 Minuten    | EN 13727<br>EN 16615* |
| Levurozid                                                        | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 5 Minuten    | EN 13624<br>EN 16615* |
| Bakterizid                                                       | ohne<br>Mechanik<br>hoch        | 5 Minuten    | EN 13727<br>EN 13697  |
| Levurozid                                                        | ohne<br>Mechanik<br>hoch        | 5 Minuten    | EN 13624<br>EN 13697  |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                      | hoch                            | 1 Minute     | EN 14348              |
| Begrenzt viruzid<br>(Vaccinia Stamm Elstree,<br>BVDV Stamm NADL) | 10% FKS                         | 30 Sekunden  | DVV/RKI               |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                   | niedrig                         | 1 Minute     | EN 14476              |
| Begrenzt viruzid PLUS                                            | niedrig                         | 15 Minuten** | EN 14476              |
| Adenovirus Typ 5                                                 | niedrig                         | 15 Minuten** | EN 14476              |
| Murines Norovirus                                                | niedrig                         | 5 Minuten    | EN 14476              |
| Rotavirus Stamm Wa                                               | niedrig                         | 5 Minuten    | EN 14476              |

\* an Referenz Tuch getestet

\*\* nicht für patientennahe Oberflächen

CE 0044



Informationen  
zu diesem Produkt



# Spray In GA



## Produktbeschreibung

Spray In GA ist ein flüssiges, gebrauchsfertiges und gering alkoholhaltiges Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion. Das Produkt zeigt eine sehr gute Materialverträglichkeit unter den vorgegebenen Einwirkzeiten.

## Anwendungsgebiet

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- wirksam gegen Polyoma SV-40 Viren

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt ist vorzugsweise im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs zu verwenden. Eine Sprühdesinfektion vorzugsweise auf die Bereiche beschränken, die durch eine Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Einsatz des Sprühverfahrens sollte dies in einer Kombination aus Sprüh-/Wischverfahren verwendet werden. Es gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

## Zielgruppe (Anwender/Nutzer)

- Pflegefachkräfte und Pflegepersonal
- Pflegebedürftige Personen
- Pflegendе Angehörige
- Pflegeberaterinnen und -berater, neutrale Beratungsstellen oder kommunale Beratungspersonen in ihrer Beratungstätigkeit

## Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Spray In GA weist keine bekannten Anwendungsrisiken oder Kontraindikationen auf. Es liegen keine Hinweise auf unerwünschte Wirkungen oder Einschränkungen vor.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer    | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|------------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601939 (Neutral) | 500 ml       | Flasche    | 18 × 500 ml        | 20190468    | 4260181257655    | 4260181257679                 | 54.99.02.0016           |



## Medizinproduktklasse

IIa

## Zusammensetzung

**In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:**

20 g Propan-1-ol

0,2 g Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wieder-  
verschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zu-  
stand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen  
Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Spray In GA<br>Wirkspektrum                                          | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit  | Norm                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Bakterizid                                                           | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute     | EN 13727<br>EN 16615*             |
| Levurozid                                                            | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute     | EN 13624<br>EN 16615*             |
| Tuberkulozid (M. terrae),<br>Mykobakterizid<br>(M. terrae, M. avium) | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 2 Minuten    | VAH 9.1<br>VAH 14.1*              |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                       | mit<br>Mechanik<br>niedrig      | 1 Minute     | EN 14476,<br>modified<br>EN16615* |
| Begrenzt viruzid<br>PLUS                                             | niedrig                         | 30 Minuten** | EN 14476                          |
| Adenovirus Typ 5                                                     | niedrig                         | 30 Minuten** | EN 14476                          |
| Murines Norovirus                                                    | niedrig                         | 1 Minute     | EN 14476                          |
| Rotavirus Stamm WA                                                   | ohne                            | 30 Sekunden  | EN 14476                          |
| Viruzid wirksam<br>gegen<br>Polyoma SV-40                            | niedrig                         | 5 Minuten    | EN 14476                          |

\* an Referenz Tuch getestet

\*\* nicht für patientennahe Oberflächen

CE 0044



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Beta Guard Neu

## Herstellung einer Gebrauchslösung



Beta Guard Neu liegt zum Herstellen einer Gebrauchslösung als Konzentrat vor.

Vor Verwendung wird die Gebrauchslösung unter Beachtung der erforderlichen Konzentration für die geplante Anwendung hergestellt.

- 1.** Persönliche Schutzausrüstung: Legen Sie chemikalienbeständige Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Atemschutz und eine dicht schließende Schutzbrille an.
- 2.** Mischen Sie Beta Guard Neu mit Wasser in Trinkwasserqualität zu einer Gebrauchslösung an (siehe nachfolgende Tabelle).

### Anwendungsbeispiel:

Zum Herstellen von 1 Liter einer 1%igen Gebrauchslösung mischen Sie 990 ml Wasser mit 10 ml Beta Guard Neu.






# Dosiertabelle

## Herstellung gebrauchsfertiger Desinfektionslösungen

|                                         | Konzentration                          |       |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                         | 0,25 %                                 | 0,5 % | 1,0 %  | 1,5 %  | 2,0 %  | 2,5 %  | 3,0 %  | 4,0 %  | 5,0 %  |
| Gesamtmenge<br>Desinfektions-<br>lösung | Menge an Desinfektionsmittelkonzentrat |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 1 Liter                                 | 2,5 ml                                 | 5 ml  | 10 ml  | 15 ml  | 20 ml  | 25 ml  | 30 ml  | 40 ml  | 50 ml  |
| 2 Liter                                 | 5 ml                                   | 10 ml | 20 ml  | 30 ml  | 40 ml  | 50 ml  | 60 ml  | 80 ml  | 100 ml |
| 3 Liter                                 | 7,5 ml                                 | 15 ml | 30 ml  | 45 ml  | 60 ml  | 75 ml  | 90 ml  | 120 ml | 150 ml |
| 4 Liter                                 | 10 ml                                  | 20 ml | 40 ml  | 60 ml  | 80 ml  | 100 ml | 120 ml | 160 ml | 200 ml |
| 5 Liter                                 | 12,5 ml                                | 25 ml | 50 ml  | 75 ml  | 100 ml | 125 ml | 150 ml | 200 ml | 250 ml |
| 6 Liter                                 | 15 ml                                  | 30 ml | 60 ml  | 90 ml  | 120 ml | 150 ml | 180 ml | 240 ml | 300 ml |
| 7 Liter                                 | 17,5 ml                                | 35 ml | 70 ml  | 105 ml | 140 ml | 175 ml | 210 ml | 280 ml | 350 ml |
| 8 Liter                                 | 20 ml                                  | 40 ml | 80 ml  | 120 ml | 160 ml | 200 ml | 240 ml | 320 ml | 400 ml |
| 9 Liter                                 | 22,5 ml                                | 45 ml | 90 ml  | 135 ml | 180 ml | 225 ml | 270 ml | 360 ml | 450 ml |
| 10 Liter                                | 25 ml                                  | 50 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 250 ml | 300 ml | 400 ml | 500 ml |

### Anwendungsbeispiel:

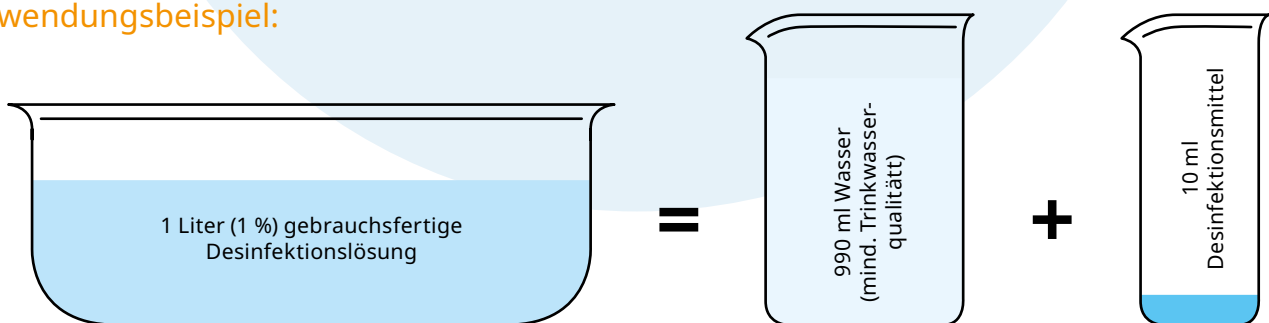

Die benötigte Konzentration und Einwirkzeit entnehmen Sie bitte dem Etikett oder der Produktinformation des jeweiligen Produktes. Wir empfehlen einen täglichen Wechsel der Desinfektionslösung.

# Produktübersicht

## Flächendesinfektion

| Artikel        | Artikel-nummer | Gebinde-größe | Verpackungs-einheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungs-einheit) | HMN (Hilfsmittel-nummer) |
|----------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Spray In QF    | 601356         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 18313082    | 4260181254043    | 4260181251196                  | 54.99.02.0018            |
|                | 600917         | 1 L           | 10 × 1 L            | 18313047    | 4260181254012    | 4260181251165                  | -                        |
|                | 601106         | 5 L           | 2 × 5 L             | 18313053    | 4260181254029    | 4260181251172                  | -                        |
|                | 601107         | 10 L          | 1 × 10 L            | 18313076    | 4260181254036    | 4260181251189                  | -                        |
| Spray Off      | 600986         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 18313136    | 4260181253794    | 4260181250762                  | -                        |
|                | 601330         | 1 L           | 10 × 1 L            | 18313142    | 4260181254357    | 4260181250779                  | -                        |
|                | 601334         | 5 L           | 2 × 5 L             | 18313159    | 4260181254371    | 4260181250786                  | -                        |
|                | 601332         | 10 L          | 1 × 10 L            | 18313165    | 4260181254388    | 4260181250793                  | -                        |
| Beta Guard Neu | 601875         | 1 L           | 10 × 1 L            | 19756232    | 4260181258805    | 4260181258812                  | -                        |
|                | 601487         | 2 L           | 6 × 2 L             | 18312912    | 4260181252384    | 4260181252391                  | -                        |
|                | 601050         | 5 L           | 2 × 5 L             | 18312875    | 4260181254159    | 4260181251059                  | -                        |
| Beta Guard rfu | 601544         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 18312289    | 4260181253060    | 4260181253077                  | 54.99.02.0017            |
|                | 602002         | 500 ml        | 6 × 500 ml          | 20410622    | 4260181258256    | 4260181258270                  | -                        |
|                | 601110         | 1 L           | 10 × 1 L            | 18312929    | 4260181254180    | 4260181251028                  | -                        |
|                | 601112         | 5 L           | 2 × 5 L             | 18312941    | 4260181254197    | 4260181251035                  | -                        |
|                | 601114         | 10 L          | 1 × 10 L            | 18312958    | 4260181254203    | 4260181251042                  | -                        |
| Spray On       | 601211         | 1 L           | 10 × 1 L            | 18312349    | 4260181251639    | 4260181251646                  | -                        |
|                | 601210         | 5 L           | 2 × 5 L             | 18312332    | 4260181253855    | 4260181251301                  | -                        |
| Spray In Neu   | 601937         | 250 ml        | 12 × 250 ml         | 20136411    | 4260181253350    | 4260181257617                  | 54.99.02.0023            |
|                | 601450         | 1 L           | 10 × 1 L            | 18313001    | 4260181254234    | 4260181250991                  | -                        |
|                | 601454         | 5 L           | 2 × 5 L             | 18313018    | 4260181254241    | 4260181251004                  | -                        |
|                | 601452         | 10 L          | 1 × 10 L            | 18313030    | 4260181254258    | 4260181251011                  | -                        |
| Spray In GA    | 601939         | 500 ml        | 18 × 500 ml         | 20190468    | 4260181257655    | 4260181257679                  | 54.99.02.0016            |



# Desinfektions- und Reinigungstücher

# DrDeppe – Desinfektionstücher- und Reinigungstücher

Die Aufgabe von Desinfektions- und Reinigungstüchern besteht darin, die mit Krankheitserregern belasteten Oberflächen (z.B. Türgriffe, Toiletten, Armaturen, Tische, Hände, Instrumente) zu desinfizieren bzw. zu reinigen. Sie sind praktisch und einfach in der Anwendung, da sie vorgetränkt sind und benötigen keine zusätzliche Flüssigkeit. Vor allem in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheimen, häuslicher Pflege, Schulen und anderen öffentlichen Bereichen sind sie weit verbreitet. Desinfektions- und Reinigungstücher sind wichtige Produkte, um die Ausbreitung von Infektionen zu reduzieren und die Gesundheit und Sicherheit der Menschen zu schützen.

In unserer eigenen Tuchproduktion stellen wir hochwertige, gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionstücher für Haut und Hände, Flächen und Instrumente her. Besonders hervorzuheben sind unsere Tücher aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.





# INHALT

## Desinfektions- und Reinigungstücher

### Flächendesinfektion

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Beta Guard rfu wipes (Cellulose) .....    | 64 |
| Beta Guard rfu wipes (Polypropylen) ..... | 66 |
| Spray In QF wipes (Cellulose) .....       | 68 |
| Spray Off wipes (Cellulose) .....         | 70 |
| Spray Off wipes (Polypropylen) .....      | 72 |
| Spray On wipes (Cellulose) .....          | 74 |
| Spray In GA wipes (Cellulose) .....       | 72 |

### Hände- und Flächendesinfektion


|                              |    |
|------------------------------|----|
| Lotio 2in1 (Cellulose) ..... | 76 |
|------------------------------|----|

### Instrumentenvorreinigung

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Instru Zym wipes (Cellulose) ..... | 78 |
|------------------------------------|----|

## Produktübersicht

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Desinfektions- und Reinigungstücher ..... | 80 |
|-------------------------------------------|----|

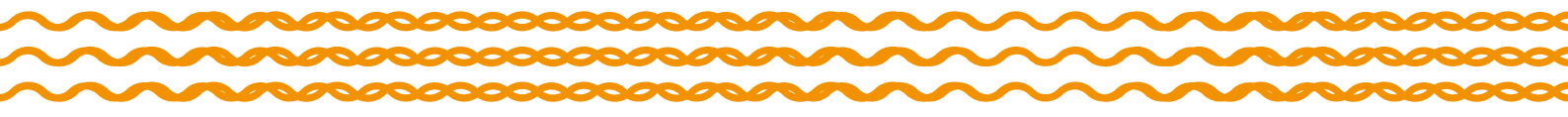



# Beta Guard rfu wipes (Cellulose)

## Produktbeschreibung

Beta Guard rfu wipes sind alkohol- und aldehydfreie Flächendesinfektionstücher in gebrauchsfertiger Form. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

## Anwendungsgebiet

Zur Desinfektion wischbeständiger Medizinprodukt-oberflächen, Geräteoberflächen und Gegenständen im patientennahen Umfeld, sowie Oberflächen in der Industrie, Lebensmittelbereichen und in der häuslichen Pflege. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt wird im Wischverfahren verwendet. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen. Bei Flächen und Arbeitsgeräten die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Tuchgröße  | Gebindeart                   | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|---------------|--------------|------------|------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601797        | 80 Tücher    | 20 × 20 cm | Flowpack (mit LID)           | 12 × 80 Tücher     | 19691716    | 4260181257549    | 4260181257556                 | 54.99.02.0019           |
| 601803        | 70 Tücher    | 29 × 30 cm | Eimer                        | 1 × 70 Tücher      | 19691739    | 4260181257501    | 4260181257518                 | -                       |
| 601804        | 70 Tücher    | 29 × 30 cm | Eimer-Nachfüllpack           | 6 × 70 Tücher      | 19691722    | 4260181257525    | 4260181257532                 | -                       |
| 601974*       | 60 Tücher    | 18 × 20 cm | Flowpack (mit Anfassflasche) | 22 x 60 Tücher     | 20391586    | 4260181250045    | 4260181257945                 | -                       |



## Medizinproduktklasse

IIa (außer 601974, nur Biozidprodukt)

## Biozidregistriernummer

N-83979

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten:**

0,1 g 2-Phenoxyethanol

0,35 g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid

0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wieder verschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Beta Guard rfu<br>wipes (Cellulose)<br>Wirkspektrum                  | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit  | Norm                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| Bakterizid                                                           | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute     | EN 13727*<br>EN 16615 |
| Levurozid                                                            | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute     | EN 13624*<br>EN 16615 |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                          | hoch                            | 60 Minuten** | EN 14348*             |
| Begrenzt viruzid                                                     | hoch                            | 1 Minute     | EN 14476*             |
| Modified Vaccinia<br>Ankara                                          | niedrig                         | 1 Minute     | mod.<br>EN 16615      |
| Begrenzt viruzid<br>PLUS<br>(Adenovirus Typ 5,<br>Murines Norovirus) | hoch                            | 60 Minuten** | EN 14476*             |

\* getestet an der Tränklösung

\*\* nicht für patientennahe Oberflächen

CE 0044



Informationen  
zu diesem Produkt



# Beta Guard rfu wipes (Polypropylen)

## Produktbeschreibung

Beta Guard rfu wipes sind alkohol- und aldehydfreie Flächendesinfektionstücher in gebrauchsfertiger Form. Das verwendete Tuchmaterial ist Polypropylen.

## Anwendungsgebiet

Zur Desinfektion wischbeständiger Geräteoberflächen und Gegenständen im patientennahen Umfeld, sowie Oberflächen in der Industrie und in Lebensmittelbereichen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt wird im Wischverfahren verwendet. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen. Bei Flächen und Arbeitsgeräten die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Tuchgröße  | Gebindeart        | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601111        | 150 Tücher   | 15 × 18 cm | Dose              | 12 × 150 Tücher    | 18312295    | 4260181253992    | 4260181251110                 |
| 601113        | 150 Tücher   | 15 × 18 cm | Dose-Nachfüllpack | 12 × 150 Tücher    | 18312303    | 4260181254005    | 4260181251127                 |



## Biozidregistriernummer

N-83979

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten:**

0,1 g 2-Phenoxyethanol

0,35 g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid

0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wieder verschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Beta Guard rfu wip-es (Polypropylen) Wirkspektrum           | Belastung (hoch/niedrig) | Einwirkzeit  | Norm                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| Bakterizid                                                  | hoch                     | 1 Minute     | EN 13727*<br>EN 16615 |
| Levurozid                                                   | hoch                     | 1 Minute     | EN 13624*<br>EN 16615 |
| Tuberkulozid (M. terrae)                                    | hoch                     | 60 Minuten** | EN 14348*             |
| Begrenzt viruzid                                            | hoch                     | 1 Minute     | EN 14476*             |
| Modified Vaccinia Ankara                                    | niedrig                  | 1 Minute     | mod.<br>EN 16615      |
| Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus) | hoch                     | 60 Minuten** | EN 14476*             |

\* getestet an der Tränklösung

\*\* nicht für patientennahe Oberflächen



**Informationen**  
zu diesem Produkt





# Spray In QF wipes (Cellulose)

## Produktbeschreibung

Spray In QF wipes sind alkoholische Flächendesinfektionstücher in gebrauchsfertiger Form, aldehyd- und QAV-frei. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

## Anwendungsgebiet

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken,

Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten. Spray In QF wipes sind auch für Personen im Lebensmittelbereich geeignet, als HACCP-konform nach der EU-Verordnung (EG) Nr. 852/2004 bescheinigt worden und können sicher im Rahmen eines HACCP-Konzeptes verwendet werden.

## Wirkpektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt wird im Wischverfahren verwendet. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Tuchgröße  | Gebindeart         | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601799*       | 60 Tücher    | 18 × 20 cm | Flowpack (mit LID) | 20 × 60 Tücher     | 19692733    | 4260181257426    | 4260181257433                 | 54.99.02.0021           |
| 601796        | 80 Tücher    | 20 × 20 cm | Flowpack (mit LID) | 12 × 80 Tücher     | 19692348    | 4260181257341    | 4260181257358                 | -                       |
| 601801        | 70 Tücher    | 29 × 30 cm | Eimer              | 1 × 70 Tücher      | 19692377    | 4260181257365    | 4260181257372                 | -                       |
| 601802        | 70 Tücher    | 29 × 30 cm | Eimer-Nachfüllpack | 6 × 70 Tücher      | 19692578    | 4260181257389    | 4260181257396                 | -                       |





## Medizinproduktklasse

IIa (außer Artikel 601799 und 601912,  
nur Biozidprodukt)

## Biozidregistriernummer

N-115216

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor  
Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen  
lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm Tränklösung sind als Wirkstoff  
enthalten:**

50 g Ethanol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung  
sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zu-  
stand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen  
Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Spray In QF<br>wipes (Cellulose)<br>Wirkspektrum                     | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| Bakterizid                                                           | niedrig                         | 1 Minute    | EN 13727*<br>EN 1276*<br>EN 16615           |
| Levurozid                                                            | niedrig                         | 1 Minute    | EN 13624*<br>EN 1650*<br>EN 16615           |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                       | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14476*,<br>Virus-<br>4-Felder-<br>test** |
| Begrenzt viruzid<br>PLUS<br>(Adenovirus Typ 5, Murines<br>Norovirus) | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14476*                                   |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                          | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14348*                                   |
| Mykobakterizid<br>(M. terrae und M. avium)                           | hoch                            | 5 Minuten   | EN 14348*                                   |

\* getestet an der Tränklösung

\*\* in Anlehnung an EN 16615

CE 0044



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Spray Off wipes (Cellulose)

## Produktbeschreibung

Spray Off wipes sind alkoholische, aldehydfreie Flächendesinfektionstücher in gebrauchsfertiger Form. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

## Anwendungsgebiet

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- fungizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- viruzid wirksam gegen Polyoma SV-40 Viren
- viruzid

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt wird im Wischverfahren verwendet. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Tuchgröße  | Gebindeart         | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601798        | 80 Tücher    | 20 × 20 cm | Flowpack (mit LID) | 12 × 80 Tücher     | 19691751    | 4260181257464    | 4260181257471                 |
| 601805        | 70 Tücher    | 29 × 30 cm | Eimer              | 1 × 70 Tücher      | 19691745    | 4260181257488    | 4260181257495                 |
| 601806        | 70 Tücher    | 29 × 30 cm | Eimer-Nachfüllpack | 6 × 70 Tücher      | 19692561    | 4260181257440    | 4260181257457                 |



## Medizinproduktklasse

IIa

## Biozidregistriernummer

N-91346

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten:**

63,50 g Ethanol

0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Spray Off wipes (Cellulose) Wirkspektrum                                 | Belastung (hoch/niedrig) | Einwirkzeit | Norm                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| Bakterizid                                                               | mit Mechanik hoch        | 1 Minute    | EN 13727*<br>EN 16615 |
| Levurozid                                                                | mit Mechanik hoch        | 1 Minute    | EN 13624*<br>EN 16615 |
| Tuberkulozid (M. terrae), Mykobakterizid (M. terrae, M. avium)           | hoch                     | 1 Minute    | EN 14348*             |
| Fungizid (C. albicans, A. brasiliensis)                                  | hoch                     | 5 Minuten   | EN 13624*             |
| Begrenzt viruzid nach DVV/RKI (Vaccinia Stamm Elstree, BVDV Stamm NADL)  | 10% FKS                  | 1 Minute    | DVV/RKI*              |
| Begrenzt viruzid nach EN 14476 (Modified Vaccinia Ankara)                | niedrig                  | 1 Minute    | EN 14476*             |
| Begrenzt viruzid PLUS nach DVV/RKI (Murines Norovirus, Adenovirus Typ 5) | 10% FKS                  | 1 Minute    | DVV/RKI*              |
| Viruzid wirksam gegen Polyoma SV-40 nach DVV/RKI                         | 10% FKS                  | 5 Minuten   | DVV/RKI*              |
| Viruzid (Murines Norovirus, Adenovirus Typ 5, Poliovirus Typ 1)          | niedrig                  | 5 Minuten   | EN 14476*             |

\* an der Tränklösung getestet

CE 0044



Informationen  
zu diesem Produkt



# Spray Off wipes (Polypropylen)

## Produktbeschreibung

Spray Off wipes sind alkoholische, aldehydfreie Flächendesinfektionstücher in gebrauchsfertiger Form. Das verwendete Tuchmaterial ist Polypropylen.

## Anwendungsgebiet

Zur Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im patientennahen Umfeld, insbesondere in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegeeinrichtungen, sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- fungizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- viruzid wirksam gegen Polyoma SV-40 Viren
- viruzid

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt wird im Wischverfahren verwendet. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Tuchgröße  | Gebindeart        | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601351        | 150 Tücher   | 15 × 18 cm | Dose              | 12 × 150 Tücher    | 18313202    | 4260181254425    | 4260181254524                 |
| 601352        | 150 Tücher   | 15 × 18 cm | Dose-Nachfüllpack | 12 × 150 Tücher    | 18313219    | 4260181254432    | 4260181254531                 |



## Medizinproduktklasse

IIa

## Biozidregistriernummer

N-91346

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten:**

63,50 g Ethanol

0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Spray Off wipes<br>(Polypropylen)<br>Wirkenspektrum                                   | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Bakterizid                                                                            | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute    | EN 13727*<br>EN 16615 |
| Levurozid                                                                             | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute    | EN 13624*<br>EN 16615 |
| Tuberkulozid (M. terrae),<br>Mykobakterizid<br>(M. terrae, M. avium)                  | hoch                            | 1 Minute    | EN 14348*             |
| Fungizid<br>(C. albicans, A. brasiliensis)                                            | hoch                            | 5 Minuten   | EN 13624*             |
| Begrenzt viruzid nach<br>DVV/RKI (Vaccinia Stamm<br>Elstree, BVDV Stamm NADL)         | 10% FKS                         | 1 Minute    | DVV/RKI*              |
| Begrenzt viruzid nach<br>EN 14476<br>(Modified Vaccinia Ankara)                       | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14476*             |
| Begrenzt viruzid PLUS<br>nach DVV/RKI (Murines<br>Norovirus, Adenovirus Typ 5)        | 10% FKS                         | 1 Minute    | DVV/RKI*              |
| Viruzid wirksam<br>gegen Polyoma SV-40<br>nach DVV/RKI                                | 10% FKS                         | 5 Minuten   | DVV/RKI*              |
| Viruzid nach EN 14476<br>(Murines Norovirus, Adeno-<br>virus Typ 5, Poliovirus Typ 1) | niedrig                         | 5 Minuten   | EN 14476*             |

\*an der Tränklösung getestet

CE 0044



Informationen  
zu diesem Produkt





# Spray On wipes (Cellulose)

## Produktbeschreibung

Spray On wipes sind alkoholische Flächendesinfektionstücher in gebrauchsfertiger Form, aldehyd- und QAV-frei. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

## Anwendungsgebiet

Einsetzbar zur Desinfektion in Einrichtungen des Gesundheitswesens und der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie, z. B. patientennahe Umgebung, Arbeitsbereiche/ Schreibtische, allgemeine Geräte (mit Ausnahme von Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen). Spray On ist zudem zur Desinfektion von harten, nicht porösen, kleinen Oberflächen geeignet.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)

## Anwendungshinweise

Die zu desinfizierende Fläche wird gewischt und mit einer ausreichenden Menge des Produkts benetzt, um eine vollständige Benetzung zu gewährleisten. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

Nur für den professionellen Gebrauch.



Das Biozidprodukt Spray On wipes (Wirkstoff Propan-1-ol und Propan-2-ol) hat eine Unions- und Schweiz-Zulassung für die Produktart 2 (Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind) und Produktart 4 (Lebens- und Futtermittelbereich) mit der Zulassungsnummer EU-0027668-0000. Die Zulassung ist gültig bis 31. Juli 2032.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Tuchgröße  | Gebindeart         | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601212        | 80 Tücher    | 20 × 20 cm | Flowpack (mit LID) | 12 × 80 Tücher     | 18312361    | 4260181253879    | 4260181251318                 |
| 601214        | 70 Tücher    | 29 × 30 cm | Eimer              | 1 × 70 Tücher      | 18312384    | 4260181253893    | 4260181251332                 |
| 601213        | 70 Tücher    | 29 × 30 cm | Eimer-Nachfüllpack | 6 × 70 Tücher      | 18312378    | 4260181253886    | 4260181251325                 |



## Zulassungsnummer

EU-0027668-0000

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten:**

45 g Propan-1-ol

15 g Propan-2-ol

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

Flowpack 24 Monate,

Eimer und Eimer-Nachfüllpack 36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wieder verschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Spray On wipes<br>(Cellulose)<br>Wirkenspektrum | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Bakterizid                                      | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute    | EN 13727*<br>EN 16615 |
| Levurozid                                       | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute    | EN 13624*<br>EN 16615 |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)  | hoch                            | 1 Minute    | EN 14476*             |

\*an der Tränklösung getestet

**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Spray In GA wipes (Cellulose)

## Produktbeschreibung

Spray In GA wipes sind gering alkoholhaltige Flächen-desinfektionstücher in gebrauchsfertiger Form. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

## Anwendungsgebiet

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten.

## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- wirksam gegen Polyoma SV-40 Viren

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt wird im Wischverfahren verwendet. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikel-nummer | Gebinde-größe | Tuch-größe | Gebindeart                   | Verpackungs-einheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfs-mittelnummer) |
|----------------|---------------|------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 601913         | 60 Tücher     | 18 x 20 cm | Flowpack (mit Anfass-lasche) | 22 x 60 Tücher      | 19892751    | 4260181250052    | 4260181250069                 | 54.99.02.0022            |



## Biozidregistriernummer

N-114157

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten:**

20 g Propan-1-ol

0,2 g Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wieder verschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Spray In GA wipes<br>(Cellulose)<br>Wirkspektrum                      | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Bakterizid                                                            | mit Mechanik<br>hoch            | 1 Minute    | EN 13727<br>EN 16615              |
| Levurozid                                                             | mit Mechanik<br>hoch            | 1 Minute    | EN 13624<br>EN 16615              |
| Tuberkulozid (M. terrae) /<br>Mykobakterizid<br>(M. terrae, M. avium) | mit Mechanik<br>hoch            | 2 Minuten   | VAH 9.1<br>VAH 14.1               |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                        | mit Mechanik<br>niedrig         | 1 Minute    | EN 14476,<br>modified<br>EN 16615 |
| Begrenzt viruzid<br>PLUS                                              | niedrig                         | 30 Min.*    | EN 14476                          |
| Adenovirus Typ 5                                                      | niedrig                         | 30 Min.*    | EN 14476                          |
| Murines Norovirus                                                     | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14476                          |
| Rotavirus Stamm WA                                                    | ohne                            | 30 Sekunden | EN 14476                          |
| Viruzid wirksam<br>gegen<br>Polyoma SV-40                             | niedrig                         | 5 Minuten   | EN 14476                          |

\*nicht für patientennahe Oberflächen



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Lotio 2in1 (Cellulose)



## Produktbeschreibung

Lotio 2in1 sind gebrauchsfertige Aloe Vera-haltige Desinfektionstücher zur Hände- und Flächendesinfektion. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

## Anwendungsgebiet

Ein Tuch für zwei Anwendungsbereiche: Lotio 2in1 ist sowohl zur Händedesinfektion, als auch zur Flächendesinfektion einsetzbar.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)

## Anwendungshinweise

Vor der Desinfektion stark verschmutzte Hände wie auch Flächen reinigen. Zur Händedesinfektion die trockenen Hände mit dem feuchten Tuch benetzen und über die gesamte Einwirkzeit feucht halten, gegebenenfalls ein weiteres Tuch verwenden. Zur Flächendesinfektion die Fläche vollständig benetzen und gegebenenfalls mit einem zweiten Tuch nachwischen. Die Fläche muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden. Die Einwirkzeiten beachten.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Tuchgröße  | Gebindeart                        | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|---------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601643        | 60 Tücher    | 18 × 20 cm | Flowpack (mit LID)                | 20 × 60 Tücher     | 18849724    | 4260181254722    | 4260181254739                 | 54.99.02.0020           |
| 601911        | 60 Tücher    | 18 × 20 cm | Flowpack (mit Anfassflasche)      | 22 × 60 Tücher     | 19878828    | 4260181250021    | 4260181250014                 | 54.99.02.0020           |
| 601901        | 15 Tücher    | 15 × 20 cm | Mini-Flowpack (mit Anfassflasche) | 50 x 15 Tücher     | 19881569    | 4260181259147    | 4260181259154                 | -                       |





## Biozidregistriernummer

N-86407

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten:**

0,8 g Didecyldimethylammoniumchlorid  
0,5 g 2-Phenoxyethanol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wieder verschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Lotio 2in1<br>Wirkpektrum                      | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Bakterizid                                     | niedrig                         | 1 Minute    | EN 13727*<br>EN 16615 |
| Levurozid                                      | niedrig                         | 1 Minute    | EN 13624*<br>EN 16615 |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara) | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14476*             |

\*getestet an der Tränklösung



**Informationen**  
zu diesem Produkt

60 Tücher



15 Tücher



# Instru Zym wipes (Cellulose)

## Produktbeschreibung

Instru Zym wipes sind gebrauchsfertige Reinigungstücher auf Enzymbasis. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

## Anwendungsgebiet

Instru Zym wipes werden zur Vorreinigung von Endoskopen und medizinischem Zubehör, sowie für chirurgische und orthopädische Instrumente eingesetzt. Dabei werden grobe, organische Verschmutzungen materialschonend entfernt.

## Anwendungshinweise

Das zu reinigende Instrument nach dem Einsatz schnellstmöglich mit einem Instru Zym wipes sorgfältig abwischen. Bei Bedarf mit einem neuen Tuch solange wiederholen, bis die Oberfläche optisch sauber ist. Vorzugsweise sollte die Vorreinigung mit den Instru Zym wipes vom sauberen Ende des Instrumentes zum verschmutzten Ende hin durchgeführt werden.

Nur für den professionellen Gebrauch.



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Tuchgröße  | Gebindeart         | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601795        | 80 Tücher    | 20 × 20 cm | Flowpack (mit LID) | 6 × 80 Tücher      | 19691834    | 4260181257563    | 4260181257570                 |



## Medizinproduktklasse

I

## Zusammensetzung

### Inhaltsstoffe

Protease, Amylase, Lipase, nichtionische Tenside,  
Konservierungsstoffe, Duftstoffe, gereinigtes  
Wasser

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wieder-  
verschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zu-  
stand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen  
Sie es gegen unbefugten Zugriff.



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Produktübersicht


## Desinfektions- und Reinigungstücher

| Artikel                                       | Artikel-nummer | Gebinde-größe                            | Verpackungs-einheit | Tuch-größe | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungs-einheit) | HMN (Hilfsmittel-nummer) |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Beta Guard rfu wipes (Cellulose)</b>       | 601797         | 80 Tücher/Flow-pack mit LID              | 12 × 80 Tücher      | 20 × 20 cm | 19691716    | 4260181257549    | 4260181257556                  | 54.99.02.0019            |
|                                               | 601803         | 70 Tücher/Eimer                          | 1 × 70 Tücher       | 29 × 30 cm | 19691739    | 4260181257501    | 4260181257518                  | -                        |
|                                               | 601804         | 70 Tücher/Eimer-Nachfüllpack             | 6 × 70 Tücher       | 29 × 30 cm | 19691722    | 4260181257525    | 4260181257532                  | -                        |
|                                               | 601974         | 60 Tücher/Flowpack mit Anfasslasche      | 22 × 60 Tücher      | 18 × 20 cm | 20391586    | 4260181250045    | 4260181257945                  | -                        |
| <b>Beta Guard rfu wipes (Polypropylen)</b>    | 601111         | 150 Tücher/Dose                          | 12 × 150 Tücher     | 15 × 18 cm | 18312295    | 4260181253992    | 4260181251110                  | -                        |
|                                               | 601113         | 150 Tücher/Eimer-Nachfüllpack            | 12 × 150 Tücher     | 15 × 18 cm | 18312303    | 4260181254005    | 4260181251127                  | -                        |
| <b>Spray In QF wipes (Cellulose)</b>          | 601796         | 80 Tücher/Flow-pack mit LID              | 12 × 80 Tücher      | 20 × 20 cm | 19692348    | 4260181257341    | 4260181257358                  | -                        |
|                                               | 601801         | 70 Tücher/Eimer                          | 1 × 70 Tücher       | 29 × 30 cm | 19692377    | 4260181257365    | 426018125737                   | -                        |
|                                               | 601802         | 70 Tücher/Eimer-Nachfüllpack             | 6 × 70 Tücher       | 29 × 30 cm | 19692578    | 4260181257389    | 4260181257396                  | -                        |
|                                               | 601799         | 60 Tücher/Flow-pack mit LID              | 20 × 60 Tücher      | 18 × 20 cm | 19692733    | 4260181257426    | 4260181257433                  | 54.99.02.0021            |
| <b>Spray Off wipes (Cellulose)</b>            | 601798         | 80 Tücher/Flow-pack mit LID              | 12 × 80 Tücher      | 20 × 20 cm | 19691751    | 4260181257464    | 4260181257471                  | -                        |
|                                               | 601805         | 70 Tücher/Eimer                          | 1 × 70 Tücher       | 29 × 30 cm | 19691745    | 4260181257488    | 4260181257495                  | -                        |
|                                               | 601806         | 70 Tücher/Eimer-Nachfüllpack             | 6 × 70 Tücher       | 29 × 30 cm | 19692561    | 4260181257440    | 4260181257457                  | -                        |
| <b>Spray Off wipes (Polypropylen)</b>         | 601351         | 150 Tücher/Dose                          | 12 × 150 Tücher     | 15 × 18 cm | 18313202    | 4260181254425    | 4260181254524                  | -                        |
|                                               | 601352         | 150 Tücher/Nachfüllpack                  | 12 × 150 Tücher     | 15 × 18 cm | 18313219    | 4260181254432    | 4260181254531                  | -                        |
| <b>Spray On wipes (Cellulose)</b>             | 601212         | 80 Tücher/Flow-pack mit LID              | 12 × 80 Tücher      | 20 × 20 cm | 19784903    | 4260181253879    | 4260181251318                  | -                        |
|                                               | 601214         | 70 Tücher/Eimer                          | 1 × 70 Tücher       | 29 × 30 cm | 20005844    | 4260181253893    | 4260181251332                  | -                        |
|                                               | 601213         | 70 Tücher/Eimer-Nachfüllpack             | 6 × 70 Tücher       | 29 × 30 cm | 20005838    | 4260181253886    | 4260181251325                  | -                        |
| <b>Spray In GA wipes (Cellulose)</b>          | 601913         | 60 Tücher/Flowpack mit Anfasslasche      | 22 × 60 Tücher      | 18 × 20 cm | 19892751    | 4260181250052    | 4260181250069                  | 54.99.02.0022            |
| <b>Lotio 2in1 (Cellulose)</b>                 | 601643         | 60 Tücher/Flow-pack mit LID              | 20 × 60 Tücher      | 18 × 20 cm | 18849724    | 4260181254722    | 4260181254739                  | 54.99.02.0020            |
|                                               | 601911         | 60 Tücher/Flowpack mit Anfasslasche      | 22 × 60 Tücher      | 18 × 20 cm | 19878828    | 4260181250021    | 4260181250014                  | 54.99.02.0020            |
| <b>Lotio 2in1 Pocket-Flowpack (Cellulose)</b> | 601901         | 15 Tücher/Mini-Flowpack mit Anfasslasche | 50 × 15 Tücher      | 15 × 20 cm | 19881569    | 4260181259147    | 4260181259154                  | -                        |
| <b>Instru Zym wipes (Cellulose)</b>           | 601795         | 80 Tücher/Flow-pack mit LID              | 6 × 80 Tücher       | 20 × 20 cm | 18313455    | 4260181257563    | 4260181257570                  | -                        |





# Instrumentendesinfektion und -reinigung

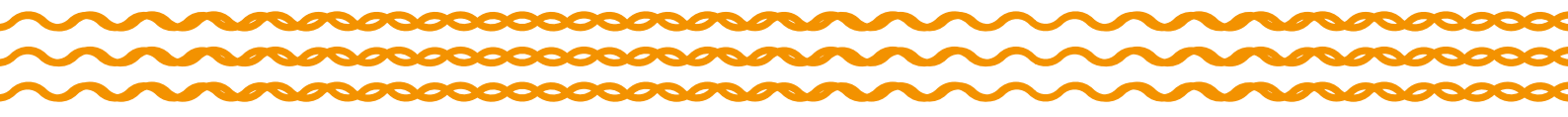



# DrDeppe – Instrumentendesinfektion und -reinigung

Gebrauchte Medizinprodukte können mit Krankheitserregern kontaminiert sein und somit zu einer Infektionsquelle für den Menschen werden.

Die Aufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten ist mit großer Verantwortung verbunden. Diese muss den Anforderungen des Medizinproduktegesetzes (MPDG) und der Medizinproduktebetriebsverordnung (MPBetreibV) entsprechen.

Unter Reinigung versteht man die Entfernung der meisten sichtbaren Verunreinigungen.

Durch den Desinfektionsprozess wird die Anzahl der Krankheitserreger so weit reduziert, dass sie keine Infektion oder Ausbreitung des Krankheitserregers mehr verursachen können.

Während des Sterilisationsprozesses wird die Anzahl lebensfähiger Mikroorganismen pro Einheit des Sterilisationsguts auf  $\leq 10^{-6}$  reduziert. Medizinprodukte, die mit Blut, inneren Geweben, Organen und Wunden in Kontakt kommen, müssen steril sein.

Es gibt zwei Verfahren der Instrumentendesinfektion: manuell, durch das Eintauchdesinfektionsverfahren, oder maschinell, durch Reinigungsautomaten.

Wir bieten Ihnen eine leistungsstarke Auswahl an Instrumentendesinfektionsmitteln und Instrumentenreinigern an.



# INHALT

## Instrumentendesinfektion

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Endo Star Neu .....   | 86 |
| Instru Extra .....    | 88 |
| Instru Plus .....     | 90 |
| Instru Sept AF .....  | 92 |
| Instru Star rfu ..... | 94 |
| Instru Suc .....      | 96 |

## Instrumentenvorreinigung

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Instru Zym wipes (Cellulose) ..... | 98 |
|------------------------------------|----|

## Instrumentenreinigung

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Instru Zym .....  | 100 |
| Labomat E .....   | 102 |
| Labomat KS .....  | 104 |
| Labomat MA .....  | 106 |
| Labomat SPM ..... | 108 |

## Herstellung einer Gebrauchslösung

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Anleitung ..... | 110 |
|-----------------|-----|

## Dosiertabelle

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Herstellung gebrauchsfertiger Desinfektionslösungen ..... | 111 |
|-----------------------------------------------------------|-----|

## Produktübersicht

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Instrumentendesinfektion und -reinigung ..... | 112 |
|-----------------------------------------------|-----|

*Applikationshilfen auf Anfrage*

# Endo Star Neu

## Produktbeschreibung

Endo Star Neu ist ein aldehyd- und phenolfreies Instrumentendesinfektionsmittelkonzentrat zur Aufbereitung von chirurgischen Instrumentarien, sowie thermolabilem Anästhesiezubehör und starren Endoskopen im Einlegeverfahren oder im Ultraschallbad. Ebenfalls geeignet für Bohrer bzw. rotierende Instrumente.

## Anwendungsgebiet

Für alle Anwendungsbereiche, in denen ärztliches Instrumentarium im Einlegeverfahren oder im Ultraschallbad aufbereitet wird. Endo Star Neu ist nicht für die Abschlussdesinfektion semikritischer Instrumente geeignet.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- Instrumentendesinfektion im Ultraschallbad

## Anwendungshinweise

### Einlegeverfahren

Instrumente nach erfolgter Reinigung einlegen. Sämtliche Oberflächen und Hohlräume müssen bedeckt bzw. gefüllt sein. Die Anwendungskonzentration und Einwirkzeiten bitte beachten. Instrumente entnehmen, gründlich mit Wasser (Trinkwasserqualität) abspülen und trocknen. Beachten Sie die Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (in Deutschland: RKI, KRINKO, MPBetreibV). Beachten Sie die Hinweise der Instrumenten- und Gerätehersteller.

### Ultraschallanwendung

Analog Einlegeverfahren. Beachten Sie die für die Ultraschallanwendung vorgegebenen Einwirkzeiten.

### Produktwechsel

Endo Star Neu ist mit aldehydhaltigen Desinfektionsmitteln nicht kompatibel. Beim Ersteinsatz und Produktwechsel sind die Instrumente und das Zubehör, die Wannen, die Aufbereitungsgeräte sowie Applikationshilfen gründlich zu reinigen und zu spülen. Die Gebrauchslösung ist eiweißbelastbar und kann ggf. mehrfach genutzt werden. Bei Eintrübungen oder sichtbaren Verschmutzungen wird empfohlen, die Gebrauchslösung zu erneuern.

Nur für den professionellen Gebrauch.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601486        | 2 L          | Kanister   | 6 × 2 L            | 18313231    | 4260181252360    | 4260181252377                 |
| 600080        | 5 L          | Kanister   | 2 × 5 L            | 18313225    | 4260181253800    | 4260181251233                 |



## Medizinproduktklasse

I Ib

## Zusammensetzung

**In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:**

5 g Alkyldimethylethylammoniummethylsulfat

1 g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid

1,8 g Cocospopylenguanidiniumdiacetat

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung  
sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zu-  
stand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen  
Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Endo Star Neu                                                            | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Konzen-<br>tration | Einwirkzeit | Norm                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|
| Bakterizid                                                               | niedrig                         | 3%                 | 15 Min.     | EN 13727<br>EN 14561<br>VAH 15 |
| Levurozid                                                                | niedrig                         |                    |             | EN 13624<br>EN 14562<br>VAH 15 |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                              | niedrig                         |                    |             | EN 14348<br>EN 14563           |
| Begrenzt<br>viruzid nach<br>DVV/RKI<br>(Vaccinia Stamm<br>Elstree, BVDV) | 10% FKS                         |                    |             | DVV/RKI                        |
| Begrenzt<br>viruzid nach<br>EN 14476<br>(Modified Vaccinia<br>Ankara)    | niedrig                         | 1%                 | 15 Min.     | EN 14476                       |
| Instrumen-<br>tendesin-<br>fektion im<br>Ultraschallbad                  | hoch                            | 3%                 | 5 Min.      | VAH 15                         |

CE 0044



Informationen  
zu diesem Produkt





# Instru Extra

## Produktbeschreibung

Instru Extra ist ein aldehyd- und phenolfreies Instrumentendesinfektionsmittelkonzentrat zur Aufbereitung von chirurgischen Instrumentarien, sowie thermolabilem Anästhesiezubehör und starren Endoskopen im Einlegeverfahren oder im Ultraschallbad. Ebenfalls geeignet für Bohrer bzw. rotierende Instrumente.

## Anwendungsgebiet

Für alle Anwendungsbereiche, in denen ärztliches Instrumentarium im Einlegeverfahren oder im Ultraschallbad aufbereitet wird. Instru Extra ist nicht für die Abschlussdesinfektion semikritischer Instrumente geeignet.



## Wirkpektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- Instrumentendesinfektion im Ultraschallbad

## Anwendungshinweise

### Einlegeverfahren

Instrumente nach erfolgter Reinigung einlegen. Sämtliche Oberflächen und Hohlräume müssen bedeckt bzw. gefüllt sein. Die Anwendungskonzentration und Einwirkzeiten bitte beachten. Instrumente entnehmen, gründlich mit Wasser abspülen und trocknen. Beachten Sie die Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (in Deutschland: RKI, KRINKO, MPBetreibV). Beachten Sie die Hinweise der Instrumenten- und Gerätehersteller.

### Ultraschallanwendung

Analog Einlegeverfahren. Beachten Sie bitte die für die Ultraschallanwendung vorgegebenen Einwirkzeiten. Beachten Sie die Hinweise der Instrumenten- und Gerätehersteller.

### Produktwechsel

Instru Extra ist mit aldehydhaltigen Desinfektionsmitteln nicht kompatibel. Beim Ersteinsatz und Produktwechsel sind die Instrumente und das Zubehör, die Wannen, die Aufbereitungsgeräte sowie Applikationshilfen gründlich zu reinigen und zu spülen.

Instru Extra Gebrauchslösung ist eiweißbelastbar und kann ggf. mehrfach genutzt werden. Bei Eintrübungen oder sichtbaren Verschmutzungen wird empfohlen, die Gebrauchslösung zu erneuern.

Nur für den professionellen Gebrauch.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601477        | 2 L          | Kanister   | 6 × 2 L            | 18313254    | 4260181252308    | 4260181252315                 |
| 600041        | 5 L          | Kanister   | 2 × 5 L            | 18313248    | 4260181253848    | 4260181251264                 |





## Medizinproduktklasse

I Ib

## Zusammensetzung

**In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:**

5 g Alkyldimethylethylammoniummethylsulfat

1 g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid

1,8 g Cocosporylenguanidiniumdiacetat

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung  
sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zu-  
stand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen  
Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Instru Extra                                                             | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Konzen-<br>tration | Einwirkzeit | Norm                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|
| Bakterizid                                                               | niedrig                         | 3%                 | 15 Min.     | EN 13727<br>EN 14561<br>VAH 15 |
| Levurozid                                                                | niedrig                         |                    |             | EN 13624<br>EN 14562<br>VAH 15 |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                              | niedrig                         |                    |             | EN 14348<br>EN 14563           |
| Begrenzt<br>viruzid nach<br>DVV/RKI<br>(Vaccinia Stamm<br>Elstree, BVDV) | 10% FKS                         |                    |             | DVV/RKI                        |
| Begrenzt<br>viruzid nach<br>EN 14476<br>(Modified Vaccinia<br>Ankara)    | niedrig                         | 1%                 | 15 Min.     | EN 14476                       |
| Instrumenten-<br>desinfektion<br>im Ultraschall-<br>bad                  | hoch                            | 3%                 | 5 Min.      | VAH 15                         |

CE 0044



Informationen  
zu diesem Produkt



# Instru Plus

## Produktbeschreibung

Instru Plus ist ein flüssiges, aldehydhaltiges Instrumentendesinfektionsmittel in konzentrierter Form.

## Anwendungsgebiet

Für alle Bereiche geeignet, in denen ärztliches Instrumentarium im Einlegeverfahren aufbereitet wird. Als high-level Desinfektionsmittel dient es im Rahmen der Abschlussdesinfektion der manuellen Aufbereitung von sämtlichen thermostabilen und thermolabilen Instrumenten, wie starre und flexible Endoskope, endoskopische Zusatzinstrumente und Anästhesiezubehör im Einlegeverfahren.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- fungizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- viruzid

## Anwendungshinweise

Instru Plus liegt als Konzentrat zum Herstellen einer Gebrauchslösung vor. Die empfohlene Anwendungskonzentration liegt bei 3-5%. Instrumente nach erfolgter Reinigung einlegen. Sämtliche Oberflächen und Hohlräume müssen bedeckt bzw. gefüllt sein. Die Anwendungskonzentration und Einwirkzeiten sind zu beachten. Instrumente entnehmen, gründlich mit Wasser (Trinkwasserqualität) abspülen und trocknen. Für semikritische Medizinprodukte, die nicht sterilisiert werden, ist zur Schlussspülung keimfreies, vorzugsweise steriles Wasser zu verwenden. Beachten Sie die Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (in Deutschland: RKI, KRINKO, MPBetreibV). Beachten Sie die Hinweise der Instrumenten- und Gerätehersteller. Instru Plus ist mit aminhaltigen Desinfektionsmitteln nicht kompatibel. Bei Ersteinsatz und bei Produktwechsel sind die Instrumente, das Zubehör, die Wannen und die Aufbereitungsgeräte sowie die Applikationshilfen gründlich zu reinigen und zu spülen. Das Produkt kann zum Ende der Haltbarkeit an Farbtintensität verlieren.

Nur für den professionellen Gebrauch.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601397        | 2 L          | Kanister   | 6 × 2 L            | 18313308    | 4260181253916    | 4260181254494                 |
| 601327        | 5 L          | Kanister   | 2 × 5 L            | 18313283    | 4260181253909    | 4260181254487                 |



## Medizinproduktklasse

I Ib

## Zusammensetzung

**In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:**

15 g (Ethylendioxy)dimethanol

4,8 g Glutaral

0,996 g Formaldehyd

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung  
sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zu-  
stand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen  
Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Instru Plus                                                                               | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Konzen-<br>tration | Einwirkzeit        | Norm                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Bakterizid                                                                                | hoch                            | 3 %                | 5 Min.             | EN 13727<br>EN 14561 |
| Levurozid                                                                                 | hoch                            | 2 %                | 15 Min.            | EN 13624<br>EN 14562 |
| Fungizid<br>(C. albicans,<br>A. brasiliensis)                                             | hoch                            | 4 %                | 30 Min.            | EN 13624<br>EN 14562 |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                                               | niedrig                         | 4 %<br>3 %         | 30 Min.<br>60 Min. | EN 14348<br>EN 14563 |
| Mykobakterizid<br>(M. terrae, M.<br>avium)                                                | niedrig                         | 5 %<br>3 %         | 30 Min.<br>60 Min. | EN 14348<br>EN 14563 |
| Begrenzt<br>viruzid nach<br>DVV/RKI<br>(Vaccinia Stamm<br>Elstree, BVDV)                  | 10% FKS                         | 1 %                | 5 Min.             | DVV / RKI            |
| Begrenzt<br>viruzid PLUS<br>(Adenovirus Typ 5,<br>Murines Norovirus)                      | hoch                            | 4 %                | 15 Min.            | EN 17111             |
| Viruzid<br>(Adenovirus Typ 5,<br>Murines Norovirus,<br>Poliovirus Typ 1,<br>Polyoma SV40) | 10% FKS                         | 4 %                | 15 Min.            | DVV / RKI            |
|                                                                                           | hoch                            |                    |                    | EN 17111             |

CE 0044



Informationen  
zu diesem Produkt



# Instru Sept AF

## Produktbeschreibung

Instru Sept AF ist ein konzentriertes aldehyd- und phenolfreies Desinfektionsmittel zur manuellen Desinfektion. Es ist Protein defixierend und zeigt eine sehr gute Materialverträglichkeit.

## Anwendungsgebiet

Intru Sept AF ist für die Aufbereitung von medizinischen Instrumenten im Einlegeverfahren bestimmt. Instru Sept AF ist nicht für die Abschlussdesinfektion semikritischer Instrumente geeignet.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- fungizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

## Anwendungshinweise

Instru Sept AF weist Protein defixierende Eigenschaften auf und solubilisiert selbst eingetrocknete Proteinrückstände. Es liegt als Konzentrat zum Herstellen einer Gebrauchslösung vor. Die empfohlene Anwendungskonzentration liegt bei 3-5%. Instrumente nach erfolgter Reinigung einlegen. Sämtliche Oberflächen und Hohlräume müssen bedeckt bzw. gefüllt sein. Die Anwendungskonzentration und Einwirkzeiten bitte beachten. Instrumente entnehmen, gründlich mit Wasser abspülen und trocknen. Beachten Sie die Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (in Deutschland: RKI, KRINKO, MPBetreibV). Beachten Sie die Hinweise der Instrumenten- und Gerätehersteller. Aminhaltiges Instru Sept AF nicht mit aldehydischen Produkten kombinieren. Reinigen und spülen Sie alle Instrumente, Zubehörteile, Wannen und Aufbereitungsgeräte sowie Applikationshilfen beim ersten Einsatz des Produkts oder beim Produktwechsel gründlich.

Nur für den professionellen Gebrauch.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601491        | 2 L          | Kanister   | 6 × 2 L            | 18313337    | 4260181252537    | 4260181252544                 |
| 601492        | 5 L          | Kanister   | 2 × 5 L            | 18313320    | 4260181252551    | 4260181252568                 |





## Medizinproduktklasse

I Ib

## Zusammensetzung

**In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:**

8,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid

8,0 g Alkylamine

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung  
sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zu-  
stand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen  
Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Instru Sept AF                                                       | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Konzen-<br>tration | Einwirk-<br>zeit | Norm                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Bakterizid                                                           | hoch                            | 3%                 | 5 Min.           | EN 13727<br>EN 14561 |
| Levurozid                                                            | hoch                            |                    |                  | EN 13624<br>EN 14562 |
| Fungizid<br>(A. brasiliensis)                                        | hoch                            | 5%                 | 60 Min.          | EN 13624<br>EN 14562 |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                          | hoch                            | 1%                 | 15 Min.          | EN 14348<br>EN 14563 |
| Mykobakterizid<br>(M. terrae, M. avium)                              | hoch                            |                    |                  | EN 14348<br>EN 14563 |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia<br>Ankara)                    | hoch                            | 3%                 | 15 Min.          | EN 14476<br>EN 17111 |
| Begrenzt<br>viruzid PLUS<br>(Adenovirus Typ 5,<br>Murines Norovirus) | hoch                            | 5%                 | 30 Min.          | EN 14476<br>EN 17111 |

CE 0044



Informationen  
zu diesem Produkt





# Instru Star rfu

## Produktbeschreibung

Instru Star rfu ist ein gebrauchsfertiges, aldehydfreies Instrumentendesinfektionsmittel.

## Anwendungsgebiet

Es ist einsetzbar zur Desinfektion von medizinisch, chirurgischem Instrumentarium im Einlegeverfahren. Ebenfalls ist es geeignet für rotierende Dentalinstrumente (Bohrer). Nicht für die Abschlussdesinfektion semikritischer Instrumente geeignet.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- viruzid wirksam gegen Polyoma SV-40

## Anwendungshinweise

### Einlegeverfahren

Instrumente sofort nach erfolgter Reinigung in die unverdünnte Flüssigkeit einlegen. Sämtliche Oberflächen und Hohlräume müssen bedeckt bzw. gefüllt sein. Die Einwirkzeiten bitte beachten.

Instrumente entnehmen, gründlich mit Wasser abspülen und trocknen. Keine Aluminiumteile einlegen. Beachten Sie die Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (in Deutschland: RKI, KRINKO, MPBetreibV). Beachten Sie die Hinweise der Instrumenten und Gerätehersteller.

Nur für den professionellen Gebrauch.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601490        | 2 L          | Kanister   | 6 × 2 L            | 18313372    | 4260181252407    | 4260181252414                 |
| 600091        | 5 L          | Kanister   | 2 × 5 L            | 18313366    | 4260181253947    | 4260181251363                 |
| 600071        | 10 L         | Kanister   | 1 × 10 L           | 18313343    | 4260181253930    | 4260181251356                 |



## Medizinproduktklasse

I Ib

## Zusammensetzung

**In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:**  
1,125 g Cocospropyldiammoniumborat

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung  
sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zu-  
stand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen  
Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Instru Star rfu                                 | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| Bakterizid                                      | hoch                            | 15 Min.     | EN 13727        |
| Levurozid                                       |                                 |             | EN 14561 / DGHM |
|                                                 |                                 |             | EN 13624        |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                     |                                 |             | EN 14562 / DGHM |
| Mykobakterizid<br>(M. terrae, M. avium)         |                                 |             | EN 14348        |
| Begrenzt viruzid<br>(Vaccinia Stamm<br>Elstree) | 10% FKS                         |             | EN 14563 / DGHM |
| Viruzid wirksam<br>gegen<br>Polyoma SV40        |                                 |             | EN 14476        |
|                                                 |                                 |             | DVV/RKI         |

C € 0044

**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Instru Suc

## Produktbeschreibung

Instru Suc ist ein universelles, sparsames, schaumarmes und aldehydfreies Konzentrat zur Desinfektion von Absauganlagen.

## Anwendungsgebiet

Instru Suc wird zur Desinfektion von Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider eingesetzt.

## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid

## Anwendungshinweise

### Biofilmvermeidung

Die tägliche Desinfektion mit einer 2%igen Gebrauchslösung kann eine Biofilmbildung wirksam verhindern.

### Biofilmentfernung

Selbst bestehende Biofilme können mit Instru Suc beseitigt werden: Für einen bestehenden Biofilm wurden nach 16 Stunden Einwirkzeit (über Nacht) mit einer 2%igen Gebrauchslösung keine Keime mehr nachgewiesen.

Nur für den professionellen Gebrauch.



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601489        | 2 L          | Kanister   | 6 × 2 L            | 18313389    | 4260181252421    | 4260181252438                 |
| 600047        | 5 L          | Kanister   | 2 × 5 L            | 18313395    | 4260181250700    | 4260181251295                 |



## Medizinproduktklasse

I Ib

## Zusammensetzung

**In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:**  
7,5 g Dioctyldimethylammoniumchlorid

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung  
sorgfältig wiederverschließen.


Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zu-  
stand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen  
Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Instru Suc | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Konzen-<br>tration | Norm                                     |
|------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|
| Bakterizid | hoch                            | 15 Min.     | 2%                 | EN 13727<br>(VAH)<br>EN 14561<br>(VAH15) |
| Levurozid  | hoch                            |             |                    | EN 13624<br>(VAH)<br>EN 14562<br>(VAH15) |

C € 0044

**Informationen**  
zu diesem Produkt

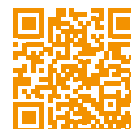



# Instru Zym wipes (Cellulose)

## Produktbeschreibung

Instru Zym wipes sind gebrauchsfertige Reinigungstücher auf Enzymbasis. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

## Anwendungsgebiet

Instru Zym wipes werden zur Vorreinigung von Endoskopen und medizinischem Zubehör, sowie für chirurgische und orthopädische Instrumente eingesetzt. Dabei werden grobe, organische Verschmutzungen materialschonend entfernt.

## Anwendungshinweise

Das zu reinigende Instrument nach dem Einsatz schnellstmöglich mit einem Instru Zym wipes sorgfältig abwischen. Bei Bedarf mit einem neuen Tuch solange wiederholen, bis die Oberfläche optisch sauber ist. Vorzugsweise sollte die Vorreinigung mit den Instru Zym wipes vom sauberen Ende des Instrumentes zum verschmutzten Ende hin durchgeführt werden.


Nur für den professionellen Gebrauch.



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Tuchgröße  | Gebindeart         | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 601795        | 80 Tücher    | 20 × 20 cm | Flowpack (mit LID) | 6 × 80 Tücher      | 19691834    | 4260181257563    | 4260181257570                 |



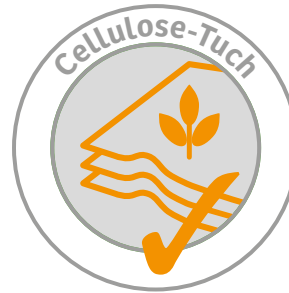

## Medizinproduktklasse

I

## Zusammensetzung

### Inhaltsstoffe

Protease, Amylase, Lipase, nichtionische Tenside,  
Konservierungsstoffe, Duftstoffe, gereinigtes  
Wasser

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wieder-  
verschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zu-  
stand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen  
Sie es gegen unbefugten Zugriff.



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Instru Zym

## Produktbeschreibung

Instru Zym ist ein enzymatischer, schaumarm und materialschonender Instrumentenreiniger in konzentrierter Form.

## Anwendungsgebiet

Instru Zym wird zur Reinigung von chirurgischem und orthopädischem Instrumentarium, starren/flexiblen Endoskopen und endoskopischen Zusatzinstrumenten eingesetzt.



## Anwendungskonzentration

Je nach Verschmutzungsgrad und Anwendungsart wird das Reinigungsmittel 0,5 bis 5%ig eingesetzt.

Empfohlene Einwirkzeit: mindestens 5 Minuten

## Anwendungshinweise

Eine verdünnte Lösung entweder manuell oder geräteseitig durch automatische Dosiersysteme herstellen. Als Verdünnungsmedium kann Leitungswasser von Trinkwasserqualität oder auch voll- oder teilentsalztes Wasser eingesetzt werden. Mit dieser Gebrauchslösung werden die zu reinigenden Instrumente behandelt. Hochaktive Enzyme spalten und suspendieren organische Verschmutzungen wie Eiweiß, Blut, Sekrete, Detritus, Gewebereste und Fette. Die Anwendungskonzentration von Instru Zym ist variabel. Bedingt durch Verschmutzungsgrad, Art und Aufbau der aufzubereitenden Instrumente sowie von Art und Höhe der Belastung, sind die erforderliche Anwendungskonzentration und Einwirkzeit an den jeweiligen Aufbereitungsprozess anzupassen und durch den Betreiber zu validieren. Anwendbar bei Wassertemperaturen von 15 - 40°C. Temperaturerhöhung auf bis zu 40°C kann die Reinigungsleistung beschleunigen.

Nur für den professionellen Gebrauch.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 600002        | 1 L          | Flasche    | 10 × 1 L           | 18313432    | 4260181253695    | 4260181251417                 |
| 601488        | 2 L          | Kanister   | 6 × 2 L            | 18313449    | 4260181252445    | 4260181252452                 |
| 600001        | 5 L          | Kanister   | 2 × 5 L            | 18313426    | 4260181253688    | 4260181251400                 |



## Medizinproduktklasse

I

## Zusammensetzung

### Inhaltsstoffe

Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, nichtionische Tenside, Konservierungsstoffe, Duftstoffe, gereinigtes Wasser

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

24 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Labomat E

## Produktbeschreibung

Labomat E ist ein enzymatischer, schaumarmer, sparsamer und materialschonender Instrumentenreiniger in konzentrierter Form.

## Anwendungsgebiet

Labomat E wird zur chemothermischen Reinigung von Endoskopen und Zubehör in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten eingesetzt. Die in Labomat E eingesetzten Enzyme sind temperaturstabil bis 70°C.



## Anwendungskonzentration

0,5 %

## Anwendungshinweise

Die Dosierung erfolgt automatisch über die Dosierpumpe des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes. Als Temperatur für das Zulaufwasser sind 35-40°C zu empfehlen. Temperaturen deutlich unter 35°C können Schaumbildung verursachen. Die Hinweise der Gerätehersteller zur Installation, dem Betrieb und der Wartung sind zu beachten, insbesondere bzgl. der Qualitätsanforderungen des einzusetzenden Prozesswassers. Die validierten Parameter zum Programmablauf und die Dosiereinstellungen sind einzuhalten. Ionen-Austauscher sind rechtzeitig zu regenerieren. Die Aufbereitungshinweise der Endoskophersteller sind zu beachten.

Nur für den professionellen Gebrauch.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart    | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 600020        | 5 L          | Flachkanister | 3 × 5 L            | 18313461    | 4260181250687    | 4260181251271                 |



## Medizinproduktklasse

I

## Zusammensetzung

### Inhaltsstoffe

Enzyme, nichtionische Tenside, Glykole,  
gereinigtes Wasser

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit


36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung  
sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zu-  
stand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen  
Sie es gegen unbefugten Zugriff.

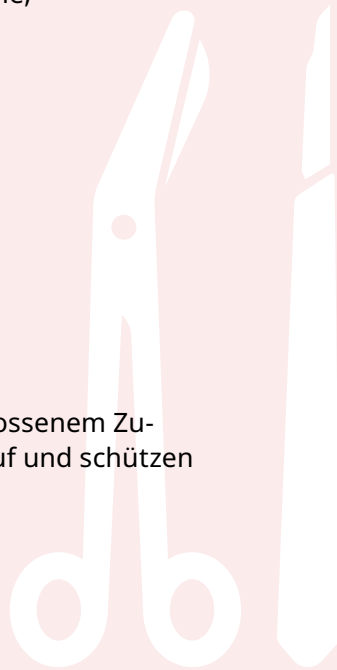

**Informationen**  
zu diesem Produkt





# Labomat KS



## Produktbeschreibung

Labomat KS ist ein gebrauchsfertiger, phosphat- und tensidfreier Klarspüler für Desinfektionsspülmaschinen.

## Anwendungsgebiet

Labomat KS wird zur Neutralisation von alkalischen Substanzen auf medizinischen Instrumenten und Laborgeräten nach der vollmaschinellen Reinigung eingesetzt.

## Anwendungskonzentration

Einstellung der Dosierpumpe: 0,1-0,5%

## Anwendungshinweise

Die Dosierung erfolgt automatisch über die im Gerät befindliche Dosierpumpe. Bitte beachten Sie die Hinweise des betreffenden Geräteherstellers. Nicht mit anderen Produkten mischen. Bei Produktwechsel das Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen. Auf Gegenständen aus eloxiertem Aluminium, sowie verchromten und vernickelten Teilen sollte Labomat KS nicht eingesetzt werden.

Nur für den professionellen Gebrauch.



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart    | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 600021        | 5 L          | Flachkanister | 3 × 5 L            | 18312421    | 4260181253961    | 4260181251387                 |



## Produktklasse

Detergenz

## Zusammensetzung

### Inhaltsstoffe

Zitronensäure

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit


36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung  
sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zu-  
stand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen  
Sie es gegen unbefugten Zugriff.

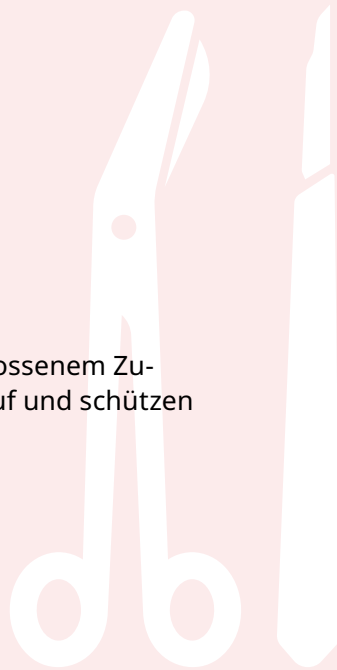

**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Labomat MA



## Produktbeschreibung

Labomat MA ist ein gebrauchsfertiger, mild alkalischer Instrumentenreiniger in flüssiger Form.

## Anwendungsgebiet

Labomat MA wird zur maschinellen, alkalischen Reinigung eingesetzt.

## Anwendungskonzentration

3 ml / 1 L

## Anwendungshinweise

Die Dosierung erfolgt automatisch über die Dosierpumpe der Spülmaschine. Als Temperatur für das Zulaufwasser sind 35-40°C zu empfehlen. Temperaturen deutlich unter 35°C können Schaumbildung verursachen. Die Hinweise der Gerätehersteller zur Installation, dem Betrieb und der Wartung sind zu beachten, insbesondere bzgl. der Qualitätsanforderungen des einzusetzenden Prozesswassers. Im Anschluss an die Reinigung mit Labomat MA empfiehlt sich das Nachspülen mit einem neutralisierenden Klarspüler.

Nur für den professionellen Gebrauch.



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart    | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 600037        | 5 L          | Flachkanister | 3 × 5 L            | 18312415    | 4260181251615    | 4260181251622                 |



## Produktklasse

Detergenz

## Zusammensetzung

### Inhaltsstoffe:

Komplexbildner, Polycarboxylate, anionische Tenside, nichtionische Tenside, Lösevermittler, gereinigtes Wasser

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit


36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

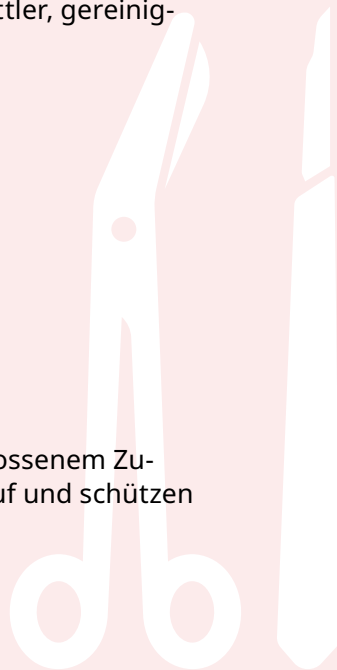

**Informationen**  
zu diesem Produkt





# Labomat SPM

## Produktbeschreibung

Labomat SPM ist ein enzymatischer, schaumarmer und sparsamer Instrumentenreiniger mit hoher Materialverträglichkeit in konzentrierter Form.

## Anwendungsgebiet

Labomat SPM wird zur maschinellen Instrumentenaufbereitung von chirurgischem Instrumentarium und Anästhesiezubehör eingesetzt. Die in Labomat SPM eingesetzten Enzyme sind temperaturstabil bis 70°C.



## Anwendungskonzentration

0,2-1%

## Anwendungshinweise

Die Dosierung erfolgt über die Dosierpumpen in den Instrumentenspülmaschinen. Als Temperatur für das Zulaufwasser sind 35-40°C zu empfehlen. Temperaturen deutlich unter 35 °C können Schaumbildung verursachen. Die Hinweise der Gerätehersteller zur Installation, dem Betrieb und der Wartung sind zu beachten, insbesondere bzgl. der Qualitätsanforderungen des einzusetzenden Prozesswassers. Die validierten Parameter zum Programmablauf und die Dosiereinstellungen sind einzuhalten. Ionen-Austauscher sind rechtzeitig zu regenerieren.

Nur für den professionellen Gebrauch.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart    | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 600650        | 5 L          | Flachkanister | 3 × 5 L            | 18313478    | 4260181253671    | 4260181251394                 |





## Medizinproduktklasse

I

## Zusammensetzung

### Inhaltsstoffe

Enzyme, nichtionische Tenside, Glykole,  
gereinigtes Wasser

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit


36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12

Gebinde nach jeder Verwendung  
sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zu-  
stand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen  
Sie es gegen unbefugten Zugriff.

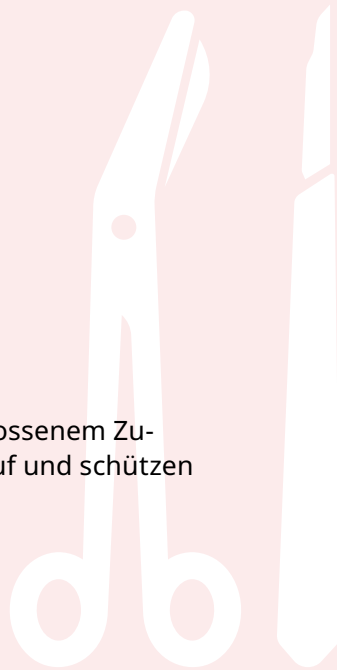

**Informationen**  
zu diesem Produkt




# Herstellung einer Gebrauchslösung

## Anleitung



Endo Star Neu

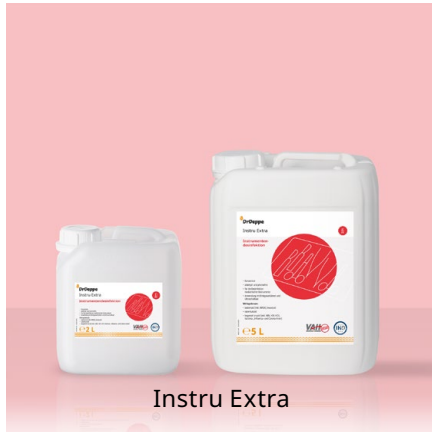

Instru Extra



Instru Plus



Instru Sept AF



Instru Suc



Instru Zym

Das Produkt liegt zum Herstellen einer Gebrauchslösung als Konzentrat vor.

Vor Verwendung wird die Gebrauchslösung unter Beachtung der erforderlichen Konzentration für die geplante Anwendung hergestellt.

1. Persönliche Schutzausrüstung: Legen Sie chemikalienbeständige Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Atemschutz und eine dicht schließende Schutzbrille an.
2. Mischen Sie das zu verwendende Konzentrat mit Wasser in Trinkwasserqualität zu einer Gebrauchslösung an (siehe nachfolgende Tabelle).

### Anwendungsbeispiel:

Zum Herstellen von 1 Liter einer 1%igen Gebrauchslösung mischen Sie 990 ml Wasser mit 10 ml Konzentrat.




# Dosiertabelle

## Herstellung gebrauchsfertiger Desinfektionslösungen

|                                         | Konzentration                          |       |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                         | 0,25 %                                 | 0,5 % | 1,0 %  | 1,5 %  | 2,0 %  | 2,5 %  | 3,0 %  | 4,0 %  | 5,0 %  |
| Gesamtmenge<br>Desinfektions-<br>lösung | Menge an Desinfektionsmittelkonzentrat |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 1 Liter                                 | 2,5 ml                                 | 5 ml  | 10 ml  | 15 ml  | 20 ml  | 25 ml  | 30 ml  | 40 ml  | 50 ml  |
| 2 Liter                                 | 5 ml                                   | 10 ml | 20 ml  | 30 ml  | 40 ml  | 50 ml  | 60 ml  | 80 ml  | 100 ml |
| 3 Liter                                 | 7,5 ml                                 | 15 ml | 30 ml  | 45 ml  | 60 ml  | 75 ml  | 90 ml  | 120 ml | 150 ml |
| 4 Liter                                 | 10 ml                                  | 20 ml | 40 ml  | 60 ml  | 80 ml  | 100 ml | 120 ml | 160 ml | 200 ml |
| 5 Liter                                 | 12,5 ml                                | 25 ml | 50 ml  | 75 ml  | 100 ml | 125 ml | 150 ml | 200 ml | 250 ml |
| 6 Liter                                 | 15 ml                                  | 30 ml | 60 ml  | 90 ml  | 120 ml | 150 ml | 180 ml | 240 ml | 300 ml |
| 7 Liter                                 | 17,5 ml                                | 35 ml | 70 ml  | 105 ml | 140 ml | 175 ml | 210 ml | 280 ml | 350 ml |
| 8 Liter                                 | 20 ml                                  | 40 ml | 80 ml  | 120 ml | 160 ml | 200 ml | 240 ml | 320 ml | 400 ml |
| 9 Liter                                 | 22,5 ml                                | 45 ml | 90 ml  | 135 ml | 180 ml | 225 ml | 270 ml | 360 ml | 450 ml |
| 10 Liter                                | 25 ml                                  | 50 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 250 ml | 300 ml | 400 ml | 500 ml |

### Anwendungsbeispiel:

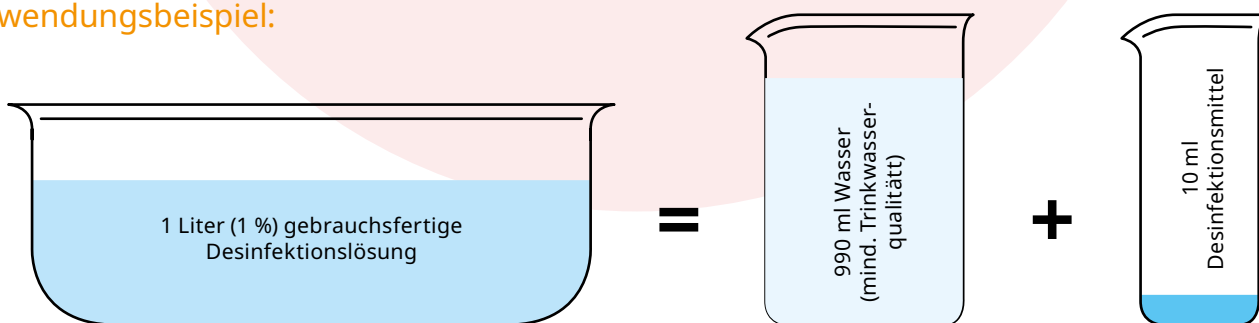

Die benötigte Konzentration und Einwirkzeit entnehmen Sie bitte dem Etikett oder der Produktinformation des jeweiligen Produktes. Wir empfehlen einen täglichen Wechsel der Desinfektionslösung.

# Produktübersicht

## Instrumentendesinfektion und -reinigung

| Artikel                      | Artikel-nummer | Gebinde-größe               | Verpackungs-einheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungs-einheit) |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| Endo Star Neu                | 601486         | 2 L                         | 6 × 2 L             | 18313231    | 4260181252360    | 4260181252377                  |
|                              | 600080         | 5 L                         | 2 × 5 L             | 18313225    | 4260181253800    | 4260181251233                  |
| Instru Extra                 | 601477         | 2 L                         | 6 × 2 L             | 18313254    | 4260181252308    | 4260181252315                  |
|                              | 600041         | 5 L                         | 2 × 5 L             | 18313248    | 4260181253848    | 4260181251264                  |
| Instru Plus                  | 601397         | 2 L                         | 6 × 2 L             | 18313308    | 4260181253916    | 4260181254494                  |
|                              | 601327         | 5 L                         | 2 × 5 L             | 18313283    | 4260181253909    | 4260181254487                  |
| Instru Sept AF               | 601491         | 2 L                         | 6 × 2 L             | 18313337    | 4260181252537    | 4260181252544                  |
|                              | 601492         | 5 L                         | 2 × 5 L             | 18313320    | 4260181252551    | 4260181252568                  |
| Instru Star rfu              | 601490         | 2 L                         | 6 × 2 L             | 18313372    | 4260181252407    | 4260181252414                  |
|                              | 600091         | 5 L                         | 2 × 5 L             | 18313366    | 4260181253947    | 4260181251363                  |
|                              | 600071         | 10 L                        | 1 × 10 L            | 18313343    | 4260181253930    | 4260181251356                  |
| Instru Suc                   | 601489         | 2 L                         | 6 × 2 L             | 18313389    | 4260181252421    | 4260181252438                  |
|                              | 600047         | 5 L                         | 2 × 5 L             | 18313395    | 4260181250700    | 4260181251295                  |
| Instru Zym                   | 600002         | 1 L                         | 10 × 1 L            | 19691834    | 4260181257563    | 4260181257570                  |
|                              | 601488         | 2 L                         | 6 × 2 L             | 18313432    | 4260181253695    | 4260181251417                  |
|                              | 600001         | 5 L                         | 2 × 5 L             | 18313449    | 4260181252445    | 4260181252452                  |
| Instru Zym wipes (Cellulose) | 600897         | 80 Tücher/ Flowpack mit LID | 6 × 80 Tücher       | 18313426    | 4260181257563    | 4260181257570                  |
| Labomat E                    | 600020         | 5 L                         | 3 × 5 L             | 18313461    | 4260181250687    | 4260181251271                  |
| Labomat KS                   | 600021         | 5 L                         | 3 × 5 L             | 18312421    | 4260181253961    | 4260181251387                  |
| Labomat MA                   | 600037         | 5 L                         | 3 × 5 L             | 18312415    | 4260181251615    | 4260181251622                  |
| Labomat SPM                  | 600650         | 5 L                         | 3 × 5 L             | 18313478    | 4260181253671    | 4260181251394                  |





Produkte für  
die Pflegebox







## Produkte für die Pflegebox

Der Alltag in der ambulanten Pflege ist geprägt von Fürsorge, Organisation und einer großen Portion

Engagement. Ob als professionelle Pflegekraft eines ambulanten Pflegedienstes oder als Familienangehöriger, der einen nahestehenden Menschen zu Hause betreut – beide Gruppen stehen täglich vor vielfältigen Herausforderungen. Sie ermöglichen pflegebedürftigen Menschen, in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben und ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen.

Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste starten oft früh in den Tag. Sie fahren von Haushalt zu Haushalt, leisten medizinische Versorgung, helfen bei der Körperpflege, geben Hilfestellung im Alltag und sind oft auch wichtiger sozialer Kontakt. Flexibilität, Fachwissen und Empathie sind dabei unerlässlich.

Auch pflegende Angehörige stemmen Tag für Tag enorme Aufgaben: Sie organisieren den Tagesablauf, übernehmen pflegerische und medizinische Tätigkeiten, geben emotionale Unterstützung und sind häu-

fig rund um die Uhr im Einsatz. Ihr Engagement ist Ausdruck tiefer Verbundenheit, aber auch eine große Belastung, die viel Kraft erfordert.

Eine wertvolle Entlastung bieten die Anbieter von Pflegeboxen. Sie sorgen dafür, dass pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen monatlich mit wichtigen Pflegehilfsmitteln versorgt werden – kostenfrei und direkt nach Hause geliefert, sofern ein Pflegegrad vorliegt und die Pflege zu Hause stattfindet. Die Auswahl an Anbietern ist groß. Sie bieten individuelle Zusammenstellungen, zuverlässigen Service und eine unkomplizierte Abwicklung mit der Pflegekasse. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche – die persönliche Zuwendung und die Pflege selbst.

Dieser Katalog richtet sich an alle, die tagtäglich in der ambulanten Pflege tätig sind – beruflich oder privat. Er bietet Inspiration, praktische Hilfsmittel und innovative Produkte, die den Pflegealltag erleichtern und somit den Alltag effizienter und sorgenfreier zu gestalten.

# Hygieneanforderungen in der ambulanten Pflege und im Pflegehaushalt

**H**ygien ist das Herzstück jeder guten Pflege – besonders in der ambulanten Versorgung und im häuslichen Pflegeumfeld. Der Schutz vor Infektionen hat oberste Priorität, denn er bewahrt sowohl Pflegebedürftige als auch Pflegenden vor gesundheitlichen Risiken. Zwei zentrale Säulen der Hygiene sind dabei die Hände- und die Flächendesinfektion.




## Kleine Geste, große Wirkung

Die regelmäßige und sorgfältige Desinfektion der Hände ist die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung von Keimübertragungen. Vor und nach jedem Pflegekontakt, nach dem Kontakt mit Körperflüssigkeiten, vor der Zubereitung von Speisen und nach dem Toilettengang sollte die Händedesinfektion selbstverständlich sein. Sie schützt nicht nur die pflegebedürftige Person, sondern auch die Pflegenden selbst. In der ambulanten Pflege, wo viele verschiedene Haushalte betreut werden, ist die Händedesinfektion ein unverzichtbarer Bestandteil des Arbeitsalltags.




## Sauberkeit, die schützt

Oberflächen, die regelmäßig berührt werden – wie Türklinken, Waschbecken, Nachttische oder Pflegehilfsmittel – können Keime übertragen. Eine gezielte Flächendesinfektion sorgt dafür, dass Krankheitserreger keine Chance haben, sich auszubreiten. Besonders im Pflegehaushalt, wo oft mehrere Personen ein- und ausgehen, ist die regelmäßige Desinfektion von Kontaktflächen essenziell. Dabei ist auf eine sachgemäße Anwendung zu achten: Die richtige Dosierung, ausreichende Benetzung und Einwirkzeit sind entscheidend für die Wirksamkeit.

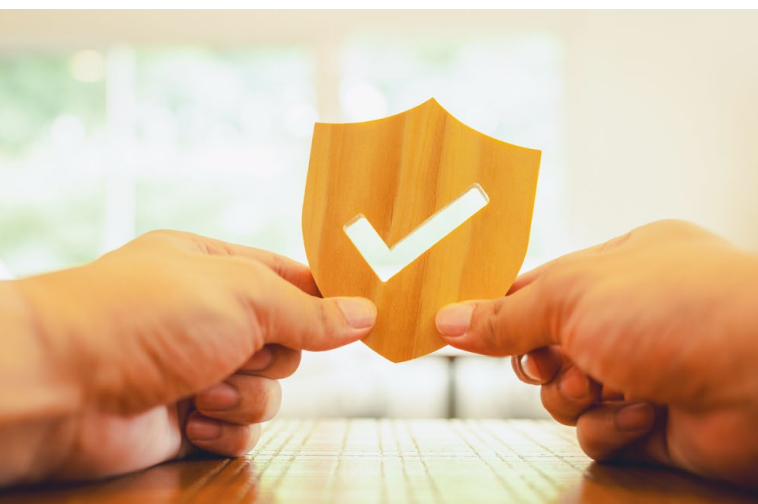

## Einfache Maßnahmen, große Sicherheit

Mit konsequenter Hände- und gezielter Flächendesinfektion lassen sich Infektionsrisiken im Pflegealltag deutlich reduzieren. Diese Hygienemaßnahmen sind nicht nur Vorschrift, sondern Ausdruck von Wertschätzung und Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Menschen, die auf Pflege angewiesen sind. Sie schaffen Vertrauen und sorgen für ein sicheres, gesundes Umfeld – Tag für Tag.

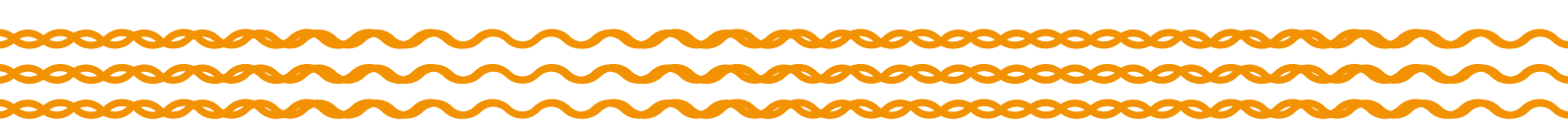

# INHALT

## Produkte für die Pflegebox

### Händedesinfektion

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Op Sept .....          | 118 |
| Op Sept pur .....      | 120 |
| OpSept virugon® .....  | 122 |
| Lotio Sept Basic ..... | 124 |

### Flächendesinfektion

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Spray In GA wipes (Cellulose) .....    | 126 |
| Beta Guard rfu wipes (Cellulose) ..... | 128 |
| Spray In QF wipes (Cellulose) .....    | 130 |
| Spray In QF .....                      | 132 |
| Spray In GA .....                      | 134 |
| Beta Guard rfu .....                   | 136 |
| Spray In Neu .....                     | 138 |

### Hände- und Flächendesinfektion

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Lotio 2in1 (Cellulose) ..... | 140 |
|------------------------------|-----|

## Produktübersicht

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Produkte für die Pflegebox ..... | 142 |
|----------------------------------|-----|

*Applikationshilfen auf Anfrage*



# Op Sept



## Produktbeschreibung

Op Sept ist ein gebrauchsfertiges, rückfettendes, parfüm- und alkoholhaltiges Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

## Anwendungsgebiet

In Krankenhäusern und anderen Bereichen, wenn ein hohes Maß an Handhygiene erforderlich ist, z.B.:

- Häusliche Verwendung (Hauspflege usw.)
- Institutionelle Verwendung (Forschung usw.)
- Industrielle Anwendungen, z.B. in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie usw.
- Restaurants und Groß-/Kantinenküchen
- Erholungsbereiche

## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)



## Einwirkzeiten

| Op Sept<br>Wirkspektrum                                            | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit                           | Norm     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Hygienische<br>Händedesinfektion                                   | niedrig                         | 30 Sekunden/<br>3 ml                  | EN 1500  |
| Chirurgische<br>Händedesinfektion                                  | niedrig                         | 90 Sekunden/<br>3 ml                  | EN 12791 |
| Bakterizid                                                         | niedrig                         | 30 Sekunden                           | EN 13727 |
| Levurozid                                                          | niedrig                         | 30 Sekunden                           | EN 13624 |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                     | niedrig                         | 15 Sekunden                           | EN 14476 |
| Begrenzt viruzid PLUS<br>• Adenovirus Typ 5<br>• Murines Norovirus | niedrig                         | 2 Minuten<br>2 Minuten<br>30 Sekunden | EN 14476 |

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikel-<br>nummer | Gebinde-<br>größe | Gebinde-<br>art | Verpackungs-<br>einheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Ver-<br>packungseinheit) | HMN (Hilfs-<br>mittelnummer) |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 601952             | 500 ml            | Flasche         | 18 × 500 ml             | 20274366    | 4260181257792    | 4260181257952                      | 54.99.02.0024                |



## Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Erwachsene und Kinder von 12 Jahren und älter: 3 ml.  
Die Menge der Flüssigkeit muss der Größe einer großen Münze ähneln. Kinder unter 12 Jahren: 1,5 ml.

## Anwendungsrate(n) und Häufigkeit

Das Produkt ist auf sichtbar sauberen Händen zu verwenden. Wenn die Hände schmutzig sind, mit Wasser und Seife waschen, abspülen und abtrocknen, bevor das Produkt aufgetragen wird. Das Produkt ist gebrauchsfertig. Das Produkt soll direkt aufgetragen oder in einem Spender oder mit einer Pumpe verwendet werden.

**Schritt 1:** Die folgende Menge an Desinfektionsmittel auftragen: Erwachsene und Kinder von 12 Jahren und älter: 3 ml; Kinder unter 12 Jahren: 1,5 ml. In der Handfläche verreiben. Die Handflächen aneinander reiben, um das Desinfektionsmittel über die gesamten Hände und Finger zu verteilen.

**Schritt 2:** Den Rücken Ihrer linken Hand mit der rechten Handfläche einreiben. Umkehrung und Wiederholung der Aktion.

**Schritt 3:** Öffnen Sie die Finger und reiben Sie die Fingerzwischenräume ein. Umkehrung und Wiederholung der Aktion.

**Schritt 4:** Mit verschränkten Fingern Handfläche an Handfläche einreiben (5 Mal).

**Schritt 5:** Den Daumen jeder Hand mit einer kreisenden Bewegung einreiben.

**Schritt 6:** Die Fingerspitzen mit kreisenden Bewegungen gegen die gegenüberliegende Handfläche reiben. Das Handgelenk mit beiden Händen einreiben. Die Hände vollständig trocknen lassen. 30 Sekunden lang befeuchtet halten gegen Bakterien, Hefen, Tuberkulosebakterien und behüllte Viren. Nicht abspülen. Den Vorgang wiederholen, wenn eine erneute Händedesinfektion erforderlich ist.

Erwachsene und Kinder von 12 Jahren und älter:  
Bis zu 10 × pro Tag.

Kinder unter 12 Jahren: Bis zu 3 × pro Tag.

## Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Für Kinder (Alter > 1 Jahr) nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

## Unionszulassungsnummer

Das Biozidprodukt Op Sept (Wirkstoff Propan-2-ol) hat eine Unions-Zulassung für die Produktart 1 (Desinfektionsmittel für die menschliche Hygiene) mit der Zulassungsnummer EU-0033834-0003. Die Zulassung ist gültig bis 30. September 2035.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm sind als Wirkstoff enthalten:**  
63,14 g Propan-2-ol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Op Sept pur



## Produktbeschreibung

Op Sept pur ist ein gebrauchsfertiges, rückstands- und parfümfreies, alkoholhaltiges Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

## Anwendungsgebiet

In Krankenhäusern und anderen Bereichen, wenn ein hohes Maß an Handhygiene erforderlich ist, z.B.:

- Häusliche Verwendung (Hauspflege usw.)
- Institutionelle Verwendung (Forschung usw.)
- Industrielle Anwendungen, z.B. in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie usw.
- Restaurants und Groß-/Kantinenküchen
- Erholungsbereiche

## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)



## Einwirkzeiten

| Op Sept pur<br>Wirkspektrum                                        | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit                           | Norm     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Hygienische<br>Händedesinfektion                                   | niedrig                         | 30 Sekunden/<br>3 ml                  | EN 1500  |
| Chirurgische<br>Händedesinfektion                                  | niedrig                         | 90 Sekunden/<br>3 ml                  | EN 12791 |
| Bakterizid                                                         | niedrig                         | 30 Sekunden                           | EN 13727 |
| Levurozid                                                          | niedrig                         | 30 Sekunden                           | EN 13624 |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                     | niedrig                         | 15 Sekunden                           | EN 14476 |
| Begrenzt viruzid PLUS<br>• Adenovirus Typ 5<br>• Murines Norovirus | niedrig                         | 2 Minuten<br>2 Minuten<br>30 Sekunden | EN 14476 |

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikel-<br>nummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungsein-<br>heit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Ver-<br>packungseinheit) |
|--------------------|--------------|------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|
| 601959             | 500 ml       | Flasche    | 18 × 500 ml             | 20274277    | 4260181257877    | 4260181258034                      |



## Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Erwachsene und Kinder von 12 Jahren und älter: 3 ml.  
Die Menge der Flüssigkeit muss der Größe einer großen Münze ähneln. Kinder unter 12 Jahren: 1,5 ml.

## Anwendungsrate(n) und Häufigkeit

Das Produkt ist auf sichtbar sauberen Händen zu verwenden. Wenn die Hände schmutzig sind, mit Wasser und Seife waschen, abspülen und abtrocknen, bevor das Produkt aufgetragen wird. Das Produkt ist gebrauchsfertig. Das Produkt soll direkt aufgetragen oder in einem Spender oder mit einer Pumpe verwendet werden.

**Schritt 1:** Die folgende Menge an Desinfektionsmittel auftragen: Erwachsene und Kinder von 12 Jahren und älter: 3 ml; Kinder unter 12 Jahren: 1,5 ml. In der Handfläche verreiben. Die Handflächen aneinander reiben, um das Desinfektionsmittel über die gesamten Hände und Finger zu verteilen.

**Schritt 2:** Den Rücken Ihrer linken Hand mit der rechten Handfläche einreiben. Umkehrung und Wiederholung der Aktion.

**Schritt 3:** Öffnen Sie die Finger und reiben Sie die Fingerzwischenräume ein. Umkehrung und Wiederholung der Aktion.

**Schritt 4:** Mit verschränkten Fingern Handfläche an Handfläche einreiben (5 Mal).

**Schritt 5:** Den Daumen jeder Hand mit einer kreisenden Bewegung einreiben.

**Schritt 6:** Die Fingerspitzen mit kreisenden Bewegungen gegen die gegenüberliegende Handfläche reiben. Das Handgelenk mit beiden Händen einreiben. Die Hände vollständig trocknen lassen. 30 Sekunden lang befeuchtet halten gegen Bakterien, Hefen, Tuberkulosebakterien und behüllte Viren. Nicht abspülen. Den Vorgang wiederholen, wenn eine erneute Händedesinfektion erforderlich ist.

Erwachsene und Kinder von 12 Jahren und älter:  
Bis zu 10 × pro Tag.

Kinder unter 12 Jahren: Bis zu 3 × pro Tag.

## Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Für Kinder (Alter > 1 Jahr) nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

## Unionszulassungsnummer

Das Biozidprodukt Op Sept pur (Wirkstoff Propan-2-ol) hat eine Unions-Zulassung für die Produktart 1 (Desinfektionsmittel für die menschliche Hygiene) mit der Zulassungsnummer EU-0033834-0002. Die Zulassung ist gültig bis 30. September 2035.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm sind als Wirkstoff enthalten:**  
63,14 g Propan-2-ol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.



**Informationen**  
zu diesem Produkt





# OpSept virugon®



## Produktbeschreibung

OpSept virugon® ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches, rückfettendes und parfümfreies Desinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

## Anwendungsgebiet

Anwendbar in allen Bereichen mit erhöhtem Risiko und in der häuslichen Pflege. OpSept virugon® hat ein sehr breites Wirkspektrum, insbesondere gegen über behüllten und unbehüllten Viren. Die Infektionsprävention für eine effektive Händedesinfektion erfolgt bereits nach 30 Sekunden.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- viruzid

## Anwendungshinweise

Vor der Desinfektion stark verschmutzte Hände mit Wasser und Seife reinigen. Nasse Hände vor der Desinfektion trocknen lassen. Zur hygienischen Händedesinfektion 3 ml in die Handfläche geben und für 30 Sekunden intensiv mit beiden Händen so verreiben, dass die Hände vollständig benetzt werden. Es ist zu beachten, dass auch Fingerzwischenräume, Fingernagelwinkel und Hautfalten vollständig benetzt werden. Während der gesamten Einwirkzeit von 30 Sekunden die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Zur chirurgischen Händedesinfektion eine ausreichende Menge in den Händen einreiben, sodass die gesamte Handfläche einschließlich der Problembereiche Interdigitalbereich und Nagelfalz während 2 Minuten benetzt ist. Während der gesamten Einwirkzeit von 2 Minuten die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Nach Ablauf der Einwirkzeit von 30 Sekunden bzw. 2 Minuten ist die Desinfektion abgeschlossen.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikel-nummer | Gebinde-größe | Gebinde-art | Verpackungs-einheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Ver-packungseinheit) | HMN (Hilfs-mittelnummer) |
|----------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 601507         | 500 ml        | Flasche     | 18 x 500 ml         | 18311829    | 4260181252735    | 4260181252780                  | 54.99.02.0011            |



## Biozidregistriernummer

N-102305

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm sind als Wirkstoff enthalten:**  
73,5 g Ethanol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| OpSept virugon®<br>Wirkspektrum                                   | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Hygienische<br>Händedesinfektion                                  | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 13727<br>EN 13624<br>EN 1500  |
| Chirurgische<br>Händedesinfektion                                 | niedrig                         | 2 Minuten   | EN 13727<br>EN 13624<br>EN 12791 |
| Tuberkulozid                                                      | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 14348                         |
| Mykobakterizid                                                    | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 14348                         |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                    | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 14476                         |
| Begrenzt viruzid PLUS<br>(Adenovirus Typ 5,<br>Murines Norovirus) | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 14476                         |
| Viruzid<br>(Polio Virus Typ 1)                                    | niedrig                         | 30 Sekunden | EN 14476                         |



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Lotio Sept Basic



## Produktbeschreibung

Lotio Sept Basic, mit Aloe Vera, ist ein gebrauchsfertiges, alkoholfreies Präparat zur hygienischen Händedesinfektion und hygienischen Händewaschung.

## Anwendungsgebiet

Es ist anwendbar in allen Bereichen der menschlichen Hygiene und in der häuslichen Pflege.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)

## Anwendungshinweise

Zur hygienischen Händedesinfektion die Hände vor der Desinfektion reinigen und trocknen lassen.

Eine ausreichende Menge in die Hände geben und verreiben, dabei die Einwirkzeit von 60 Sekunden einhalten.

Zur hygienischen Händewaschung bei Verwendung der Pumpflasche/Foamer die Hände mit Wasser anfeuchten und danach 6 Pumphübe aus dem Foamer in den Händen verreiben.

Die Einwirkzeit von 60 Sekunden einhalten. Lotio Sept Basic anschließend abwaschen und die Hände gründlich trocknen.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601302        | 500 ml       | Flasche    | 18 × 500 ml        | 18311568    | 4260181253763    | 4260181250922                 | 54.99.02.0010           |



## Biozidregistriernummer

N-87461

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm sind als Wirkstoff enthalten:**

0,8 g Didecyldimethylammoniumchlorid

0,5 g 2-Phenoxyethanol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Lotio Sept Basic<br>Wirkspektrum               | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Bakterizid                                     | niedrig                         | 1 Minute    | EN 13727<br>EN 16615* |
| Levurozid                                      | niedrig                         | 1 Minute    | EN 13624<br>EN 16615* |
| Hygienische Hände-<br>desinfektion             | niedrig                         | 1 Minute    | EN 1500               |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara) | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14476              |
| Hygienische Hände-<br>waschung                 | niedrig                         | 1 Minute    | EN 1499               |

\*getestet an Referenztuch



**Informationen**  
zu diesem Produkt





# Spray In GA wipes



## Produktbeschreibung

Spray In GA wipes sind gering alkoholhaltige Flächen-desinfektionstücher in gebrauchsfertiger Form. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

## Anwendungsgebiet

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie, öffentlichen Einrichtungen und häuslichen Pflege. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten.

## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- wirksam gegen Polyoma SV-40 Viren


## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt wird im Wischverfahren verwendet. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Tuchgröße  | Gebindeart                  | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|---------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601913        | 60 Tücher    | 18 x 20 cm | Flowpack (mit Anfasslasche) | 22 x 60 Tücher     | 19892751    | 4260181250052    | 4260181250069                 | 54.99.02.0022           |

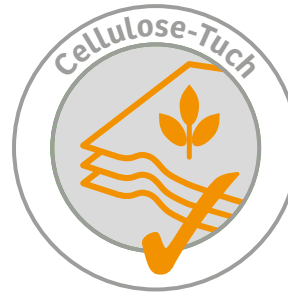

## Biozidregistriernummer

N-114157

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten:**

20 g Propan-1-ol

0,2 g Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Spray In GA wipes<br>Wirkspektrum                                     | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Bakterizid                                                            | mit Mechanik<br>hoch            | 1 Minute    | EN 13727<br>EN 16615              |
| Levurozid                                                             | mit Mechanik<br>hoch            | 1 Minute    | EN 13624<br>EN 16615              |
| Tuberkulozid (M. terrae) /<br>Mykobakterizid<br>(M. terrae, M. avium) | mit Mechanik<br>hoch            | 2 Minuten   | VAH 9.1<br>VAH 14.1               |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                        | mit Mechanik<br>niedrig         | 1 Minute    | EN 14476,<br>modified<br>EN 16615 |
| Begrenzt viruzid<br>PLUS                                              | niedrig                         | 30 Min.*    | EN 14476                          |
| Adenovirus Typ 5                                                      | niedrig                         | 30 Min.*    | EN 14476                          |
| Murines Norovirus                                                     | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14476                          |
| Rotavirus Stamm WA                                                    | ohne                            | 30 Sekunden | EN 14476                          |
| Viruzid wirksam<br>gegen<br>Polyoma SV-40                             | niedrig                         | 5 Minuten   | EN 14476                          |

\*nicht für patientennahe Oberflächen



**Informationen**  
zu diesem Produkt





# Beta Guard rfu wipes

## Produktbeschreibung

Beta Guard rfu wipes sind alkohol- und aldehydfreie Flächendesinfektionstücher in gebrauchsfertiger Form. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

## Anwendungsgebiet

Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie, öffentlichen Einrichtungen und häuslichen Pflege. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten.

## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

## Anwendungshinweise


Das gebrauchsfertige Produkt wird im Wischverfahren verwendet. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Tuchgröße  | Gebindeart         | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601797        | 80 Tücher    | 20 × 20 cm | Flowpack (mit LID) | 12 × 80 Tücher     | 19691716    | 4260181257549    | 4260181257556                 | 54.99.02.0019           |



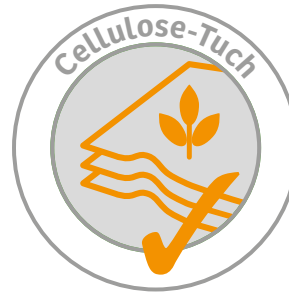

## Medizinproduktklasse

IIa

## Biozidregistriernummer

N-83979

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten:**

0,1 g 2-Phenoxyethanol

0,35 g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammonium-chlorid

0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Beta Guard rfu<br>wipes (Cellulose)<br>Wirkspektrum                  | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit  | Norm                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| Bakterizid                                                           | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute     | EN 13727*<br>EN 16615 |
| Levurozid                                                            | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute     | EN 13624*<br>EN 16615 |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                          | hoch                            | 60 Minuten** | EN 14348*             |
| Begrenzt viruzid                                                     | hoch                            | 1 Minute     | EN 14476*             |
| Modified Vaccinia<br>Ankara                                          | niedrig                         | 1 Minute     | mod.<br>EN 16615      |
| Begrenzt viruzid<br>PLUS<br>(Adenovirus Typ 5,<br>Murines Norovirus) | hoch                            | 60 Minuten** | EN 14476*             |

\* getestet an der Tränklösung

\*\* nicht für patientennahe Oberflächen

CE 0044



**Informationen**  
zu diesem Produkt





# Spray In QF wipes

## Produktbeschreibung

Spray In QF wipes sind alkoholische Flächendesinfektionstücher in gebrauchsfertiger Form, aldehyd- und QAV-frei. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

## Anwendungsgebiet

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie, öffentlichen Einrichtungen und häuslichen Pflege.

## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)


## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt wird im Wischverfahren verwendet. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Tuchgröße  | Gebindeart         | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601799        | 60 Tücher    | 18 x 20 cm | Flowpack (mit LID) | 20 x 60 Tücher     | 19692733    | 4260181257426    | 4260181257433                 | 54.99.02.0021           |

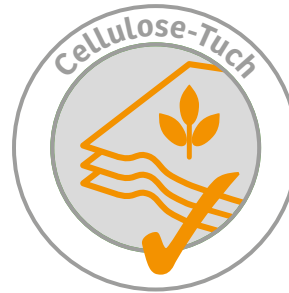

## Biozidregistriernummer

N-115216

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten:**

50 g Ethanol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Spray In QF<br>wipes (Cellulose)<br>Wirkspektrum                     | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| Bakterizid                                                           | niedrig                         | 1 Minute    | EN 13727*<br>EN 1276*<br>EN 16615           |
| Levurozid                                                            | niedrig                         | 1 Minute    | EN 13624*<br>EN 1650*<br>EN 16615           |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                       | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14476*,<br>Virus-<br>4-Felder-<br>test** |
| Begrenzt viruzid<br>PLUS<br>(Adenovirus Typ 5, Murines<br>Norovirus) | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14476*                                   |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                          | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14348*                                   |
| Mykobakterizid<br>(M. terrae und M. avium)                           | hoch                            | 5 Minuten   | EN 14348*                                   |

\* getestet an der Tränklösung

\*\* in Anlehnung an EN 16615



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Spray In QF



## Produktbeschreibung

Spray In QF ist ein flüssiges, alkoholisches, aldehyd- und QAV-freies Flächendesinfektionsmittel in gebrauchsfertiger Form.

## Anwendungsgebiet

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie, öffentlichen Einrichtungen und häuslichen Pflege. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten, semikritischen und kritischen Medizinprodukten.

## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt ist vorzugsweise im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs zu verwenden.

Eine Sprühdesinfektion vorzugsweise auf die Bereiche beschränken, die durch eine Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Einsatz des Sprühverfahrens sollte dies in einer Kombination aus Sprüh- / Wischverfahren verwendet werden. Es gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikel-nummer | Gebinde-größe | Gebinde-art | Verpackungs-einheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Ver-packungseinheit) | HMN (Hilfs-mittelnummer) |
|----------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 601356         | 500 ml        | Flasche     | 18 × 500 ml         | 18313082    | 4260181254043    | 4260181251196                  | 54.99.02.0018            |



## Biozidregistriernummer

N-73614

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm sind als Wirkstoff enthalten:**

50 g Ethanol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Spray In QF<br>Wirkspektrum                                       | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Bakterizid                                                        | mit<br>Mechanik<br>niedrig      | 1 Minute    | EN 13727<br>EN 1276<br>EN 16615*           |
| Levurozid                                                         | mit<br>Mechanik<br>niedrig      | 1 Minute    | EN 13624<br>EN 1650<br>EN 16615*           |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                    | mit<br>Mechanik<br>niedrig      | 1 Minute    | EN 14476,<br>Virus-<br>4-Felder-<br>test** |
| Bakterizid                                                        | ohne<br>Mechanik<br>niedrig     | 1 Minute    | EN 13727<br>EN 1276<br>EN 13697            |
| Levurozid                                                         | ohne<br>Mechanik<br>niedrig     | 1 Minute    | EN 13624<br>EN 1650<br>EN 13697            |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                    | ohne<br>Mechanik<br>niedrig     | 1 Minute    | EN 14476<br>EN 16777                       |
| Begrenzt viruzid<br>PLUS (Adenovirus Typ 5,<br>Murines Norovirus) | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14476                                   |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                       | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14348                                   |
| Mykobakterizid<br>(M. terrae und M. avium)                        | niedrig                         | 5 Minuten   | EN 14348                                   |

\* an Referenztuch getestet

\*\* in Anlehnung an EN 16615



**Informationen**  
zu diesem Produkt





# Spray In GA



## Produktbeschreibung

Spray In GA ist ein flüssiges, gebrauchsfertiges und gering alkoholhaltiges Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion. Das Produkt zeigt eine sehr gute Materialverträglichkeit unter den vorgegebenen Einwirkzeiten.

## Anwendungsgebiet

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie, öffentlichen Einrichtungen und häuslichen Pflege.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- wirksam gegen Polyoma SV-40 Viren

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt ist vorzugsweise im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs zu verwenden. Eine Sprühdesinfektion vorzugsweise auf die Bereiche beschränken, die durch eine Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Einsatz des Sprühverfahrens sollte dies in einer Kombination aus Sprüh-/Wischverfahren verwendet werden. Es gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

## Zielgruppe (Anwender/Nutzer)

- Pflegefachkräfte und Pflegepersonal
- Pflegebedürftige Personen
- Pflegenden Angehörige
- Pflegeberaterinnen und -berater, neutrale Beratungsstellen
- oder kommunale Beratungspersonen in ihrer Beratungstätigkeit

## Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Spray In GA weist keine bekannten Anwendungsrisiken oder Kontraindikationen auf. Es liegen keine Hinweise auf unerwünschte Wirkungen oder Einschränkungen vor.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer    | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|------------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601939 (Neutral) | 500 ml       | Flasche    | 18 x 500 ml        | 20190468    | 4260181257655    | 4260181257679                 | 54.99.02.0016           |



## Medizinproduktklasse

IIa

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm sind als Wirkstoff enthalten:**

20 g Propan-1-ol

0,2 g Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung  
sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zu-  
stand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen  
Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Spray In GA<br>Wirkspektrum                                          | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit  | Norm                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Bakterizid                                                           | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute     | EN 13727<br>EN 16615*             |
| Levurozid                                                            | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute     | EN 13624<br>EN 16615*             |
| Tuberkulozid (M. terrae),<br>Mykobakterizid<br>(M. terrae, M. avium) | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 2 Minuten    | VAH 9.1*<br>VAH 14.1*             |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                       | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute     | EN 14476,<br>modified<br>EN16615* |
| Begrenzt viruzid<br>PLUS                                             | niedrig                         | 30 Minuten** | EN 14476                          |
| Adenovirus Typ 5                                                     | niedrig                         | 30 Minuten** | EN 14476                          |
| Murines Norovirus                                                    | niedrig                         | 1 Minute     | EN 14476                          |
| Rotavirus Stamm WA                                                   | ohne                            | 30 Sekunden  | EN 14476                          |
| Viruzid wirksam<br>gegen<br>Polyoma SV-40                            | niedrig                         | 5 Minuten    | EN 14476                          |

\* an Referenztuch getestet

\*\* nicht für patientennahe Oberflächen

CE 0044



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Beta Guard rfu

## Produktbeschreibung

Beta Guard rfu ist ein flüssiges, alkohol- und aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel in gebrauchsfertiger Form.

## Anwendungsgebiet

Es ist zur Schnelldesinfektion von wischbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie, öffentlichen Einrichtungen und häuslichen Pflege geeignet.



## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt ist vorzugsweise im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs zu verwenden. Eine Sprühdesinfektion vorzugsweise auf die Bereiche beschränken, die durch eine Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Einsatz des Sprühverfahrens sollte dies in einer Kombination aus Sprüh- / Wischverfahren verwendet werden. Es gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart                          | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601544        | 500 ml       | Flasche                             | 18 × 500 ml        | 18312289    | 4260181253060    | 4260181253077                 | 54.99.02.0017           |
| 602002        | 500 ml       | Kentoflasche mit vormont. Sprühkopf | 6 × 500 ml         | 20410622    | 4260181258256    | 4260181258270                 | -                       |



## Biozidregistriernummer

N-83978

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm sind als Wirkstoff enthalten:**

0,1 g 2-Phenoxyethanol

0,35 g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid

0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Beta Guard rfu<br>Wirkpektrum                                     | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit  | Norm                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Bakterizid                                                        | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute     | EN 13727<br>EN 16615*               |
| Levurozid                                                         | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 1 Minute     | EN 13624<br>EN 16615*               |
| Bakterizid                                                        | ohne<br>Mechanik<br>hoch        | 1 Minute     | EN 13727<br>EN 1276***<br>EN 13697  |
| Levurozid                                                         | ohne<br>Mechanik<br>hoch        | 1 Minute     | EN 13624<br>EN 1650***<br>EN 13697  |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                       | hoch                            | 60 Minuten** | EN 14348                            |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                    | hoch                            | 1 Minute     | EN 14476<br>Virus-4-Felder-Test**** |
| Begrenzt viruzid PLUS<br>(Adenovirus Typ 5,<br>Murines Norovirus) | hoch                            | 60 Minuten** | EN 14476                            |

\* an Referenz Tuch getestet

\*\* nicht für patientennahe Oberflächen

\*\*\* Lebensmittelbereich

\*\*\*\* in Anlehnung an EN 16615



**Informationen**  
zu diesem Produkt





# Spray In Neu



## Produktbeschreibung

Spray In Neu ist ein flüssiges, alkoholisches und aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel in gebrauchsfertiger Form.

## Anwendungsgebiet

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen sowie in der Industrie, öffentlichen Einrichtungen und in der häuslichen Pflege. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten, bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten.



## Zielgruppe (Anwender/Nutzer)

- Pflegefachkräfte und Pflegepersonal
- Pflegebedürftige Personen
- Pflegendе Angehörige
- Pflegeberaterinnen und -berater, neutrale Beratungsstellen oder kommunale Beratungspersonen in ihrer Beratungstätigkeit

## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

## Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt ist vorzugsweise im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs zu verwenden. Eine Sprühdesinfektion vorzugsweise auf die Bereiche beschränken, die durch eine Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Einsatz des Sprühverfahrens sollte dies in einer Kombination aus Sprüh- / Wischverfahren verwendet werden. Es gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

## Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Spray In Neu weist keine bekannten Anwendungsrisiken oder Kontraindikationen auf. Es liegen keine Hinweise auf unerwünschte Wirkungen oder Einschränkungen vor.

## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601937        | 250 ml       | Flasche    | 12 × 250 ml        | 20136411    | 4260181253350    | 4260181257617                 | 54.99.02.0023           |



## Biozidregistriernummer

N-60215

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:**

0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

43 g Ethanol

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Spray In Neu<br>Wirksamkeit                                      | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit  | Norm                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| Bakterizid                                                       | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 5 Minuten    | EN 13727<br>EN 16615* |
| Levurozid                                                        | mit<br>Mechanik<br>hoch         | 5 Minuten    | EN 13624<br>EN 16615* |
| Bakterizid                                                       | ohne<br>Mechanik<br>hoch        | 5 Minuten    | EN 13727<br>EN 13697  |
| Levurozid                                                        | ohne<br>Mechanik<br>hoch        | 5 Minuten    | EN 13624<br>EN 13697  |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                      | hoch                            | 1 Minute     | EN 14348              |
| Begrenzt viruzid<br>(Vaccinia Stamm Elstree,<br>BVDV Stamm NADL) | 10% FKS                         | 30 Sekunden  | DVV/RKI               |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                   | niedrig                         | 1 Minute     | EN 14476              |
| Begrenzt viruzid PLUS                                            | niedrig                         | 15 Minuten** | EN 14476              |
| Adenovirus Typ 5                                                 | niedrig                         | 15 Minuten** | EN 14476              |
| Murines Norovirus                                                | niedrig                         | 5 Minuten    | EN 14476              |
| Rotavirus Stamm Wa                                               | niedrig                         | 5 Minuten    | EN 14476              |



**Informationen**  
zu diesem Produkt



# Lotio 2in1



## Produktbeschreibung

Lotio 2in1 sind gebrauchsfertige Aloe Vera-haltige Desinfektionstücher zur Hände- und Flächendesinfektion. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

## Anwendungsgebiet

Ein Tuch für zwei Anwendungsbereiche: Lotio 2in1 Tücher sind für die Desinfektion von Händen und Oberflächen geeignet, was sie zu einem multifunktionalen Produkt macht und Platz in der Pflegebox spart. Das Produkt ist in Pflegebereichen und der häuslichen Pflege einsetzbar.

## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)


## Anwendungshinweise

Vor der Desinfektion stark verschmutzte Hände wie auch Flächen reinigen. Zur Händedesinfektion die trockenen Hände mit dem feuchten Tuch benetzen und über die gesamte Einwirkzeit feucht halten, gegebenenfalls ein weiteres Tuch verwenden. Zur Flächendesinfektion die Fläche vollständig benetzen und gegebenenfalls mit einem zweiten Tuch nachwischen. Die Fläche muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden. Die Einwirkzeiten beachten.



## Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Tuchgröße  | Gebindeart                        | Verpackungseinheit | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|---------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601643        | 60 Tücher    | 18 × 20 cm | Flowpack (mit LID)                | 20 × 60 Tücher     | 18849724    | 4260181254722    | 4260181254739                 | 54.99.02.0020           |
| 601911        | 60 Tücher    | 18 × 20 cm | Flowpack (mit Anfassflasche)      | 22 × 60 Tücher     | 19878828    | 4260181250021    | 4260181250014                 | 54.99.02.0020           |
| 601901        | 15 Tücher    | 15 × 20 cm | Mini-Flowpack (mit Anfassflasche) | 50 × 15 Tücher     | 19881569    | 4260181259147    | 4260181259154                 | -                       |

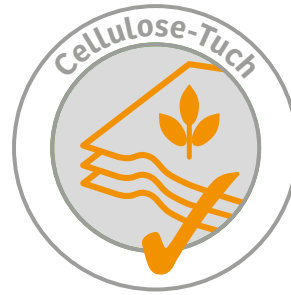

## Biozidregistriernummer

N-86407

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**In 100 Gramm Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten:**

0,8 g Didecyldimethylammoniumchlorid  
0,5 g 2-Phenoxyethanol

## Lagerung und Haltbarkeit

**Haltbarkeit:**

36 Monate

**Haltbarkeit im Anbruchgebinde:**

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wieder verschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

## Einwirkzeiten

| Lotio 2in1<br>Wirkpektrum                      | Belastung<br>(hoch/<br>niedrig) | Einwirkzeit | Norm                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Bakterizid                                     | niedrig                         | 1 Minute    | EN 13727*<br>EN 16615 |
| Levurozid                                      | niedrig                         | 1 Minute    | EN 13624*<br>EN 16615 |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara) | niedrig                         | 1 Minute    | EN 14476*             |

\*getestet an der Tränklösung



**Informationen**  
zu diesem Produkt





# Produktübersicht

## Produkte für die Pflegebox

| Artikel                                 | Artikel-nummer      | Gebinde-größe                                               | Verpa-ckungs-einheit | Tuch-größe | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungs-einheit) | HMN (Hilfsmittel-nummer) |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Op Sept</b>                          | 601952              | 500 ml                                                      | 18 × 500 ml          | -          | 20274366    | 4260181257792    | 4260181257952                  | 54.99.02.0024            |
| <b>Op Sept pur</b>                      | 601959              | 500 ml                                                      | 18 × 500 ml          | -          | 20274277    | 4260181257877    | 4260181258034                  | -                        |
| <b>OpSept virugon®</b>                  | 601507              | 500 ml                                                      | 18 × 500 ml          | -          | 18311829    | 4260181252735    | 4260181252780                  | 54.99.02.0011            |
| <b>Lotio Sept Basic</b>                 | 601302              | 500 ml                                                      | 18 × 500 ml          | -          | 18311568    | 4260181253763    | 4260181250922                  | 54.99.02.0010            |
| <b>Spray In GA wipes (Cellulose)</b>    | 601913              | 60 Tücher/<br>Flowpack<br>mit Anfass-<br>lasche             | 22 × 60<br>Tücher    | 18 × 20 cm | 19892751    | 4260181250052    | 4260181250069                  | 54.99.02.0022            |
| <b>Beta Guard rfu wipes (Cellulose)</b> | 601797              | 80 Tücher/<br>Flowpack<br>mit LID                           | 12 × 80<br>Tücher    | 20 × 20 cm | 19691716    | 4260181257549    | 4260181257556                  | 54.99.02.0019            |
| <b>Spray In QF wipes (Cellulose)</b>    | 601799              | 60 Tücher/<br>Flowpack<br>mit LID                           | 20 × 60<br>Tücher    | 18 × 20 cm | 19692733    | 4260181257426    | 4260181257433                  | 54.99.02.0021            |
| <b>Spray In QF</b>                      | 601356              | 500 ml                                                      | 18 × 500 ml          | -          | 18313082    | 4260181254043    | 4260181251196                  | 54.99.02.0018            |
| <b>Spray In GA</b>                      | 601939<br>(Neutral) | 500 ml                                                      | 18 × 500 ml          | -          | 20190468    | 4260181257655    | 4260181257679                  | 54.99.02.0016            |
| <b>Beta Guard rfu</b>                   | 601544              | 500 ml                                                      | 18 × 500 ml          | -          | 18312289    | 4260181253060    | 4260181253077                  | 54.99.02.0017            |
| <b>Spray In Neu</b>                     | 601937              | 250 ml                                                      | 12 × 250 ml          | -          | 20136411    | 4260181253350    | 4260181257617                  | 54.99.02.0023            |
| <b>Lotio 2in1 (Cellulose)</b>           | 601643              | 60 Tücher/<br>Flowpack<br>mit LID                           | 20 × 60<br>Tücher    | 18 × 20 cm | 18849724    | 4260181254722    | 4260181254739                  | 54.99.02.0020            |
|                                         | 601911              | 60 Tücher/<br>Flowpack<br>mit Anfass-<br>lasche             | 22 × 60<br>Tücher    | 18 × 20 cm | 19878828    | 4260181250021    | 4260181250014                  | 54.99.02.0020            |
|                                         | 601901              | 15 Tücher/<br>Mini-Flow-<br>pack (mit<br>Anfassla-<br>sche) | 50 × 15<br>Tücher    | 15 × 20 cm | 19881569    | 4260181259147    | 4260181259154                  | -                        |

**Bildnachweise:**

alvarez, AndreiDavid, Cecilia Baji, Creativeye99, Dean Mitchell, digicomphoto,  
KatarzynaBialasiewicz, miljko, Rowan Jordan, stockfour, unpict, Yasonya, Zephyr1,  
DMP | [www.istockphoto.com](http://www.istockphoto.com)

kana Design Image, Maren Winter, PhotobyTawat | [www.shutterstock.com](http://www.shutterstock.com)

# Laboratorium Dr. Deppe GmbH – Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

## I. Allgemeines

Die nachstehenden Allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen werden Inhalt des Vertrages, den wir (Verkäufer) mit Unternehmern im Sinne von § 14 BGB (Kunden) abschließen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Etwaigen Allgemeinen Einkaufsbedingungen unserer Kunden widersprechen wir ausdrücklich.

## II. Zustandekommen des Vertrags, Anpassung des Lieferumfangs und Stornierung

1. Ein Vertrag kommt durch den Zugang der in Textform abgegebenen Auftragsbestätigung des Verkäufers beim Kunden zustande. Die Produktbeschreibungen des Verkäufers verstehen sich als Aufforderung an den Kunden, ein eigenes Angebot abzugeben, dass der Verkäufer mit der Auftragsbestätigung annimmt.
2. Der Inhalt des Vertrags richtet sich im Zweifel nach der Auftragsbestätigung.
3. Bestätigte Preise sind grundsätzlich verbindlich, es sei denn, der Verkäufer behält sich in der Auftragsbestätigung die Anpassung der Preise vor.
4. Der Verkäufer behält sich vor, die an den Kunden zu liefernde Menge der Auflage um 10% zu unter- oder um 10% zu überschreiten. Der Kunde zahlt die tatsächlich gelieferte Menge. Von diesem Recht Gebrauch machen darf der Verkäufer, wenn er selbst, trotz für den Auftrag des Kunden angepasster Bestellung, vom Vorlieferanten mit Mehr- oder Mindermengen versorgt wird.
5. Stornierungen eines Vertrags bietet der Verkäufer in Ausnahmefällen und nur gegen eine Stornogebühr an, die sich an den uns bis zur Bearbeitung des Stornowunsches des Kunden entstandenen Kosten orientieren. Einen Rechtsanspruch auf ein Stornoangebot hat der Kunde nicht. Das Stornoangebot teilt der Verkäufer dem Kunden nur schriftlich mit. Die Stornierung wird erst mit Eingang der Stornogebühr innerhalb der dem Kunden in der Mitteilung genannten Zahlungsfrist wirksam, wenn der Verkäufer in der Mitteilung nicht die Möglichkeit der schriftlichen Annahme des Angebots und eine darüberhinausgehende Zahlungsfrist anbieten.

## III. Lieferung

1. Liefertermine oder -fristen sind nur dann verbindlich, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt werden. Soweit Angaben zu Lieferzeiten genannt werden, sind diese annähernd.
2. Der Verkäufer schuldet vorbehaltlich anderweitiger Individualvereinbarung die Absendung der ordnungsgemäß verpackten Ware (Schickschuld). Er liefert stets EXW, Incoterms 2010, es sei denn, er bestätigt eine andere Vorgehensweise.
3. Für die Einhaltung von Lieferfristen und Lieferterminen ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder Lager maßgebend. Sie gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne ein Verschulden des Verkäufers nicht rechtzeitig abgesendet werden kann.
4. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung. Lieferfristen und Liefertermine verschieben bzw. verlängern sich so lange, bis der Kunde für die Auftragsausführung erforderliche Eigenleistungen erbracht hat (z. B. Beibringung aller behördlichen Bescheinigungen, Gestellung von Akkreditiven und Garantien, Leistung von Anzahlungen, Druck- und Produktfreigabeerklärungen, Anlieferung von Vorprodukten/Verpackungen).
5. Für den Fall des Verzuges kann der Kunde nach Ablauf einer vom Verkäufer gesetzten angemessenen Frist von mindestens zwei Wochen vom Vertrag zurücktreten, sofern die Ware bis zum Fristablauf nicht abgesandt ist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.
6. Lieferpflichten können in den nachfolgenden Fällen aufgeschoben oder ganz suspendiert werden. In jedem Fall ist der Verkäufer dazu verpflichtet, den Kunden über die Verzögerung unverzüglich zu informieren und im Falle der Suspendierung bzw. des Wegfalls der Lieferpflicht erhaltene Leistungen unverzüglich zurückzuerstatten.
  - a. Die Lieferverpflichtung des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Belieferung ist durch ihn selbst verschuldet. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind.
  - b. Bei Ereignissen höherer Gewalt ist der Ver-

käufer berechtigt, die Lieferung, um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn solche Ereignisse während eines vorliegenden Verzuges eintreten. Mit höherer Gewalt gleichgestellt sind in diesem Zusammenhang währungs-, handelspolitische und sonstige hoheitliche Maßnahmen (insb. Pandemiebedingte Maßnahmen), Streiks, Aussperungen, von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen (z. B. Feuer, Maschinenschäden, Rohstoff- oder Energiemangel), Behinderungen der Verkehrswege, Verzögerungen bei der Einfuhr-/ Zollabfertigung sowie aller sonstigen Umstände, die, ohne vom Verkäufer verschuldet zu sein, die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen. Unerheblich dabei ist, ob diese Umstände beim Verkäufer selbst oder einem Vorlieferanten eintreten. Sofern aufgrund vorgenannter Ereignisse die Ausführung des Vertrages für eine der Vertragsparteien unzumutbar wird, insbesondere einer Verzögerung der Ausführung des Vertrages in wesentlichen Teilen um mehr als 3 Monate hinausgeschoben wird, kann diese Partei ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten. Schadenersatzansprüche hieraus kann der Kunde nicht herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Kunden unverzüglich benachrichtigt.

#### **IV. Verpackung**

Der Verkäufer verpackt die Ware für den Versand auf Paletten. Die Verpackung ist nicht für die Endkundenbelieferung und nicht für die Lagerung der Ware vorgesehen und geeignet.

#### **V. Preis und Zahlung**

1. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Im Falle von Rahmenvereinbarungen oder Lieferkontingenten bedingt sich der Verkäufer Mindestbestellmengen aus. Eine Unterschreitung dieser Mindestbestellmengen im einzelnen Abruf bzw. der einzelnen Bestellung führt zu einem Mindermengenzuschlag von 10% auf den vereinbarten Produktpreis.
3. Soweit Ware durch den Kunden oder seinen Beauftragten abgeholt wird, die nicht für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bestimmt ist, hat der Kunde dem Verkäufer den steuerlich er-

forderlichen Ausfuhrnachweis (Gelangensbestätigung) vorzulegen. Andernfalls hat der Kunde dem Verkäufer einen Betrag in Höhe des jeweils für Inlandslieferungen geltenden Mehrwertsteuerbetrags zzgl. des Rechnungsbetrags zu zahlen.

4. Soweit nichts anderes individuell vereinbart ist, liefert der Verkäufer erst nach vollständiger Bezahlung der korrespondierenden Rechnung sowie aller weiteren fälligen Rechnungen des Kunden (Vorleistungspflicht des Kunden).
5. Bei Lieferung ins Ausland (auch EU-Ausland) kann der Verkäufer unabhängig von der Vereinbarung seiner Vorleistungspflicht die Lieferung von der Stellung einer Sicherheit durch den Kunden für die Bezahlung des Kaufpreises abhängig machen (Bankbürgschaft).
6. Der Kunde kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
7. Forderungen sind mit Zugang der Rechnung, spätestens 10 Tage nach Auslieferung der Ware fällig, soweit individualvertraglich nichts anderes vereinbart ist. Der Zugang der Rechnung per FAX oder per E-Mail beim Kunden genügt.

#### **VI. Rüge und Gewährleistung**

1. Für vom Verkäufer verkaufte Ware gilt eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr nach Eintreffen der Ware beim Kunden bzw. beim Versandungskauf mit Eintreffen der Ware am Bestimmungsort. Die Regelungen des Verbrauchsgüterkaufs bleiben hiervon unberührt.
2. Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens drei Tage nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort schriftlich anzuzeigen. Bei Streckengeschäften beginnt die Frist mit Eintreffen der Ware am Bestimmungsort. Der Kunde hat bei Streckengeschäften dafür Sorge zu tragen, dass seine Prüf- und Rügeobligenheit bei Ankunft am Bestimmungsort von ihm erfüllt werden kann. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen. Die Gewährleistungsfrist bleibt hiervon unberührt.
3. Im Falle der Durchführung einer vereinbarten Abnahme der Ware durch den Kunden ist die Rüge von Mängeln, die bei der vereinbarten Art der Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen.
4. Im Falle eines Mangelgewährleistungsanspruchs wird der Verkäufer nach seiner Wahl nachliefern



oder nachbessern. Im Falle des Fehlschlagens von zwei Nacherfüllungsversuchen kann der Kunde unter den gesetzlichen Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten oder mindern.

5. Gibt der Kunde dem Verkäufer trotz Aufforderung aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht unverzüglich Gelegenheit, sich von dem Mangel zu überzeugen (z.B. durch Rücksendung von Proben/Teilen der Ware), verfallen die Gewährleistungsansprüche bezüglich des gerügten Mangels.
6. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der bezogenen Waren liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Die anwendungstechnische Beratung des Verkäufers in Wort und Schrift gilt nur als unverbindlicher Hinweis auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreien den Kunden nicht von der eigenen Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch eine Haftung des Verkäufers in Frage kommen, so ist diese auf den Wert der von ihm gelieferten Ware begrenzt.

## VII. Haftungsausschluss

1. Soweit sich aus dieser Vereinbarung einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Verkäufer bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
2. Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer - gleich aus welchem Rechtsgrund - bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei sonstiger Fahrlässigkeit haftet er nur
  - a. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
  - b. für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung für die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags von eminenter Bedeutung ist und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
3. Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn der Verkäufer einen Mangel arglistig verschweigt oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat. Das gleiche gilt für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.
4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem

Mangel besteht, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

5. Insbesondere bezogen auf Art. 74 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, (CISG) setzt jede Haftung des Verkäufers auf Schadenersatz voraus, dass der Geschäftsführung oder Mitarbeitern mindestens leichte Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann, sofern nach diesen AGB, nach Vertrag oder nach Gesetz nicht ein höherer Verschuldensmaßstab gilt.

## VIII. Eigentumsvorbehalt

Der Verkäufer liefert ausschließlich unter folgendem verlängerten und erweiterten Eigentumsvorbehalt:

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) gegen den Kunden behält sich der Verkäufer das Eigentum an den verkauften Gegenständen vor.
2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Kunde hat den Verkäufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf, die dem Verkäufer gehörenden Gegenständen erfolgen.
3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist der Verkäufer berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; der Verkäufer ist vielmehr berechtigt, lediglich die Ware herauszuverlangen und sich den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, darf der Verkäufer diese Rechte nur geltend machen, wenn dem Kunde zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt wurde oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
4. Der Kunde ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren weiter zu verkaufen und/oder zu verarbeiten, zu verbinden oder zu vermi-

schen (Berechtigungen). In diesem Fall gilt folgendes:

- a. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei der Verkäufer als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der Verkäufer Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
- b. Die aus der Veräußerung der Gegenstände entstehenden Forderungen gegen den Abnehmer des Käufers tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an den Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Kunden gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
- c. Zur Weiterveräußerung, Verarbeitung, Verbindung sowie zur Vermischung und zur Einziehung der Forderung ist der Kunde ermächtigt, solange er selbst weder insolvenzrechtlich überschuldet noch zahlungsunfähig ist oder zu werden droht. Die Berechtigungen und das Einziehungsrecht enden in jedem Fall, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nicht bei Fälligkeit nachkommt, der Verkäufer dem Kunden deswegen eine Zahlungsfrist gesetzt hat und der Kunde die fälligen Forderungen nicht innerhalb der Frist vollständig bezahlt hat.
- d. Der Kunde hat dem Verkäufer auf dessen Anforderung vor Auslieferung an den Drittschuldner die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner (Drittschuldner) bekannt zu geben. Er hat auf Verlangen des Verkäufers alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern die Abtretung mitzuteilen.
- e. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen des Verkäufers um mehr als 10%, wird der Verkäufer auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers freigeben.

## **IX. Gerichtsstand, anwendbares Recht, Schiedsgerichtsklausel**

1. Der Gerichtsstand ist der Sitz des Verkäufers.
2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die einzelnen, auf dieser Vereinbarung fußenden Kaufverträge richten sich nach der United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG vom 11. April 1980 in der englischsprachigen Fassung.

## **X. Schlussbestimmungen**

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages und der AGB im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Regelungen als lückenhaft erweisen.
2. Änderungen oder Ergänzungen des jeweiligen Vertrags bedürfen der Schriftform.

**Laboratorium Dr. Deppe GmbH,  
Kempen, 24.03.2026**

**DrDeppe**



**Laboratorium Dr. Deppe GmbH**  
Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen  
T +49 (0) 2152 5565-0 W [www.drdeppe.de](http://www.drdeppe.de)

Copyright © 2026 - Laboratorium Dr. Deppe GmbH  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Inhalte dieses Katalogs, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei Laboratorium Dr. Deppe GmbH. Kein Teil dieses Katalogs darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopien, Aufzeichnungen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verteilt oder übertragen werden.

Art.-Nr. 480075



 **DrDeppe**

**Laboratorium Dr. Deppe GmbH**  
Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen  
**T** +49 (0) 2152 5565-0 **W** [www.drdeppe.de](http://www.drdeppe.de)